


"LAVASET"®

Mobiles Kranken Dusch- und Therapiesystem

"LAVASET"® L1

HM-Nr. 51.45.01.1002

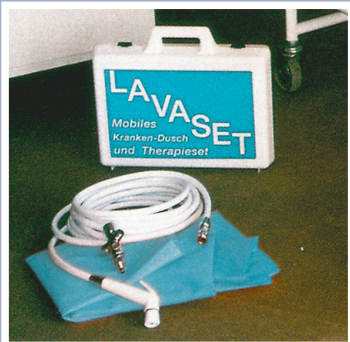

"LAVASET"® L3

HM-Nr. 51.45.01.1003



Die platzsparende, portable Kombination mit Absaugvorrichtung für:

- Krankenhaus
- Intensivstation
- Rehakliniken / Einrichtungen
- Alten- und Pflegeheim
- Home care Bereich
- Gemeindekrankenpflege
- Pflege zu Hause

Koffergerät mit Absaugvorrichtung

- 1 Stck. Flex. Bettwanne 1,90 m x 0,85 m x 0,27 m
- 8 m Duschschlauch mit Kupplung (80° - 14 bar)
- 2 m Absaugschlauch mit Absaugfuß
- 8 m Ablaufschlauch mit Schlauchbeschwerer
- 1 Stck. Perlator - Kupplungssatz 1/2" Anschluss für Außen- und Innengewinde mit Sprudler.
- 1 Stck. Spezialventil - Handbrausekopf mit 5 Stellungen: Dauer - Intervall - Komplettarretierung Strahl + Softstrahl
- 1 Stck. Absaugpumpe, 12 V Gleichstrom, Leistung: 10,5 L/min.
- 1 Stck. Akku 12 V - 6 Ah, absolut wartungsfrei
- 1 Stck. Transportkoffer

Anwendung



- 1 Die flexible, wasserundurchlässige Bettwanne wird im Bett unter den Patienten gerollt, an den Bettenden einfach mit Klettverschlüssen befestigt und damit zur Wannenform gespannt. Die Duschwanne ist leicht zu reinigen und benötigt extrem wenig Platz.
 - 2 Der Pflegebedürftige wird in Seitenlage gedreht, um die flexible Wanne wie ein Bettlaken einzuziehen.
 - 3 Die flexible Wanne wird bei Krankenhausbetten einfach an allen vier Enden mit den Klettverschlüssen aufgespannt. Auch bei herkömmlichen Betten lässt sich mittels Schnellspanner die Bettwanne anwenden, um den Pflegebedürftigen z. B. in seinem eigenen Bett zu duschen.
 - 4 Patienten waschen, duschen oder therapieren.
- Der Duschschlauch wird an die Mischbatterie der Sanitäreinrichtung mittels der Schnellkupplung adaptiert und unter den Abwasserschlauch stellt man ein Auffanggefäß (z.B. Eimer).
 - **"LAVASET"® L1 HM-Nr. 51.45.01.1002**
Die Kombination für: **Gemeindekrankenpflege, Pflege zu Hause**
 - **"LAVASET"® L3 HM-Nr. 51.45.01.1003**
Die platzsparende, portable Kombination mit Absaugvorrichtung für: **Krankenhaus, Intensivstation, Rehakliniken / Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime, Home care Bereich**

"LAVASET"® Die aufblasbare Bettwanne



Eine aufblasbare Bett-
auflage, die für alle her-
kömmlichen Bettarten
geeignet ist.

**Die Alternative oder
sinnvolle Ergänzung zu
unseren Mobilen Kranken
Dusch- und Therapie-
systemen**

"LAVASET" L1

HM-Nr.: 5145.01.1002

"LAVASET" L3

HM-Nr.: 5145.01.1003

Ermöglicht das Duschen, Therapieren und Baden im Bett

Bei der Wahl für dieses erweiterte Lavaset L3-System ist eine zusätzliche Pumpe zum Aufblasen der Wanne vorhanden, sowie eine stärkere Pumpe zum Absaugen des Brauchwassers.

Die gesamte Erweiterung ist ebenfalls, wie unsere anderen Systeme, als handliches Koffergerät erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- ⇒ in Kinderbetten
- ⇒ in rahmenlosen Betten
- ⇒ in Schwergewichtsbetten

Anwendung



- 1 Der Patient wird in die Seitenlage gebracht und die Wanne wird unter dem Patienten wie ein Bettlaken ausgerollt.
- 2 Die Wanne wird unter dem Patienten aufgepumpt und mit Wasser gefüllt.
- 3 Der Patient kann versorgt werden.

Die mobile Krankendusche „LAVASET“ hat sich inzwischen auf dem Markt der Hilfs- und Pflegemittel einen Platz gesichert.

Gerade bei Patienten mit schweren Hirnverletzungen wird das Duschsystem gern auch als Therapiehilfe bei der basalen Stimulation oder zur Wahrnehmungsförderung genutzt.

Kontakt



Mobiles Kranken Dusch- und Therapiesystem
Schützbitz 5 · D-56242 Nordhofen
Tel. 02626 17575 · Fax 02626 17576
www.lavaset.de · service@lavaset.de