

R82[®]
by Etac



R82 Heron

Wanneer u op zoek bent naar de
beste en eenvoudigste oplossing

 **etac[®]**




Heron

De Heron is een geavanceerde toilet- en douchestoel. Het eenvoudige en strakke ontwerp biedt meerdere functies die de gebruikservaring van zowel de gebruiker als de verzorger verbeteren.

De Heron bepaalt de nieuwe standaard voor gebruikers met speciale positioneringsbehoeften. De stoel is ergonomisch vormgegeven, wat betekent dat de zithoek en rughoek verstelbaar zijn. Het slimme ontwerp zorgt ervoor dat het anatomische draaipunt rond de as van de heupen tijdens het kantelen gehandhaafd blijft. Dat biedt de gebruiker meer zitcomfort.

Nothing compares to daily convenience!

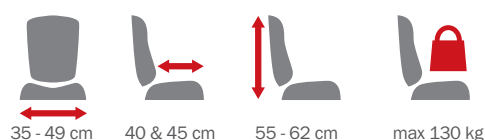

Eén maat - vele opties

De Heron is leverbaar in één maat en wordt geleverd met een smalle rugleuning die meer bewegingsvrijheid biedt.

Voor extra ondersteuning en comfort kan de stoel worden uitgerust met wegzwenkbare zijsteunen of gepolsterde zijondersteuning om de ruggedeelte te ondersteunen. We adviseren om altijd de polstering op de zitting en de rugleuning te gebruiken voor extra comfort.

De Heron kan worden geleverd met voormonteerde opklapbare armleuningen. Gebruik de armleuningen tijdens het douchen of bij toiletbezoek en klap ze weg als ze niet meer nodig zijn.

De Heron is leverbaar in een hydraulische of elektrische hoogteverstelling. Beide versies bieden dezelfde mogelijkheden van hoogte-, kantel- en rughoekverstelling.



[1] Heron, hydraulische hoogteverstelling [2] Hendel voor zithoekverstelling [3] Hendel voor rughoekverstelling
[4] Voetpedaal voor hydraulische hoogteverstelling [5] Heron, hydraulische hoogteverstelling [6] + [7] Armleuningen, opklapbaar

Heron elektrisch



[1] Lader met accu, wandmontage [2] Hendel voor rughoekverstelling [3] Afstandsbediening voor hoogte- en zithoekverstelling [4] Heron met **swing-away** armleuning, elektrische versie [5] Kabels zijn voorzien van nummers [6] Heron, elektrische hoogteverstelling [7] Accu op het frame gemonteerd

Optimale positionering

De Heron is geschikt voor tieners. Verander de rugleuninghoogte en voeg een aantal accessoires toe om de zitbreedte en de zitdiepte eventueel aan te passen.




The height of the back can be adjusted to fit the user. It can be adjusted up to 7 cm by simply loosening four screws, repositioning the back and remounting the screws.

The Heron has a total seat width of 55 cm. By mounting hip supports, it is possible to give additional support in the range between 35 to 49 cm, ensuring a snug fit around the user's hip and thighs.

De zitdiepte van 45 cm van de Heron is voor sommige gebruikers misschien aan de grote kant – in die gevallen kan de zitdiepte worden verkleind met behulp van een zitdiepteverkleining. De rugleuning wordt naar voren gebracht door twee blokken achter de rugleuning te plaatsen, waardoor de zitdiepte met 5 cm wordt verkleind.



Bij het ontwikkelen van de Heron werden drukmetingen gebruikt om de druk te verminderen en het comfort van gebruikers te verbeteren. Voor extra zitcomfort wordt geadviseerd om de polstering te gebruiken.

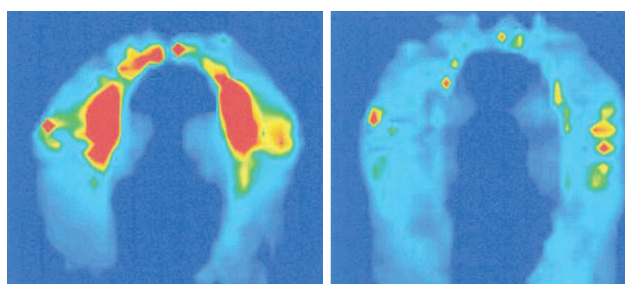

Dagelijks gebruik

Hoogteverstelling



Heron met elektrische hoogteverstelling: de zithoogte is verstelbaar van 56 tot 78 cm
Heron in hydraulische hoogteverstelling: de zithoogte is verstelbaar van 51 tot 78 cm

Kantelverstelling



De kantelhoek van de zitunit is verstelbaar van -5° tot 25° (elektrisch of gasveer)

Rughoekverstelling



De rughoek is verstelbaar van 90° tot 120° (gasveer)



Verzorging Op juiste Hoogte

Handmatig tillen en gebogen of ongemakkelijke werkhoudingen maken het werk van ouders/verzorgers risicovol. Wij adviseren daarom een tillift te gebruiken voor transfers van en naar de Heron.

Eén van de grote voordelen van de Heron is de hydraulische of elektrische hoogteverstelling en kantelverstelling waarmee de stoel in de juiste stand kan worden gezet en het werken in een gebogen of ongemakkelijke houding wordt beperkt.

In woningen waar het lastig is een plafondrail of een mobiele tillift in de badkamer te plaatsen, kan de gebruiker eenvoudig in de Heron worden gezet en naar de badkamer worden gebracht.

it betekent dat de gebruiker in de Heron kan blijven zitten en dat ook een tillift in de badkamer eventueel overbodig is. Met de Heron kunnen de meeste dagelijkse activiteiten in de badkamer worden uitgevoerd.

Voor transfers van gebruikers van en naar de Heron adviseren we het gebruik van Molift-producten.



Etac - Molift, tillifen en tilbanden







Reinigen

De bedieningsunit, accu en afstandsbediening zijn spatwaterdicht en kunnen in meeste badkamersituaties worden gebruikt. Verwijder alle accessoires. Koppel alle kabels los en zorg ervoor dat u de besturingskast, de accu en de afstandsbediening verwijderd alvorens u de Heron gaat reinigen in een wasmachine voor medische hulpmiddelen.



Kan op 85°C worden
gewassen in een
speciale machine voor
medische apparatuur*



*Besturingskast, accu en afstandsbediening moeten voor het reinigen worden verwijderd.

Accessoires

Er is een uitgebreide reeks accessoires leverbaar waarmee u extra comfort en functies aan uw Heron kunt toevoegen.

Door het bovenlichaam, het hoofd en de armen optimaal te ondersteunen, wordt het comfort voor de gebruiker in de stoel vergroot.

Alle accessoires worden altijd geleverd inclusief de installatiebenodigheden, wat de montage eenvoudig maakt.

Upgrade uw Heron door diverse nuttige accessoires toe te voegen.



Accessoires

- Hoofdsteen
- Zijsteunen
- Zijondersteuning ruggedeelte
- Fixaties
- Armleuningen
- Ondersteuningsblad
- Bekkensteunen
- Spatscherm
- Po
- Zitdiepteverkleining
- Beensteunen
- Kuitband
- Hakbanden
- Polstering, beensteunen



Hoofdsteun (meerdere modellen)



Zijsteunen, wegzwenkbaar



Zijondersteuning ruggedeelte met polstering



Fixatievest



Polstering zitgedeelte, ondersteuningsblad/ armleuningen




Bekkensteunen



Spatscherm, hoog model



Po

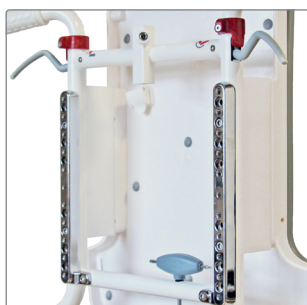

Zitdieptereductie



Beensteunen, met rechte kniehoek inclusief kuitband




Beensteunen, met rechte kniehoek, kort



Beensteunen, met open kniehoek



Hakbanden

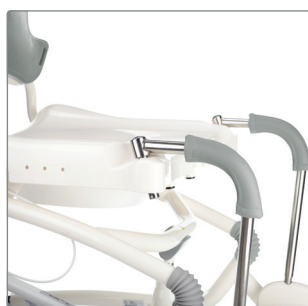


Polstering voor bovenzijde beensteunen

Meer accessoires op etac.nl


Is de Heron de oplossing?

Enkele eenvoudige metingen geven het antwoord


Neem simpelweg deze maten op om te zien of de Heron de juiste toilet- en douchestoel is voor de gebruiker. Voor een nauwkeurige meting is het nodig dat de gebruiker op een stevige vlakke ondergrond ligt, met de heupen, knieën en enkels in een hoek van 90°.

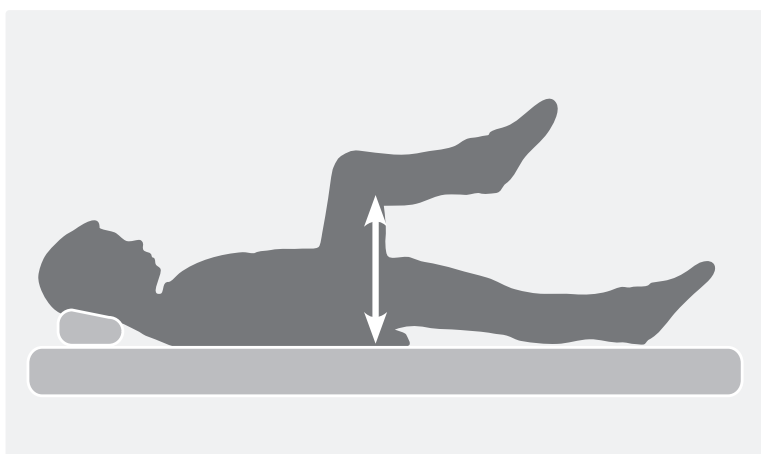

Zitdiepte

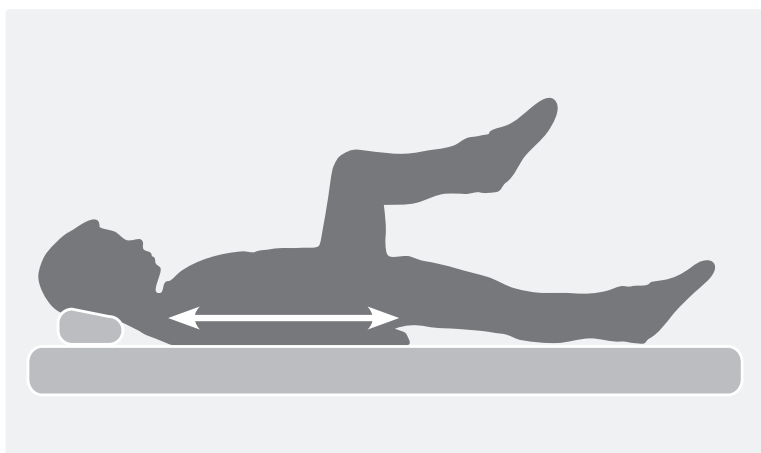

Rughoogte

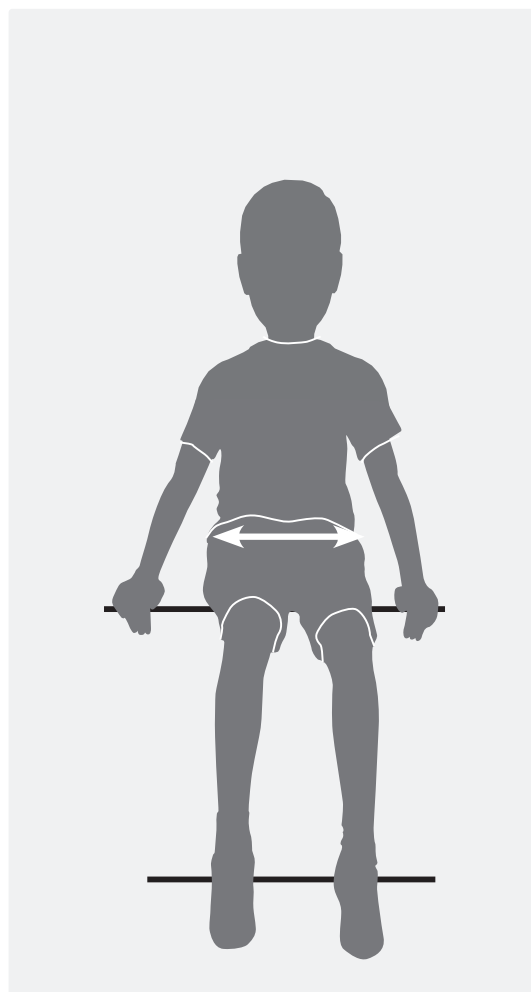

Heupbreedte

Afmetingen

De Heron is leverbaar in één maat en geschikt voor tieners en jongvolwassenen. Verander de rugleuninghoogte en voeg een aantal accessoires toe om de zitbreedte en de zitdiepte eventueel aan te passen.

	Heron (hydraulisch)	Heron (elektrisch)
Zitbreedte, standaard (A)	55 cm	55 cm
Zitbreedte met bekkensteun (accessoire)	35 - 49 cm	35 - 49 cm
Zitdiepte, standaard (B)	45 cm	45 cm
Zitdiepte met zitdiepteverkleining (accessoire)	40 cm	40 cm
Rugleuninghoogte (C)	55 - 62 cm	55 - 62 cm
Onderbeenlengte (D)	27 - 56 cm	27 - 56 cm
Zithoogte, vanaf de vloer (E)	51 - 78 cm	56 - 78 cm
Rugleuningbreedte (F)	29 cm	29 cm
Breedte, frame (G)	67 cm	67 cm
Lengte, frame (H)	71 cm	71 cm
Hoogte, tot bovenzijde rugleuning (I)	108 - 135 cm	113 - 135 cm
Kantelverstelling	-5° -> 25°	-5° -> 25°
Rughoekverstelling	90° -> 120°	90° -> 120°
Gewicht, zonder armleuningen	28 kg	31 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	100 kg	130 kg



"Hayla heeft het wereldrecord verbeterd"



Hayla Silva Søndergaard

Deze woorden komen van nertsenfokker Herman Jensen uit Støvring, die vol trots kan vaststellen dat zijn dochter, Hayla Silva Søndergaard, zojuist het wereldrecord op de 800 meter met maar liefst twee volle seconden heeft verbeterd.

Als gevolg van te weinig zuurstof bij haar geboorte lijdt Hayla Silva Søndergaard aan spasticiteit. Dat betekent dat ze voortdurend spasmen in haar hele lichaam heeft en slechts zeer beperkt kan spreken. Daarom praat Hayla via een computer, die ze met haar ogen kan sturen.

Ze vertelt dat haar spraakcomputer een voorbeeld is van de manier waarop haar kwaliteit van leven aanzienlijk is verbeterd sinds ze is begonnen met racerunning.

Toen ze met racerunning begon, zat ze met een riem om haar buik vastgebonden aan haar rolstoel en had ze onvoldoende controle om een spraakcomputer te kunnen bedienen.

"Racerunning heeft me meer rust en een betere controle in mijn lichaam gegeven", vertelt ze.

Hayla traint driemaal per week. Die trainingen zijn zowel op de atletiekbaan als op de wegen rondom de boerderij in Støvring, waar ze in het weekend veel rent als ze haar vader bezoekt.

Wij troffen Hayla op een ochtend in haar huis in de Hogeschool in Odder. Dit taaie meisje was bezig zich klaar te maken voor een nieuwe dag vol activiteiten, die eerst colleges op het programma had staan en later sport in de zaal.



Etac is wereldwijd toonaangevend in ergonomische hulpmiddelen en apparatuur voor het helpen van mensen. Ons hart ligt bij het leveren van oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de familie en zorgverleners.

Kijk voor meer nieuws of productinformatie op
www.etac.nl

Etac B.V.

Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
Tel 0513 68 16 86
contact.nl@etac.nl
www.etac.nl


Creating Possibilities