


- ▶ Rückenstütze
- ▶ Backrest

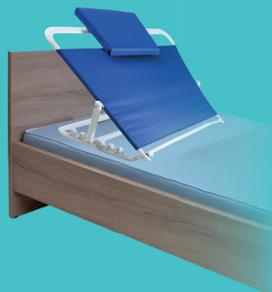

- ▶ Gebrauchsanweisung
- ▶ User manual

Technical specifications:

Item no. 46 500 / Backrest					
Material:	frame powder coated steel, surface backrest: coated nylon, position holder: plastic	Dimensions:	approx. 50 x 65 x 32,5 / 48 cm	Adjustments:	seat back angle five times adjustable
		Width supporting surface:	approx. 60 cm		
Colour:	white / blue	Lifespan:	approx. 10 years	Max. load:	113 kg

Cleaning / Disinfection

- ▶ When cleaning do not use any sharp, abrasive object or cleaning supplies.
- ▶ All parts are best cleaned with a damp cloth under using mild household cleaners.
- ▶ To care for the plastic surfaces specially plastic suitable products can be used.
- ▶ The backrest can be disinfected with a commercial, chlorine-free disinfectant.
- ▶ **Important:** When using disinfectants, the instructions for use of the manufacturer must be observed.

Warranty

According to the statutory warranty claims. Excluded from the guarantee are defects resulting out of natural wear and tear, intent, negligence or improper handling or use and defects which affect the value or usability of the tool only insignificantly.

We reserve the right of modifications serving the technical improvement.

Rückenstütze

Art.-Nr. 46 500

Backrest

Item no. 46 500



D**Verwendungszweck:**


Die Rückenstütze ermöglicht ein bequemes Liegen und Sitzen im Bett. Gerade im Krankheitsfall, wenn ein längerer Aufenthalt im Bett erforderlich und kein verstellbares Bettenkopfteil vorhanden ist, kann dies entspannend wirken. Durch 5 einstellbare Höhen können verschiedene Positionen zwischen Liegen und Sitzen gewählt werden. Ohne eigene Muskelkraft kann so z.B. die notwendige, möglichst aufrechte Liege-/ Sitzposition zur Nahrungsaufnahme eingehalten werden. Ein mit Bändern und Klettverschluss befestigtes Kissen polstert den Kopfbereich bei Bedarf zusätzlich ab.

Vor der ersten Benutzung:

Prüfen Sie den Artikel bitte auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Defekte Artikel dürfen nicht (mehr) genutzt werden, bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Montage:

- ▶ Die Rückenstütze wird komplett vormontiert geliefert und auf der Matratze positioniert.
- ▶ Falten Sie den Artikel auseinander und stellen Sie die Rückenstütze so in das Bett, dass der untere Aufnahmeholm ① mit den abgerundeten Ecken am Kopfteil endet.
- ▶ Durch den Bügel ② kann die gewünschte Sitzneigung eingestellt werden. Dazu bitte den Bügel in die gewünschte Position bringen und dann mit leichtem Druck in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Positionshalter einrasten lassen.
- ▶ Zur Veränderung des Neigungswinkels wird der Bügel durch leichtes Hochziehen wieder gelöst und in einer anderen Position, wie oben beschrieben, wieder eingerastet.
- ▶ Zur zusätzlichen Abpolsterung kann das vorhandene Kopfkissen auf die Rückenlehne gelegt werden.
- ▶ Nach Gebrauch kann die Rückenstütze aus dem Bett entnommen und platzsparend zusammengefaltet und verstaut werden.

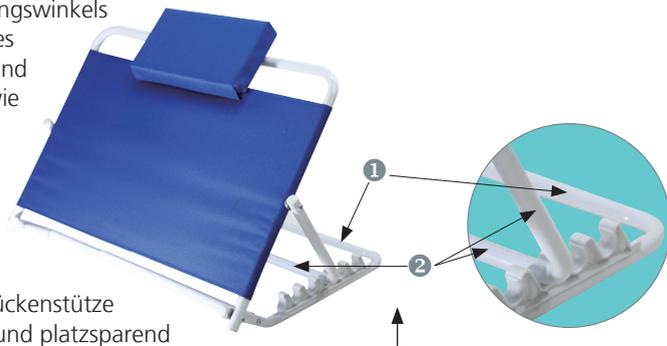**Benutzung:**

- ▶ Bitte achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass die Rückenstütze sicher in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingerastet ist.
- ▶ Die Rückenstütze muss mit dem unteren Aufnahmeholm an ein Kopfteil oder die Wand angelehnt sein, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- ▶ Die Rückenstütze immer mittig belasten (max. Belastung 113 kg).

Technische Daten:

Art.-Nr. 46 500 / Rückenstütze					
Material:	Rahmen pulverbeschichtetes Stahlrohr, Stützfläche Nylon beschichtet, Positionshalter Kunststoff	Maße:	ca. 50 x 65 x 32,5 / 48 cm	Verstellbarkeit:	Lehne fünffach winkelverstellbar
		Breite Stützfläche:	ca. 60 cm		
Farbe:	weiß / blau	Lebensdauer:	ca. 10 Jahre	max. Belastung:	113 kg

Reinigung und Desinfektion:

- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Gegenstände oder Reinigungsmittel. Die Rückenstütze kann mit einem feuchten Tuch unter Verwendung milder Haushaltsreiniger gesäubert werden, bei Bedarf kann auch ein mildes Wasch- oder Seifenlauge eingesetzt werden.
- ▶ Die Rückenstütze kann mit einem handelsüblichen, chlorfreien Desinfektionsmittel desinfiziert werden.
- ▶ **Wichtig:** Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften der Hersteller zu beachten.

Garantie:

Laut den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinflussen. Technische Änderungen, Um- und Anbauten sowie unsachgemäße Wartungsarbeiten führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung. Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen Verbesserung dienen.

EN**Intended use:**

The backrest allows comfortable sitting and lying in bed. Especially in case of illness, when staying in bed for a longer time is required and there is no adjustable headrest, it can have a relaxing effect. Different positions between lying and sitting can be selected by 5 adjustable heights. Without muscular strength you can hold the necessary, preferably upright sitting / lying position e.g. to take food or to drink. A pillow fixed with Velcro can cushion the head additionally.

Before first use

Inspect all parts for shipping damage. Defective items must not be used (any longer), please contact your dealer.

Assembly

- ▶ The backrest is delivered preassembled and has to be positioned on the mattress.
- ▶ Unfold the backrest and put it in bed, so that the lower spar ① with the rounded corners ends at the headrest.
- ▶ The required position can be adjusted with the bracket ②. Therefore you have to bring the bracket in the desired position. Pull it down into the recesses of the position holder with soft pressure.
- ▶ To change the tilt angle the clamp is released by slightly pulling up, then in another position down again.
- ▶ For additional padding the pillow can be placed on the backrest too. After use the backrest can be folded and put away.

Usage

- ▶ Before each use please check, if the clamp is surely locked in the recesses of the position holder.
- ▶ The backrest must end at the headrest or the wall in order to avoid slippery.
- ▶ Lean back on the backrest centrally (max. load 113 kg).