


Verbreiding Kiddo Classic

De Kiddo Classic groeit mee met je kind! Afhankelijk van de groei zijn er verschillende verbredingspakketten beschikbaar, waardoor jullie jaren plezier kunnen hebben van de Classic. Zo is de eerste verbreding eenvoudig uit te voeren met groeipakket G1. De eerste verbreding is verder, zonder extra onderdelen, voorzien in de rolstoel. Voor grotere verbredingen hebben we groeipakketten G2 tot en met G5 samengesteld.

Lees in dit document alle informatie over het verbreden van de Kiddo Classic. Informatie zoals de onderdelen die je nodig hebt voor de gewenste verbreding en hoe ziet een verbrede Kiddo Classic er uit ten opzichte van een standaard Kiddo Classic.

Welke onderdelen zijn van belang voor het verbreden?

- 1 Verbredingsblokken
- 2 Zitting
- 3 Rugleuning
- 4 Voetplaat
- 5 Werkblad
- 6 Positioneringsmiddelen

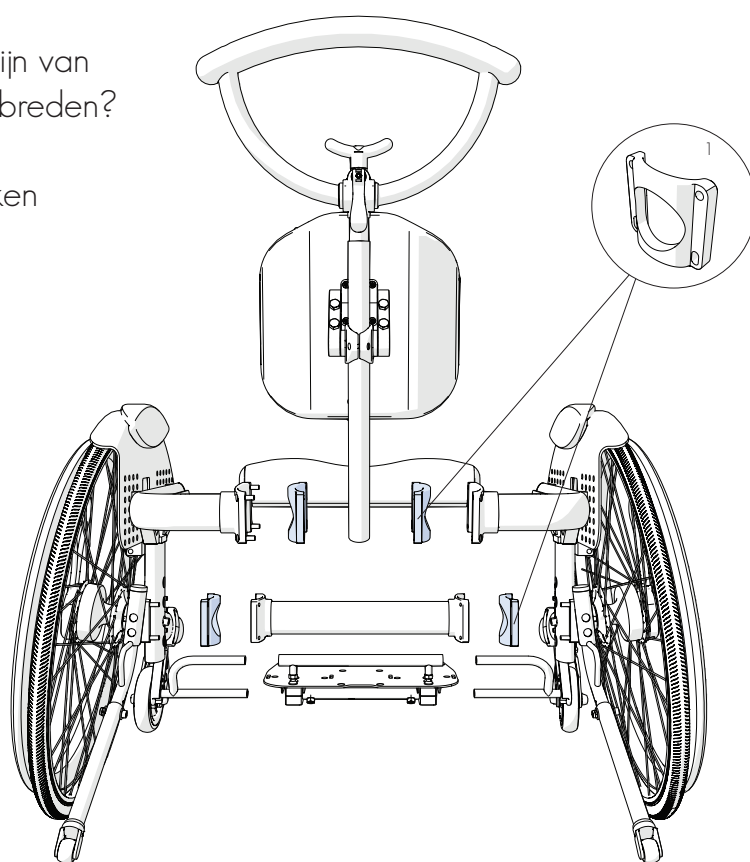


How To:
Lees hier hoe de verbreding uitgevoerd wordt:





<http://www.veldink.com/nl/how-to>


Welke onderdelen zijn altijd nodig voor welke verbreding?

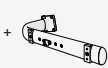	Vanuit basismaat	Al 2cm verbreed	Al 4cm verbreed
2cm verbreden:	G1  N7420C	G2 G1 +  N7601... (kies je model)	G3  +  +  N7136 N740.CL + N740.CR optioneel
4cm verbreden:	G4  +  +  2x (N7420C) N7601... (kies je model)	G5 G3 +  N7601... (kies je model)	G5 G3 +  N7601... (kies je model)
>4cm verbreden:	G5 G3 +  N7601... (kies je model)	G5 G3 +  N7601... (kies je model)	G5 G3 +  N7601... (kies je model)



Hoe ziet de standaard situatie
en de verbreding eruit?

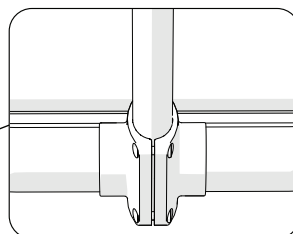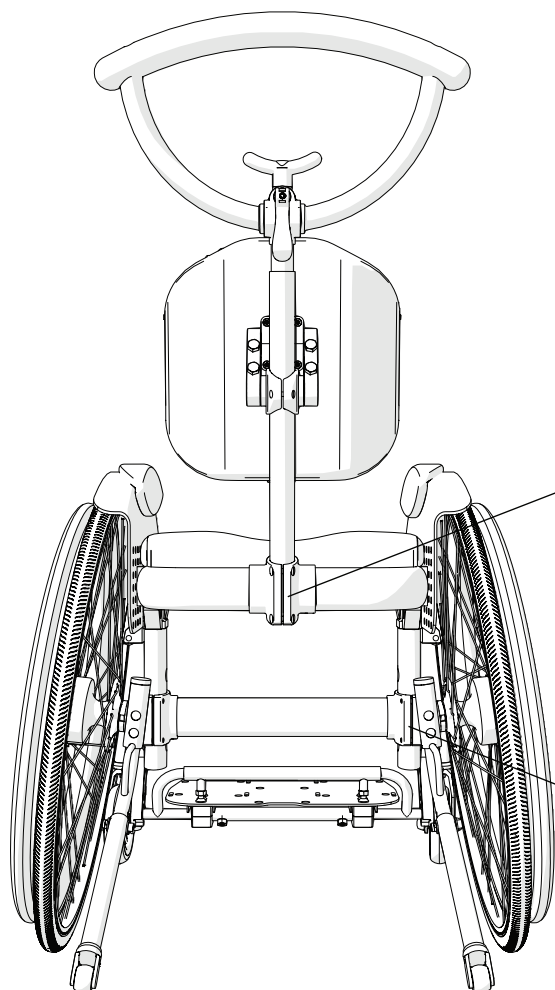


De rugbuis zit geklemd
tussen twee rugklemmen
zonder verbredingsblokken.

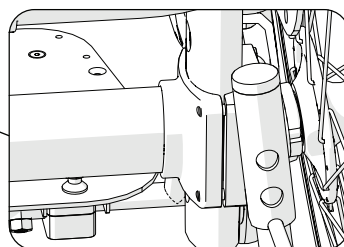

Er is geen
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en het wielblok.

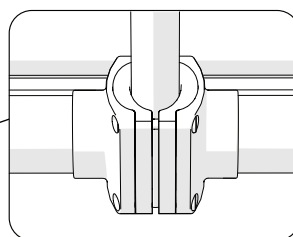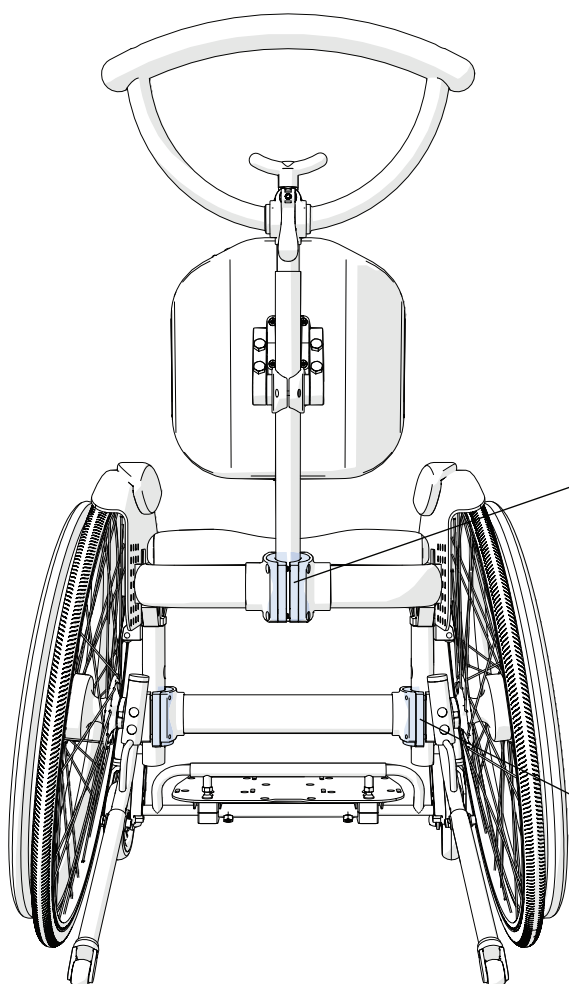

Tussen de rugbuis en de
rugklemmen zijn twee of
meer verbredingsblokken
zichtbaar.

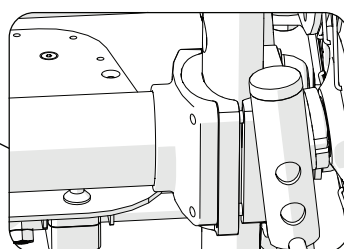

Er is minimaal één
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en het wielblok.