


Verbreiding Kiddo Tilt

De Kiddo Tilt groeit mee met je kind! Afhankelijk van de groei zijn er verschillende verbredingspakketten beschikbaar, waardoor jullie jaren plezier kunnen hebben van de Tilt. Zo is de eerste verbreding eenvoudig uit te voeren met groeipakket G1. De eerste verbreding is verder, zonder extra onderdelen, voorzien in de rolstoel. Voor grotere verbredingen hebben we groeipakketten G2 tot en met G5 samengesteld.

Lees in dit document alle informatie over het verbreden van de Kiddo Tilt. Informatie zoals de onderdelen die je nodig hebt voor de gewenste verbreding en hoe ziet een verbrede Kiddo Tilt er uit ten opzichte van een standaard Kiddo Tilt.

Welke onderdelen zijn van belang voor het verbreden?

- 1 Verbredingsblokken
- 2 Tussenstang
- 3 Zitting
- 4 Rugleuning
- 5 Voetplaat
- 6 Werkblad
- 7 Positioneringsmiddelen

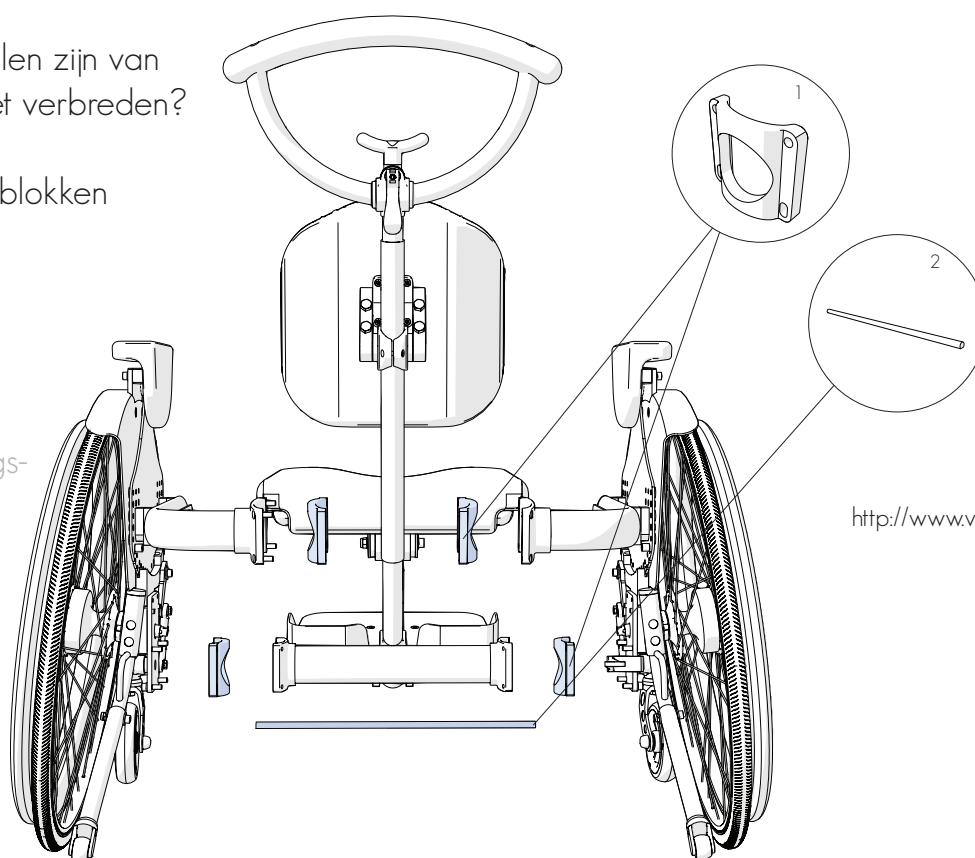

How To:
Lees hier
hoe de
verbreding
uitgevoerd
wordt:





<http://www.veldink.com/nl/how-to>


Welke onderdelen zijn altijd nodig voor welke verbreding?

	Vanuit basismaat	Al 2cm verbreed	Al 4cm verbreed
2cm verbreden:	G1 N7420C + T7420C	G2 G1 + T7601... (kies je model)	G3 N740.CL + N740.CR + T7544 + T7320
4cm verbreden:	G4 N7420C + T7420C + T7601... (kies je model)	G5 G3 + T7601... (kies je model) + T7320	G5 G3 + T7601... (kies je model) + T7320
>4cm verbreden:	G5 G3 + T7601... (kies je model) + T7320	G5 G3 + T7601... (kies je model) + T7320	G5 G3 + T7601... (kies je model) + T7320



Hoe ziet de standaard situatie
en de verbreding eruit?

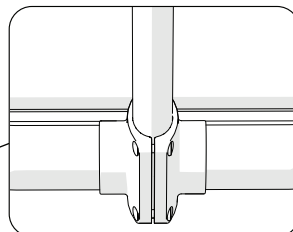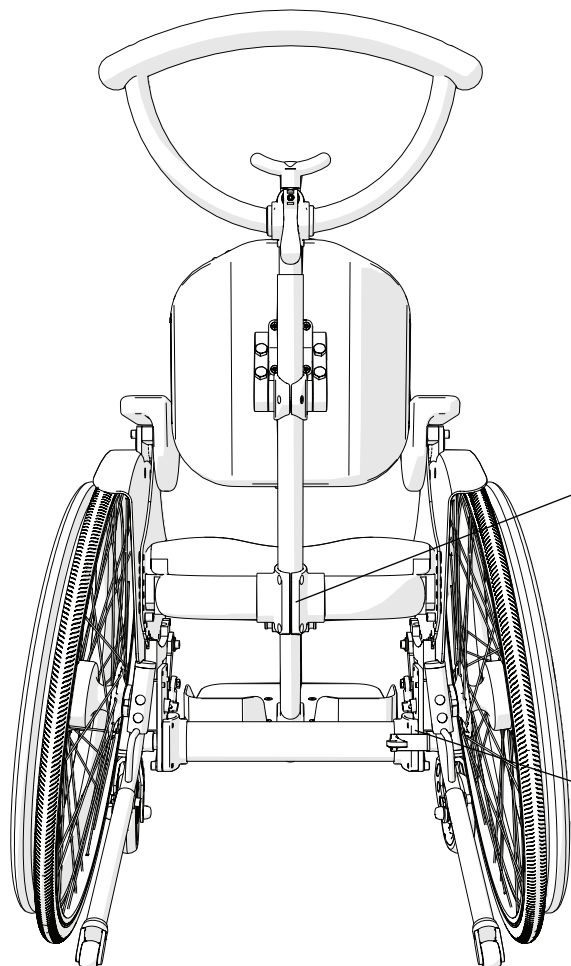


De rugbuis zit geklemd
tussen twee rugklemmen
zonder verbredingsblokken.

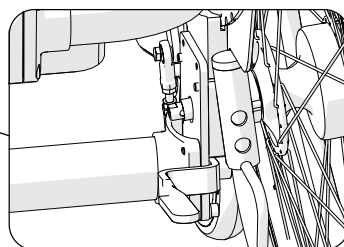

Er is geen
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en de dwars-
profielverlager

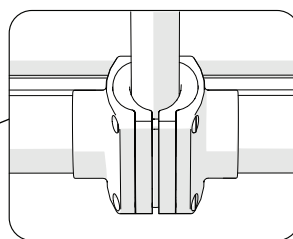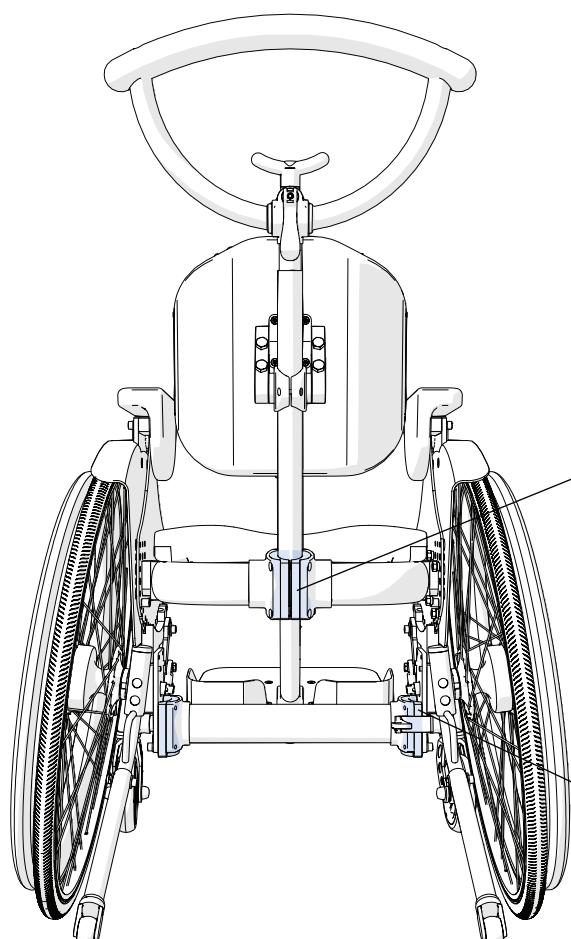

Tussen de rugbuis en de
rugklemmen zijn twee of
meer verbredingsblokken
zichtbaar.

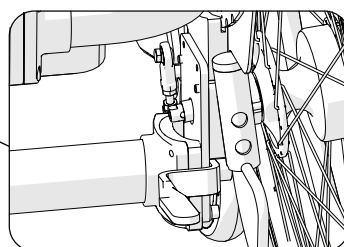

Er is minimaal één
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en de dwars-
profielverlager