


Verbreiding Kiddo Space

De Kiddo Space groeit mee met je kind! Afhankelijk van de groei zijn er verschillende verbredingspakketten beschikbaar, waardoor jullie jaren plezier kunnen hebben van de Space. Zo is de eerste verbreding eenvoudig uit te voeren met groeipakket G1. De eerste verbreding is verder, zonder extra onderdelen, voorzien in de rolstoel. Voor grotere verbredingen hebben we groeipakketten G2 tot en met G5 samengesteld.

Lees in dit document alle informatie over het verbreden van de Kiddo Space. Informatie zoals de onderdelen die je nodig hebt voor de gewenste verbreding en hoe ziet een verbrede Kiddo Space er uit ten opzichte van een standaard Kiddo Space. Tot slot kan je achterhalen welke onderdelen je nodig hebt per bouwjaar van de Kiddo Space.

Welke onderdelen zijn van belang voor het verbreden?

- 1 Verbredingsblokken
- 2 Zitplaat
- 3 Rugplaat
- 4 Voetplaat
- 5 Zitkussen
- 6 Rugkussen
- 7 Werkblad
- 8 Positioneringsmiddelen

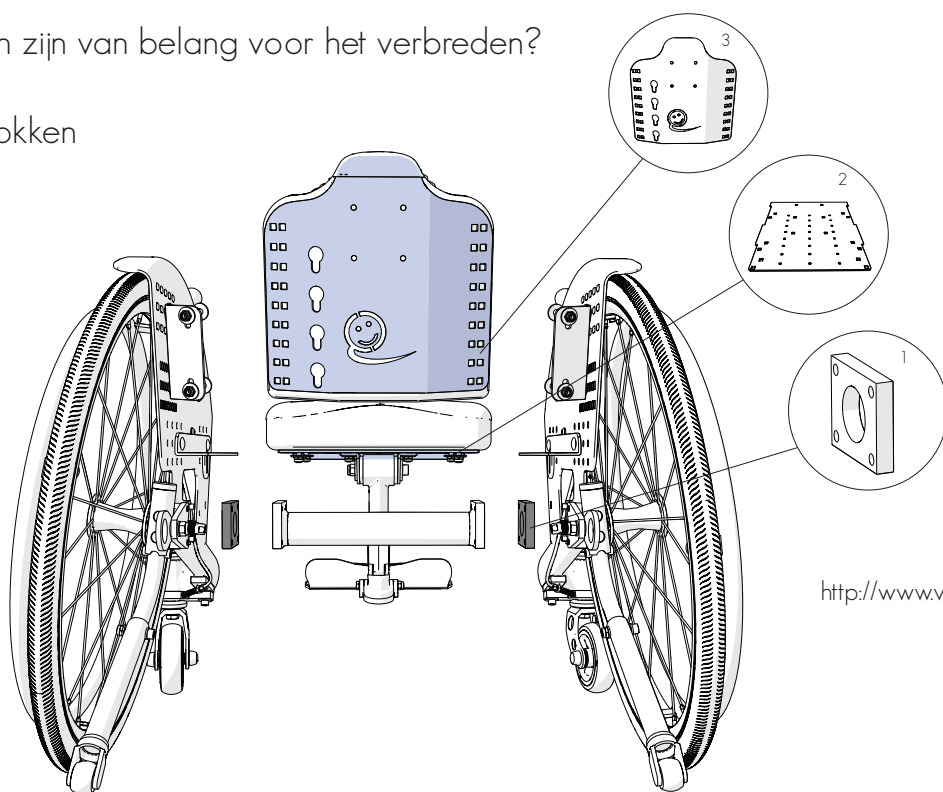

How To:
Lees hier
hoe de
verbreding
uitgevoerd
wordt:





<http://www.veldink.com/nl/how-to>


Welke onderdelen zijn altijd nodig voor welke verbreding? (let op het bouwjaar, zie ook blz 3.)

	Vanuit basismaat	Al 2cm verbreed	Al 4cm verbreed
2cm verbreden:	G1 Model: zie blz 3.	G2 Model: zie blz 3. S7402-ZB S7403-ZB	G3 S7122
4cm verbreden:	G4 2 x (Model: zie blz 3) S7402-ZB S7403-ZB	G5 S7122 S7402-ZB S7403-ZB	G5 S7122 S7402-ZB S7403-ZB
>4cm verbreden:	G5 S7122 S7402-ZB S7403-ZB	G5 S7122 S7402-ZB S7403-ZB	G5 S7122 S7402-ZB S7403-ZB


Hoe ziet de standaard situatie
en de verbreding eruit?

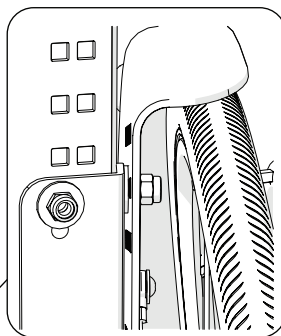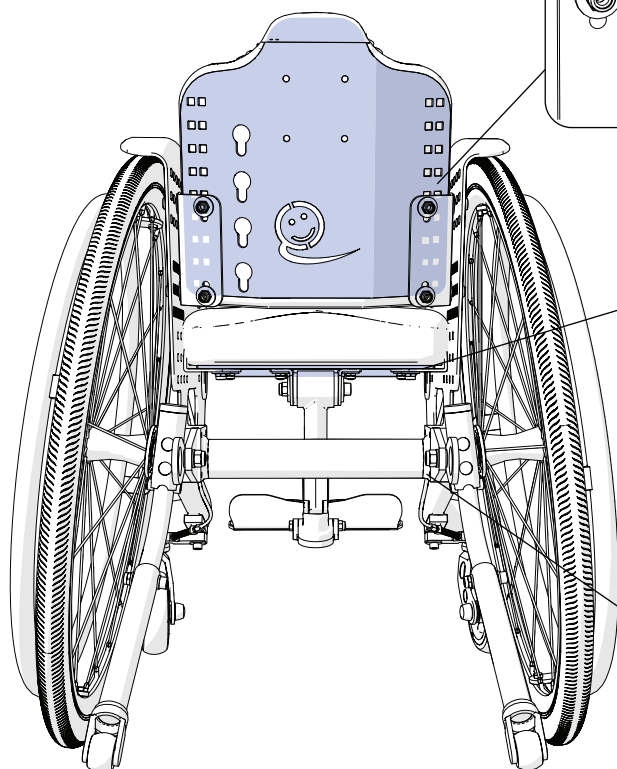



De rugplaat is
met de binnenste
gaten gemonteerd
in de rughouders

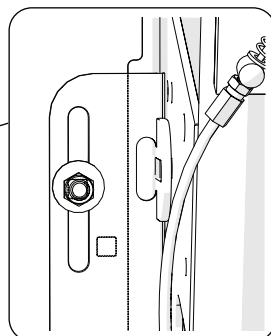


De zitplaat is
met de binnenste
gaten gemonteerd
in de zittinghouders

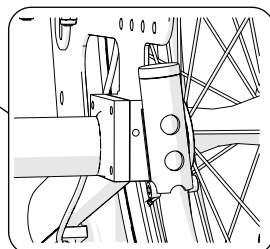


Er is geen
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en het wielblok

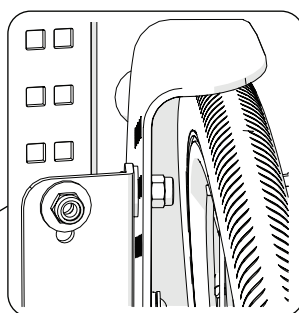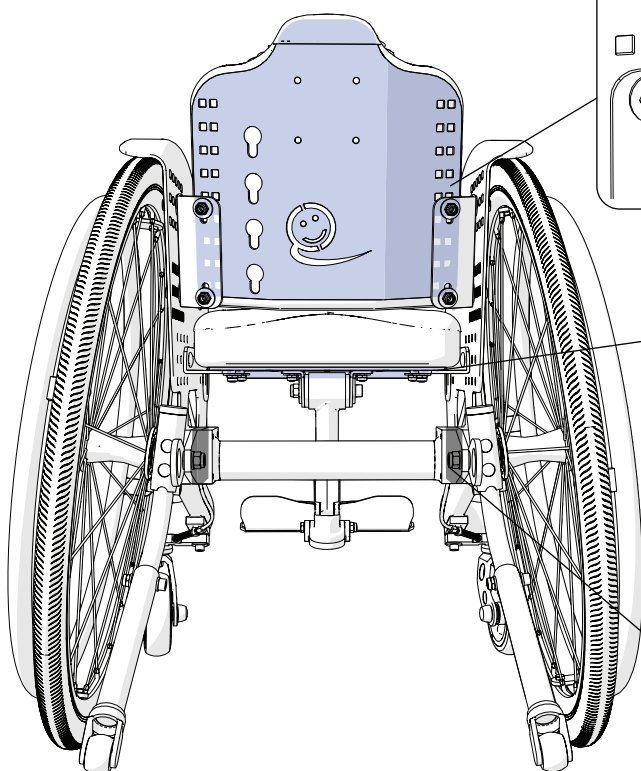

De rugplaat is
met de buitenste
gaten gemonteerd
in de rughouders

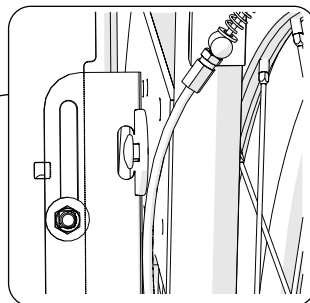


De zitplaat is
met de buitenste
gaten gemonteerd
in de zittinghouders

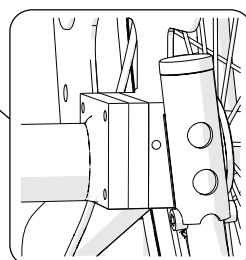


Er is minimaal één
verbredingsblok
zichtbaar tussen
het dwarsprofiel
en het wielblok

Hoe zien de verbredingsonderdelen in het frame per bouwjaar eruit?

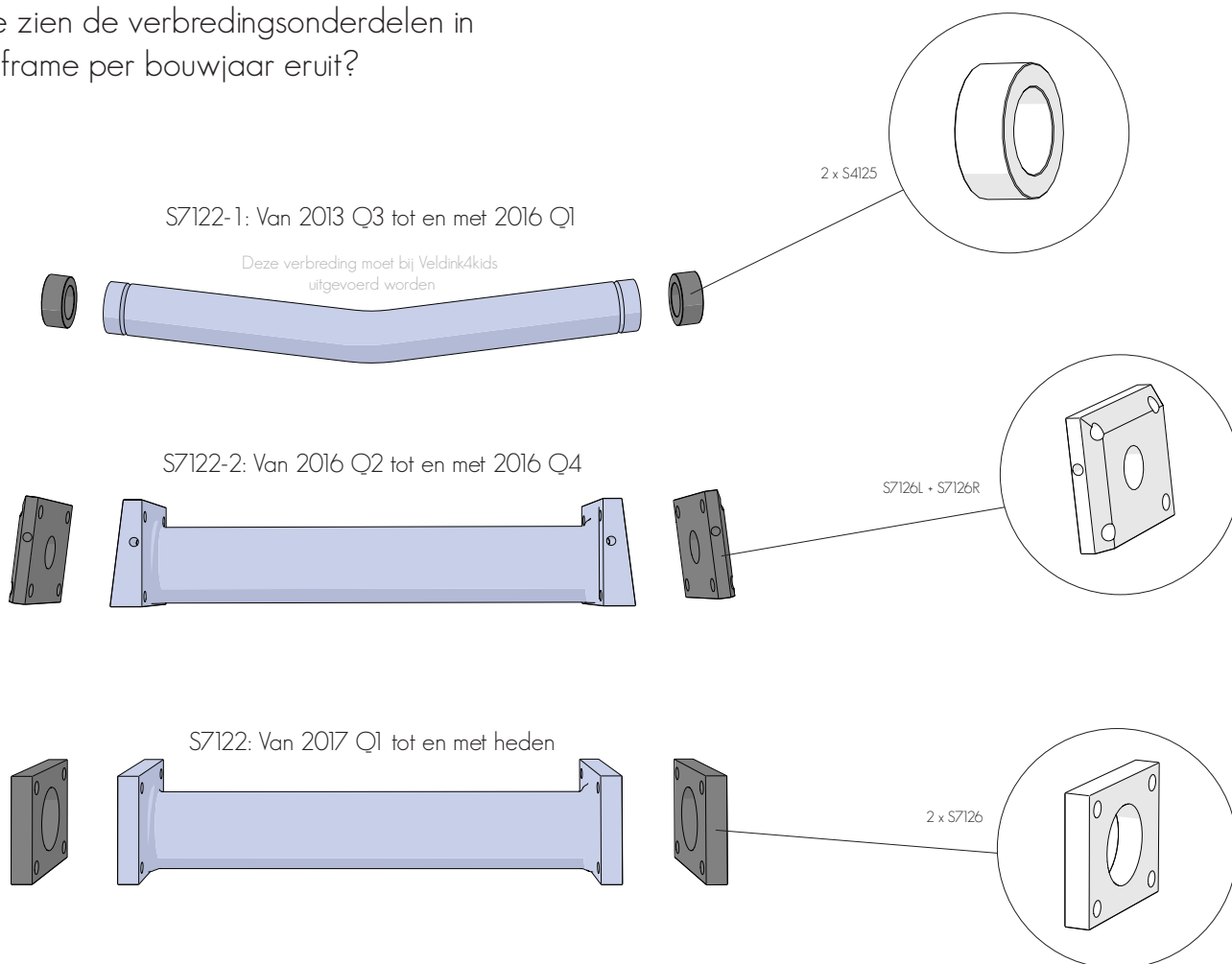

Hoe zien de rugplaten en de duwbeugelconnecties er per bouwjaar eruit?

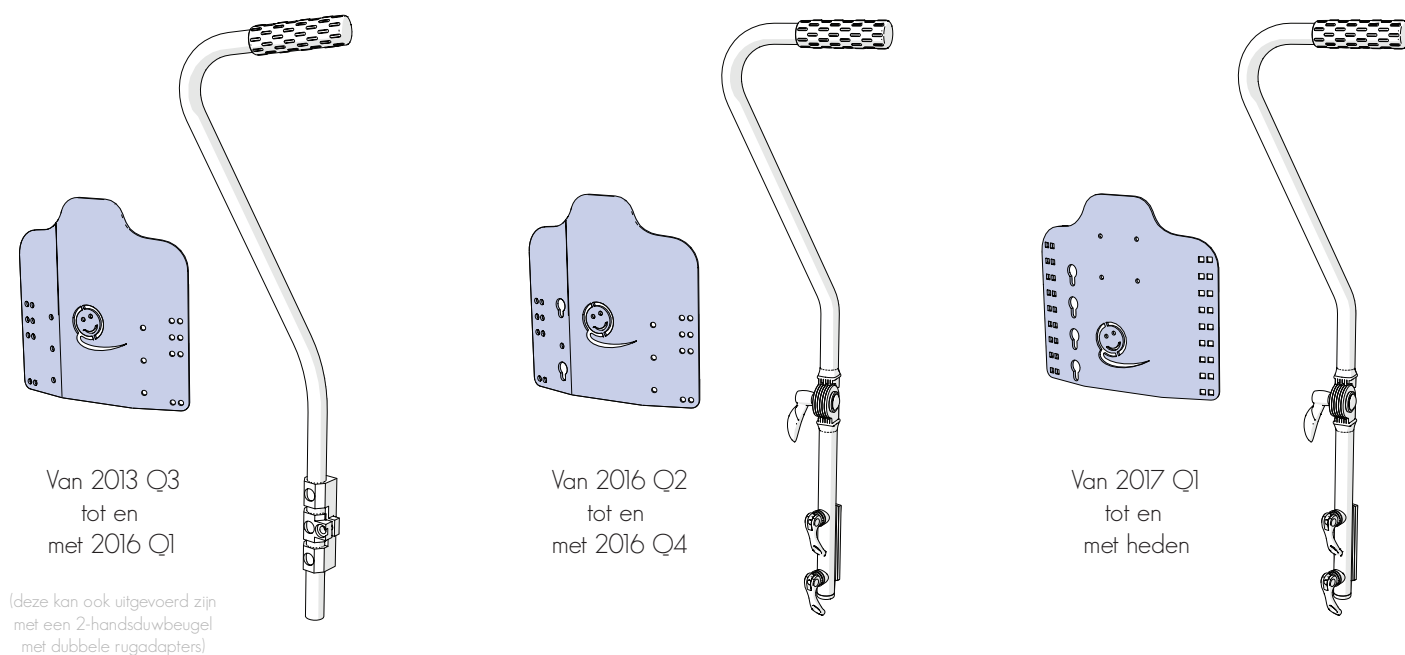

De verschillen in de zitplaten maken niet uit qua functionaliteit.