



albalink[®]
by albatros

Uw veilige verplaatsingen,
onze bekommernis

ZORGVRAGERS VEILIG VERPLAATSEN, BINNEN EN BUITEN.

We verplaatsen ons dagelijks ontelbare keren zonder daar veel bij na te denken. Voor zorgvragers met **zitondersteuning en -correctie** is dit echter vaak geen risicoloze onderneming. Naast de hulp van anderen hebben ze ook nood aan verschillende aangepaste toestellen om een veilige verplaatsing mogelijk te maken. Veilig transport in de op maat gemaakte zithulp in daartoe aangepaste en uitgeruste voertuigen is vaak niet gegarandeerd.


Albatros nam deze situatie ter harte en ontwikkelde de Albatros zitorthese met Albalink™ technologie. Een veilig en comfortabel systeem om onveilige verplaatsingen uit de wereld te helpen.

ALBALINK™

UW LINK NAAR VEILIGE VERPLAATSINGEN

Albatros ontwikkelde de Albalink, een veelzijdige snelkoppeling. De op maat gemaakte zitorthese kan met de Albalink eenvoudig en snel omgewisseld worden tussen het kameronderstel en het buitenonderstel. Zo zit de zorgvrager altijd in de juiste houding, met de juiste ondersteuning.

De snelkoppeling

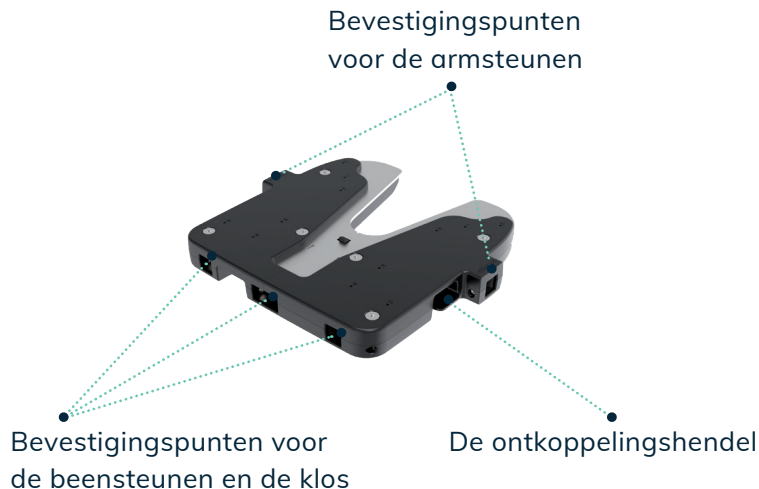

De bevestigingsplaat met verankering



Het gebruik van de ultrastevige RVS-platen in de koppeling en de bevestigingsplaat zorgt voor een **onvoorstelbaar sterke en veilige verbinding** tussen het onderstel en de zitschaal.

Door de **eenvoudige montage mogelijkheden** voor armsteunen, beensteunen en klos is daarenboven het onderhoud eenvoudig en snel uit te voeren.

De klos





COMFORTABEL ONDERSTEUND VEILIG IN TRANSPORT

De combinatie van de Albatros maatwerk zitorthese met de Albalink™ snelkoppeling en het Eco+ Albatros buitenonderstel werd succesvol onderworpen aan de strenge crashtest volgens Europese standaard (conform ISO 7176-19:2008)⁽¹⁾. In deze combinatie kan de zorgvrager veilig vervoerd worden in een aangepast voertuig. Zowel de ondersteunende als corrigerende zitortheses passeerden succesvol de crash testen.

Kortom, als pionier in de maatwerkortheses zet Albatros opnieuw een mijlpaal in het landschap van de zitortheses op maat.

⁽¹⁾ International standard ISO 7176-19:2008/Amd.1:2015 (E), Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles.

**Afbeelding van de combinatie zitschaal,
AlbalinkTM, Eco+ (Economy) onderstel**

- 1 Verstelbare duwbeugel
- 2 Hoofdsteun
- 3 Albatros zitschaal
- 4 Verstelbare armsteunen
- 5 AlbalinkTM
- 6 Beensteun
- 7 Taxihaken voor en achter
zowel links als rechts
- 8 Voetsteun
- 9 Voorwiel
- 10 Achterwiel
- 11 Stoeppedaal
- 12 Dubbele gasveer
- 13 Bedieningshendel
voor zithoekverkanteling



ONDERHOUD EN HYGIËNE



Het leder

Het volstaat om het leder met steeds dezelfde, licht vochtige doek op te schonen. We raden aan het leer 2 x per jaar te behandelen met voedende ledercrème om de soepelheid te bewaren.



Albatros gebruikt voor zijn orthopedische toepassingen een hoog kwalitatief, gemakkelijk te onderhouden rundsleer van Europese oorsprong. Het leder heeft een natuurlijk uitzicht, is licht gepolijst en heeft een afgewerkte dikte tussen de 0,9 en 1,1 mm. Het beschikt over het 'Blauwe Engel' label.

Het onderstel en de koppeling

Het ECONOMY onderstel is voorzien van een slijtvaste kunststof-laag. Alle delen kunnen gereinigd worden met zeepsop en een zachte spons. Alle voor dit toepassingsgebied gebruikelijke desinfecterende middelen kunnen voor het desinfecteren gebruikt worden.



VRAGEN? CONTACTEER ONS!

Albatros NV

Gestelhoflei 37
2820 Bonheiden

+32(0)15 56.01.56
contact@albatros.be
www.albatros.be

OPENINGSTIJDEN

MA-VR: 8u30-12u00
& 12u30-17u00

ZA-ZO: gesloten