

## Technische fiche



### Informaties


Aanstelling Inklapbare douchestoel Arsis®, 442 x 450 x 500 mm, Wit ABS zetel en Wit Epoxy Aluminium onderstel, Ø 25 mm

Referentie 047730

#### DE PLUSPUNTEN

Montage va het doucheplankje op de houder op de plaats van het Arsis® zitje.  
Met automatische steunpoot.

## Beschrijving

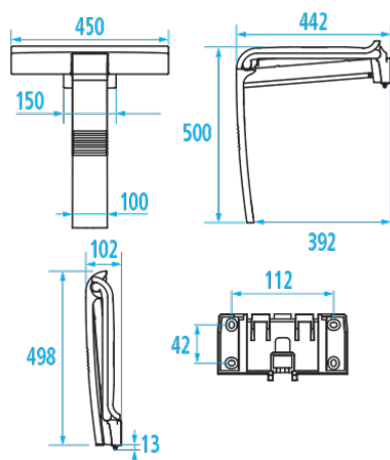

Opklapbare douchezitting met automatische wit steunpoot. Onderstel uit wit of verchromd aluminium gietijzer, ergonomische basis grote maat 450 mm uit ABS, onzichtbare bevestigingen.

Vergrendelpositie, antidiefstal. Kan van zijn muurhouder geclijpst worden voor onderhoud en occasioneel gebruik in gemeenschappen.

Montage van het plankje op de jouder op de plaats van het zitje (Ref. 047735 ou 047736).

Genormaliseerde hoogte 500 mm.

Verkocht met plankje met muurhouder en schroeven.

Onzichtbare bevestigingen.

Ze passen perfect bij de stangen van het Arsis® gamma.

Aangepast aan hotelgebruik.

## Technische kenmerken

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Diameter Ø                 | 25 mm              |
| Kleur                      | Wit                |
| Afwerking                  | Epoxy              |
| Afmetingen                 | 442 x 450 x 500 mm |
| Materiaal                  | ABS en Aluminium   |
| Getest in laboratorium aan | 225 kg             |
| Verpakking                 | Kartonnen doos     |
| Waarborg                   | 5 jaar             |
| CE : toegelaten belasting  | 150 kg             |
| Gencod                     | 3563390477304      |
| Douanecode                 | 7615200000         |

Infoblad

A13570016

## Ondehoud en installatie gids

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm).

Na de montage en vooraleer u de stoel gebruikt, moet u er zich van vergewissen dat de bevestigingsschroeven goed zijn vastgeschroefd. De douchestoel is ontworpen om in zitstand gebruikt te worden.

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen wordt het formeel afgeraden om op de stoel te staan. Wanneer de stoel opgeklapt is, mag u deze niet als steungreep gebruiken.

Om elk gevaar op vastklemming te vermijden mag u uw vingers niet tussen de beweegbare delen steken. Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze douchestoel.

## Onderhoud

**BELANGRIJK:** Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

## Faciliteit van gebruik

### Functie

Rust



### Kenmerken

Horizontaal



Verticaal



Schuin



Corrosiewerrend



### Soort gebruik

Bad



Douche



WC



Wastafel



Kleedkamer



### Plaats van gebruik

Medische instellingen



ERP/IOP



Hotels



Prive huizen



Wekplaatsen

