


Positioneringkussens

Samenstelling

Vulling

De vulling van het kussen bestaat uit kleine polyesterbolletjes. Deze zijn vormvast, brandvertragend, milieuvriendelijk en zorgen voor een goede temperatuur en vochtigheidsbalans binnenin het kussen. De kleine, ronde bolletjes zorgen voor een voldoende luchtcirculatie. Ze verspreiden automatisch en gelijkmatig de op het kussen uitgeoefende druk. Zo kan men het kussen in iedere gewenste positie plaatsen en het lichaam op een degelijke manier ondersteunen.

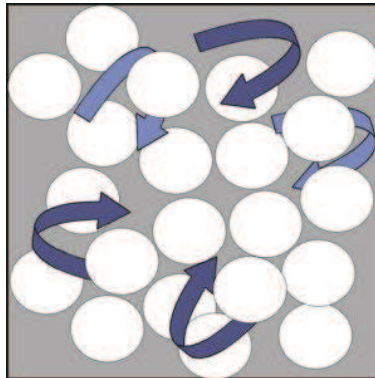

Hoes

De hoes van het kussen is gemaakt in een waterafstotend bi-elastische stof. Deze is ook antibacterieel, anti-huisstofmijt en brandvertragend. Het bestaat uit PU materiaal en is met elk ontsmettingsmiddel afwasbaar.

Overtrek

Wij raden steeds aan om met een buitensloop te werken die gemakkelijk afneembaar is d.m.v. een drukknopsluiting aan de onderkant van het kussen of een rits.

Wij werken met hoezen in kwal. 1010. Dit materiaal is vervaardigd uit een vochtwerend, brandvertragend, kookwasbestendig, zeer sterk en duurzaam stretchtextiel.

Functie

Positionering (gewenste houding)

Vooraf door zijn gemakkelijk hanteerbare vormen zijn de kussens zeer geschikt om mensen in een bepaalde houding te positioneren. Dit kan zowel in een lig als zithouding.

Als het kussen eenmaal in zijn juiste vorm en op de gewenste plaats is, verandert het niet meer van positie. Het wegzakken uit een gekozen houding of het naar beneden schuiven behoort tot het verleden.

Het kussen kan zowel dienen om op een aangename, ontspannende manier te zitten, te liggen of te slapen.

Maar het kussen wordt vooral ook gebruikt om de patiënten in een bepaalde houding te fixeren zodat de drukplekken worden weggenomen door een gelijkmatige drukverdeling.

Anti-decubitus (ondersteuningsfunctie)

Doorligwonden zijn zeer onbehaaglijk en pijnlijk voor de patiënt. Zij genezen vaak moeilijk en zorgen voor een extra belasting voor het verzorgend personeel. De beste verzorgingsmaatregel hiervoor is de patiënt vaak van houding te laten veranderen. Door de correcte en aangename ondersteuning van de positioneringkussens is zitten en liggen echt ontspannend. Bovendien zijn de combinaties (rolstoel, zetel, bed,...) en het aantal mogelijke wisselhoudingen bijna eindeloos.

Soorten kussens

Md 40630: Boemerangkussen, buitenomtrek +/- 200 cm, PU groengrijs

Md 40631: Hoes voor boemerangkussen in kwal 1010 met drukknopen over onderzijde

Het Boemerangkussen zorgt voor een stabiele en ontspannen lig houding, ontlasting van de wervelkolom en ledematen en geeft een volledige ondersteuning. Het zorgt ervoor dat de patiënt in een gekozen positie blijft liggen met een volledige ondersteuning. Het is ideaal ter preventie van doorligwonden bij wisselhoudingen.



Md 40635: Boemerangkussen XL, buitenomtrek +/- 260 cm, PU groengrijs

Md 40636: Hoes voor boemerangkussen XL in kwal 1010, drukknopen over onderzijde

Het Boemerangkussen XL geeft een geborgen gevoel en zorgt hierdoor dat de patiënten opmerkelijk vaster gaan slapen. Het kussen is ideaal voor personen groter dan 1,80 m of voor personen die in een vaste positie moeten geplaatst worden of snel uit hun bed rollen.

Md 40640: Boemerangkussen XS, buitenomtrek +/- 120 cm, PU groengrijs

Md 40641: Hoes voor boemerangkussen XS in kwal 1010, ritssluiting

Het boemerangkussen XS is een multifunctioneel kussen dat door zijn compacte vorm overal kan gebruikt worden voor een positionering van elk lichaamsdeel.



Md 40645 md 40640 md 40630 md 40635

Md 40645: Nekkussen, buitenomtrek +/- 100 cm, PU groengrijs

Md 40646: Hoes voor nekkussen in kwal 1010, ritssluiting

Md 40650: Steunkussen bij verlammingen, buitenomtrek +/- 285 cm, PU groengrijs

Md 40651: Hoes voor model 40650 in kwal 1010, drukknopen over onderzijde

Het steunkussen bij verlammingen ondersteunt door zijn specifieke vorm het verlamde been en bekken en voorkomt het naar buiten kantelen ervan. Bij een wisselhouding gaat men het verlamde deel enkele graden verder positioneren en zorgen voor een positieve bloeddoorstroming.



Md 40650

Md 40655: Recht steunkussen, lengte +/- 60 cm, PU groengrijs

Md 40656: Hoes voor recht steunkussen in kwal 1010, drukknopen

Het recht steunkussen is een veelzijdig rechthoekig kussen dat gebruikt wordt voor de ondersteuning en gelijke drukverdeling van elk lidmaat. Het wordt het meest gebruikt voor de ontlasting van het onderbeen, hielen, arm of pols, maar het heeft nog vele andere mogelijkheden.



Md 40655

Md 40665: Slangkussen, lengte +/- 190 cm, PU groengrijs

Md 40666: Hoes voor slangkussen in kwal 1010 met ritssluiting



Md 40665

Md 40667: Slangkussen met kop en extra lengte, PU groengrijs

Md 40668: Hoes voor slangkussen met kop en extra lengte in kwal 1010 met ritssluiting



Md 40667

Md 40670: O-kussen, PU groengrijs

Md 40671: Hoes voor O-kussen in kwal 1010 met ritssluiting

Md 40675: driehoekkussen voor ondersteuning in de knieholte, PU groengrijs

Md 40676: Hoes voor driehoekkussen in kwal 1010 met ritssluiting

Het driehoekkussen zorgt voor een ondersteuning van de knieholte en brengt de benen in hoek. Hierdoor worden de lagere ruggenwervels ontlast en de spieren ontspannen. Het kan ook gebruikt worden om de hielen vrij te leggen en zo doorligwonden te vermijden.



md 40675

Md 40680: Stoelkussen met 3 compartimenten, PU groengrijs

Md 40681: Hoes voor stoelkussen met 3 compartimenten in kwal 1010 met drukknopen

Het stoelkussen met 3 compartimenten is in het ruggedeelte gevuld met zachte vlokken. De benen van het kussen zijn matig gevuld met de polyester korrels zodat je de vulling in het been naar wens kan verdelen.



md 40680

Md 40685: Abductie kussen, PU groengrijs

Md 40686: Hoes voor abductie kussen in kwal 1010 met drukknopen

Het abductie kussen zorgt ervoor dat de knieën geen rechtstreeks contact met elkaar hebben en de druk gelijkmatig verdelen om doorligwonden te vermijden. Het kussen kan in ruglig of zijlig gebruikt worden.



Md 40685

Md 40690: Prematuren kussen, PU groengrijs

Md 40691: Hoes voor prematuren kussen in kwal 1010 met drukknopen

Dit kussen geeft aan prematuren het gevoel van geborgenheid en houdt ze in een foetushouding waardoor ze rustiger slapen.

Md 40693: Hielkussen in verschillende banen doorstikt, afm. 90/60 cm, PU groengrijs

Md 40696: Hoes voor hielkussen in banen doorstikt in kwal 1010 met ritssluiting



Md 40693



Md 40697

Md 40697: Cilinderkussen, 40 cm lang, Ø 18 cm, PU groengrijs

Md 40698: Hoes voor cilinderkussen in kwal 1010 met ritssluiting