

veilig draaien in bed


Ons wentellakensysteem® maakt verplaatsen en wentelen in bed gemakkelijk



de betrokken specialist



Heeft u pijn of moeite met draaien in bed, door druk- of schuifkrachten, wonden of andere fysieke klachten? Is wisselganging belangrijk om het herstel te versnellen of klachten te verlichten? Dan is ons wentellakensysteem wellicht een uitkomst.

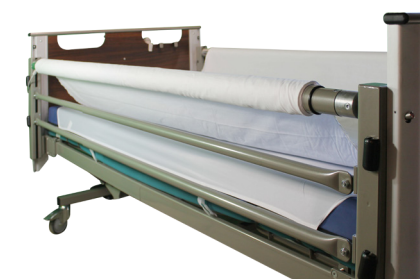

Ons wentellakensysteem is een slim elektrisch wentel systeem dat gemakkelijk is te bedienen. Het past op bijna ieder hooglaagbed en is snel te monteren. Aan weerskanten van het bed worden kleine kolommen geplaatst die voorzien worden van een ingenieus rolsysteem voor een wentellaken. Mantelzorgers en verzorgenden kunnen u met ons wentellakensysteem gemakkelijk helpen bij het draaien en verschuiven in bed, zonder dat u pijnlijk glijdt of hoeft te worden opgetild.

Ons wentellakensysteem doet het zware werk

Helpen bij het draaien en verplaatsen in bed, is met ons wentellakensysteem veel minder zwaar. Ons wentellakensysteem doet het zware werk. U hoeft niet te worden vastgepakt, opgetild of verschoven. Ons wentellakensysteem is eenvoudig te bedienen met de elektrische handbediening.

Ook het installeren van ons wentellakensysteem is simpel. Wanneer de kolommen met het wentelsysteem zijn gemonteerd, wordt het wentellaken op de rolbuis aan de ene kant van het bed vastgezet en uitgerold over het matras naar de rolbuis aan de andere kant van het bed.

Door de combinatie van het systeem met een speciaal glijlaken voor het matras, draait en schuift u zonder veel weerstand en wrijvingswarmte in het bed. U voorkomt bewegingspijn, huid- en wond-irritatie die herstel in de weg staan of pijn en klachten kunnen verergeren.

De veiligheid voor de gebruiker is met ons wentellakensysteem tevens gewaarborgd. Want door de twee extra buizen onder de rolbuis kan de gebruiker niet uit bed rollen. Een veilig idee voor gebruiker en verzorgende.

Voordelen van ons wentellakensysteem

- Werkt preventief en genezend voor wonden en decubitus
- Zorgt voor een prettige en comfortabele ligpositie
- Voorkomt fysieke overbelasting van de verzorger
- Draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving (arbo)
- Is een CE-gemarkeerd en gepatenteerd zorg hulpmiddel
- Is snel en eenvoudig te monteren (15-20 minuten)
- Past op bijna alle hooglaag bedden
- Is makkelijk wegklapbaar voor prettig in en uit bed
- Bevordert de wisselganging naar links en rechts
- Elektrische handbediening
- Is in lengte, breedte en hoogte verstelbaar

Specificaties

- Kleur: Standaard grijs (aanpasbaar)
- Lengte verstelbaar (cm): 195 - 220
- Breedte verstelbaar (cm): 90 - 120
- Hoogte verstelbaar (cm): 7 - 38
- Gebruikersgewicht (kg): 40 - 150
- Totaal gewicht systeem (kg): 40
- Is standaard voorzien van een glijlaken en twee wentellakens



**Demo
op locatie!**

Wij komen graag naar u toe
met onze demobus

Bezoek onze website voor
de mogelijkheden en
maak een afspraak



Interesse?

Wilt u meer informatie, of ons wentellakensysteem zelf proberen? Dat kan. Bel of mail ons voor een vrijblijvende demonstratie. Bezoek één van de beurzen waarop we ons wentellakensysteem presenteren. Wij komen ook graag bij u langs met onze demobus. Ons wentellakensysteem is exclusief bij Re-Actief en aangesloten dealers te verkrijgen.

Kijk voor meer informatie over ons wentellakensysteem, het gebruik, de specificaties, prijzen, beursagenda, dealeradressen en contactgegevens op de website:

www.wentelsysteem.com

exclusief bij Re-Actief