

Technische gegevens

Voor de Tilt zijn de volgende gegevens van toepassing.

	Zitbreedte 20 - 40 cm		Totale lengte vanaf 72 cm
	Zitdiepte 20 - 45 cm		Totale breedte vanaf 54 cm
	Zithoogte 40 - 58 cm		Rughoek 10 graden
	Onderbeenlengte 16 - 45 cm		Camber 7 graden
	Rughoogte 21 - 48 cm		Maximale belasting 75 kg.
	Totale gewicht vanaf 19,4 kg inclusief complete zittingkussen en rugkussen		Achterwielmaat 22" 24" 26"
	Gewicht zonder wielen vanaf 15,4 kg inclusief complete zittingkussen en rugkussen		Voorwielmaat 5" 6"

Normering

Maximaal gebruikersgewicht is 75kg. De Kiddo Tilt is getest en goedgekeurd op basis van NEN-EN 12182 en NEN-EN 12183 en voor veilig vervoer van kinderen ISO 7176-19. Veldink4kids is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.



Veldink4kids
no limits

Tilt
Kiddo by Veldink

De Kiddo Tilt rolstoel is voorzien van een revolutionair kantelsysteem met gelijkblijvend zwaartepunt. Kantelbereik van 10 graden voorover tot 50 graden achterover.

Wil je ons bereiken?



Drentse Poort 15 A
Nieuw-Buinen
9521 JA



info@veldink4kids.com



+31 (0)599 - 62 04 12

Wil je ons volgen?



www.facebook.com/veldink4kids



www.youtube.com/veldink4kids



@veldink4kids



www.veldink4kids.com



Maten van 20-40 cm zitbreedte



Meegroeibaar in 3 richtingen



One arm drive: dubbele hoepel en hemi-stuur



Uitgebreide kantel- en instelmogelijkheden voor optimale positionering

Kiddo Tilt

De kantelverstelling biedt de gebruiker de mogelijkheid een andere houding aan te nemen voor optimaal comfort en zodoende de druk in het zitgebied te verminderen.

Het kantelsysteem is ten alle tijden zeer licht en veilig te bedienen en te verstellen door het gelijkblijvend zwaartepunt bij kanteling. Het draaipunt ligt hierbij dichtbij het zwaartepunt van de gebruiker. Het kantelbereik van de Kiddo Tilt ligt tussen de -10 en 50 graden.

Optimale vrijheid in kanteling, vrijheid in mobiliteit, vrijheid in comfort en vrijheid in individualiteit.



Beensteun en voetplaat

Het robuuste voetplaatsysteem wordt onder de zitting gemonteerd. Zowel de hoogte als de hoek van de bevestigingsstang is eenvoudig instelbaar op de gewenste maten.

De voetplaat kan zowel vast als opklapbaar worden uitgevoerd en is eenvoudig in hoek en hoogte verstelbaar.

Er is keuze uit een vlakke voetplaat, een voetplaat met een hakrand of een voetplaat met een hakrand en een zijsteun.



Achterwielen

Keuze uit 22" 24" of 26" achterwielen met lucht, lekvrije of outdoor banden. Wielen standaard voorzien van Quick Release.



Begeleider voetbediening
Dit systeem kan goed gebruikt worden als parkeerrem en houdt de handen vrij.


Begeleider handbediening
Dit systeem kan ook gebruikt worden als parkeerrem door blokkeersysteem op de hendels (niet te zien op afbeelding)

Remmen

Standaard uitvoering met een voor de gebruiker Veltrom trommelremsysteem waarbij remhendel verlengd kan worden. Daarnaast keuze uit volgende begeleider remsystemen.

- Begeleider voetbediening.
- Begeleider handbediening en gebruiker handbediening.
- Begeleider voetbediening en de gebruiker handbediening.

Zittingen

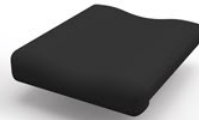


Ergo zit



Abductie wig



Pony zit

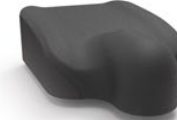

Anatomische zit

Rugleuningen

Doorlopende rug



Gedeelde rug

Gedeelde rugdelen

Anatomische rug



Tarta® rug





Verende rug



Werkbladen

De werkbladen worden voorzien van een dubbele bevestigingsbuis die onder beide armsteunen bevestigd worden. Dit systeem is eenvoudig in diepte in te stellen en te vergrendelen.

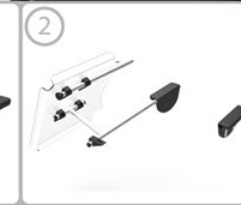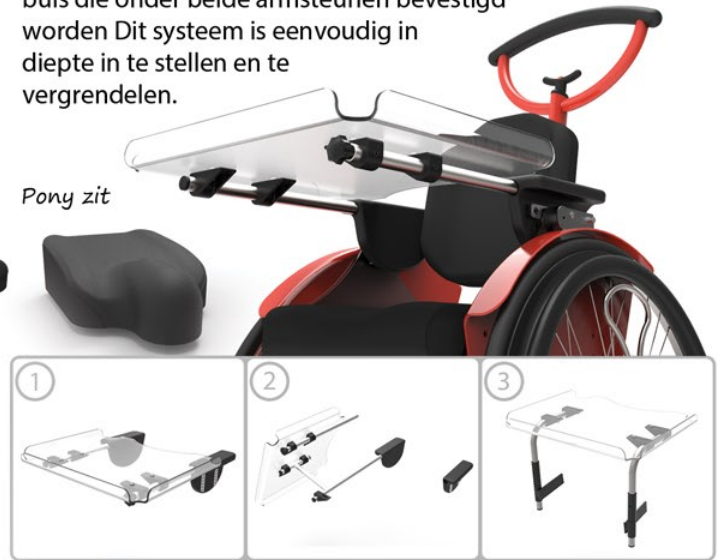

Meer opties

Er zijn meer opties en onderdelen dan hier beschreven. Bekijk daarvoor:

www.veldink4kids.com

En de uitgebreide optie brochure voor alle mogelijkheden voor de Kiddo Tilt.