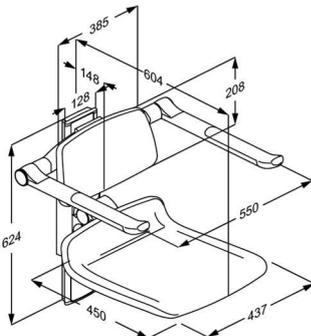




|  |  |
|--|--|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar.<br>R7434108   |
| <b>Kleur</b>                           | Donkerblauw (RAL 5011)   |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>EAN:5708590359793<br/>HMI: 124335<br/>FDA:INN/D135865</p>  <p>Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen.<br/>Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS douchezitting 450, met rug- en armleuningen. Handmatig in hoogte 195 mm verstelbaar zonder het gebruik van gereedschap. De armleuningen zijn apart in hoogte verstelbaar. De zitting en armleuningen zijn opklapbaar.<br/>Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel .Het antislip-grip oppervlak van de armleuningen zijn gemaakt van een zachte SEBS en met een met glasvezel nylon kern.<br/>Excl bevestigingsmateriaal<br/><i>Vervanger van R7430</i></p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | In hoogte verstelbaar  |
| <b>Afstelhoogte</b>                    | 195 mm   |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg.<br/>Maximale gebruikers massa voor de armleuningen is 55 kg.<br/>Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 24 kg.</p> <p><i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i></p>  |



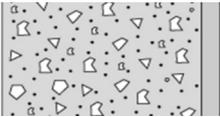
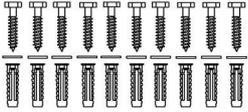
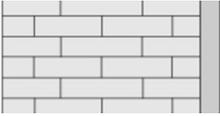
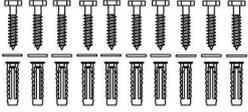
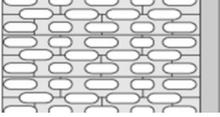
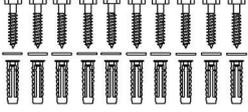
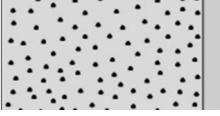
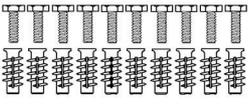
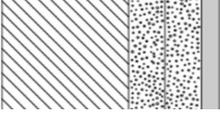
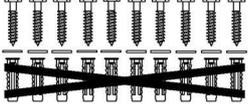


|  |  |
|--|--|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar.<br>R7434108   |
| <b>Materialen</b>                      | De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is beschermd met een heldere PU laklaag. De armleuningen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De scharnier arm is ook gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.        |
| <b>Ergonomy</b>                        | Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De ovale vorm van de armleuningen geeft een comfortabel oppervlakte om op te leunen en tegen aan te duwen.  |
| <b>Functie</b>                         | De zitting, rugleuning en armleuningen kunnen gelijktijdig in hoogte worden versteld dankzij een veilig en eenvoudig kliksysteem. De armleuningen kunnen ook apart in hoogte versteld worden. De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.  |
| <b>Garantie</b>                        | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.   |
| <b>Reiniging</b>                       | <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.</p> <p>Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b><br/>Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.</p> <p>"</p> |
| <b>Conformiteitsverklaring</b>         | Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.   |



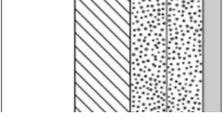
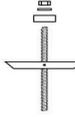
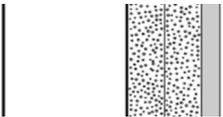
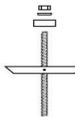
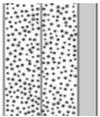
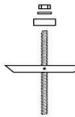
|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. |
| <b>Artikelnummer</b> | R7434108   |

## Installation in different wall types

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Concrete &gt;B25</b><br>V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld.                  |    |
|   | <b>Solid Brick &gt;= Mz12</b><br>V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld.            |   |
|  | <b>Solid Sand Lime Brick &gt;= Hlz12</b><br>V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | <b>Aerated Concrete P4</b><br>V8662 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8.<br>Moeten apart worden besteld.            |  |
|  | <b>Drywall (2 x 12,5 mm) water-resistant, re-enforced with wood</b>   |  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar.<br>R7434108   |
|    | <b>Drywall (2 x 12,5 mm) water-resistant, re-enforced with 22 mm plywood</b><br>Wall fasteners (10 pcs) must be bought separately, for drywall it is possible to use e.g. fischer KD8 toggles or similar.<br>         |
|    | <b>Drywall (2 x 12,5 mm) water-resistant, re-enforced with steel plates (2 mm)</b><br>Wall fasteners (10 pcs) must be bought separately, for drywall it is possible to use e.g. fischer KD8 toggles or similar.<br>   |
|  | <b>Drywall (2 x 12,5 mm) water-resistant</b><br>Wall fasteners (10 pcs) must be bought separately, for drywall it is possible to use e.g. fischer KD8 toggles or similar.<br>                                   |



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)