



Het ruimste assortiment gordels
voor de meest uiteenlopende hef- en
transfertoepassingen



Netstof



Rugversteving



Lussen kruiselings ingehangen



Handgreep ter ondersteuning tijdens het manoeuvreren



Lussen met kleurmarkering



Kuitgordel

aks-gordels

aks-gordels voor patiëntenliften zijn gekeurd. Dankzij de versterkte naden zijn alle gordels geschikt voor een maximumbelasting tot 250 kg.

Er worden diverse materialen gebruikt: Polyester voor gebruik in droge ruimtes, speciale waterdoorlatende en sneldrogende polyester-netstof voor gebruik in natte ruimtes, uiterst scheurbestendige banden in polyester, polstering in verschillende soorten schuimstof om het ontstaan van drukplekken of het snijden van de gordel in de huid te vermijden en om het lichaam van de patiënt extra te ondersteunen en/of het draagcomfort te verhogen.

Om de patiënt te stabiliseren zijn een aantal gordels aan de achterkant versterkt met geïntegreerde aluminiumstrips. Voor diverse gordels is een aparte

hoofdsteun met klittenband verkrijgbaar voor patiënten met weinig hoofd- en nekstabiliteit. Dankzij de verschillende kleurmarkeringen van de gordellussen zijn vergissingen bij het ophangen aan het transportbeugel uitgesloten.

Alle gordels kunnen op 60 °C worden gewassen.



De gordel kan ook in natte ruimtes worden gebruikt



De gordel kan eventueel ook worden gebruikt bij volledige en gedeeltelijke beenamputaties, afhankelijk van de lichaamsbouw van de patiënt

Gordels voor patiëntenliften/plafondliften



aks-standaardgordel
Pagina 34



aks-badgordel
Pagina 35



aks-standaardgordel met rugversteviging en geïntegreerde hoofdsteun
Pagina 36



aks-badgordel met rugversteviging en geïntegreerde hoofdsteun
Pagina 37



aks-badgordel met hoofdsteun Flex
Pagina 38



aks-toiletgordel
Pagina 39



aks-toiletgordel met rugversteviging
Pagina 40



aks-comforttoiletgordel
Pagina 41



aks-comfortgordel met geïntegreerde hoofdsteun
Pagina 42



aks-comfortbadgordel met geïntegreerde hoofdsteun
Pagina 43



aks-universele comfortgordel
Pagina 44



aks-universele netgordel
Pagina 45



aks-universele gordel Flex
Pagina 45



aks-gordel voor liggende transfers
Pagina 46



aks-gordel voor liggende transfers met 8-puntsophanging
Pagina 47



aks-gordel voor liggende transfers met 8-puntsophanging om te baden
Pagina 47

Gordels voor patiëntenliften/plafondliften



aks-oprichtgordel
Pagina 48



aks-gordel met
borstand voor snelle transfers
Pagina 49



aks-gordel met borstand
voor snelle transfers om te baden
Pagina 49



goliath® gordel
Pagina 50

Gordels tot maat XXL

Toebehoren voor gordels voor patiëntenliften/plafondliften



aks-hoofdsteun
Pagina 51



aks-verlengslussen
Pagina 51



aks-oprichtgordel met borstsluiting
voor actieve tillift (dualo®)
Pagina 52



aks-kuitgordel voor actieve tilliften
Pagina 52




aks-oprichtgordel met borstsluiting
voor actieve tillift torneo® II en
torneo® compact
Pagina 53

Gordels voor actieve tilliften

aks-standaardgordel


Dit voordelige model beantwoordt aan de dagdagelijkse eisen op het gebied van materiaalkwaliteit en afwerking. Voor het gebruik van deze gordel is de medewerking van de patiënt vereist, waardoor hij geschikt is voor patiënten die nog over voldoende stabiliteit in het nek- en schouderbereik beschikken. Met deze gordel kan een patiënt van de vloer worden opgetild. De beensteunen zijn versterkt met extra lagen stof en een polstering. Bovendien verhindert deze versteviging het kreuken van de stof tijdens het zitten en minimaliseert zij de druk op de bovenbenen. De lusvormige handgreep aan de buitenkant helpt de zorgverlener bij het positioneren van de patiënt. Ter ondersteuning van de hoofd- en nekzone kan eventueel de aks-hoofdsteun met klittenband worden gebruikt (zie afbeelding hieronder); deze is niet in de levering inbegrepen.

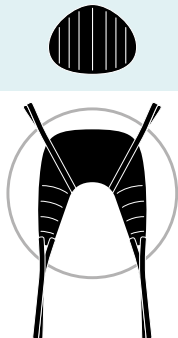

Bestelnummers

Maat S - 88700
Maat M - 88701
Maat L - 88702
Maat XL - 88703
Maat XXL - 88704

Hoofdsteun
(optie) - 88798

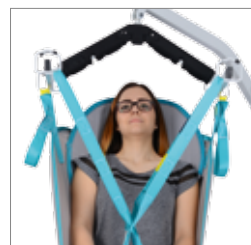


aks-standaardgordel met
bevestigde hoofdsteun
(optie)

aks-badgordel

Deze gordel in speciale, uiterst scheurbestendige polyester-netstof werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in bad- en natte ruimtes. Hij neemt geen water op, waardoor hij ook weer snel droogt. De beensteunen zijn bekleed met schuimstof. Deze versteviging verhindert het kreuken van de stof tijdens het zitten en minimaliseert de druk op de bovenbenen.

Met deze gordel kunt u personen in liggende houding van de vloer optillen. Voorwaarde is echter dat de patiënt meewerkt en dus over voldoende stabiliteit in het nek- en schouderbereik beschikt. De lusvormige handgreep aan de buitenkant helpt de zorgverlener bij het positioneren van de patiënt. Ter ondersteuning van de hoofd- en nekzone kan eventueel de aks-hoofdsteun met klittenband worden gebruikt; deze is niet in de levering inbegrepen.

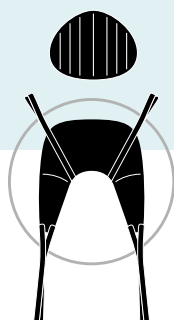

Bestelnummers

Maat S - 88715
Maat M - 88716
Maat L - 88717
Maat XL - 88718
Maat XXL - 88719

Hoofdsteun
(optie) - 88798




→
Lusvormige
handgreep



aks-standaardgordel met rugversteving en geïntegreerde hoofdsteun

Deze gordel is een verbeterde versie van de standaardgordel en biedt een aantal voordelen: de rug en het hoofd worden ondersteund en recht gehouden door de uitneembare versterkingen in aluminium en de speciale rugversteving die naadloos overloopt in de hoofdsteun. De gordel kan perfect aan de patiënt worden aangepast met behulp van de been- en schouderlussen en de viervoudig verstelbare lussen ter hoogte van het hoofd. Dit zorgt voor meer veiligheid, meer steun en een betere houvast. Het net ter hoogte van het zitvlak zorgt ervoor dat de patiënt niet kan wegglijden. Dankzij de speciale vorm van de beensteunen kan de patiënt snel, veilig en gemakkelijk in de gordel worden geïnstalleerd. Het volledige lichaam wordt gestabiliseerd en ondersteund. Deze gordel is in het bijzonder geschikt voor patiënten met een lage spiertonus en een beperkte mobiliteit van het bovenlichaam.

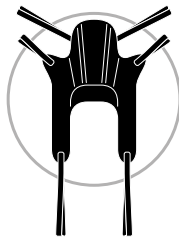

Bestelnummers

Maat S - 88705


Maat M - 88706

Maat L - 88707



aks-badgordel met rugversteving en geïntegreerde hoofdsteen

Deze gordel in polyesternet droogt snel en is zeer handig tijdens de lichaamsverzorging in het bad. Zie ook de beschrijving van de aks-standaardgordel met rugversteving en geïntegreerde hoofdsteen.

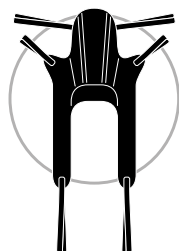

Bestelnummers

Maat S - 88720


Maat M - 88721

Maat L - 88722



aks-badgordel met hoofdsteen Flex

Badgordel met geïntegreerde hoofdsteen die naadloos overloopt in de rug. Patiënten met weinig stabiliteit in de halszone kunnen op die manier perfect worden getransfereerd. De gordel bestaat uit een uiterst scheurbestendig polyesternet, dat nagenoeg geen water opneemt en snel droogt. Hij is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bad- of natte ruimtes.

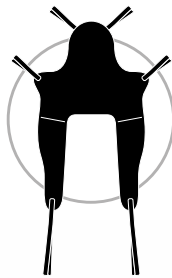

De zeer brede beensteunen zijn bekleed met schuimstof. Deze polstering verhindert het kreuken van de stof tijdens het zitten en minimaliseert de druk op de bovenbenen. Standaard wordt de patiënt in zittende houding opgetild. Het optillen van de patiënt uit het bed of van de vloer is echter ook mogelijk. De transfer gebeurt in zittende houding.

Bestelnummers

Maat S - 88791

Maat M - 88792

Maat L - 88793

Maat XL - 88794

Maat XXL - 88795



aks-toiletgordel

De gordel kan snel en gemakkelijk worden aangebracht dankzij zijn compacte snit en de grote uitsnijing ter hoogte van het zitvlak. De patiënt kan vervolgens zeer goed op een toilet worden gezet, omdat het onderlichaam ter hoogte van het zitvlak vrij blijft. Meer comfort voor de patiënt dankzij de polstering onder de armen, de beenbekleding en de lusvormige handgrepen voor het positioneren van de patiënt.

Bestelnummers


Maat S - 88730

Maat M - 88731

Maat L - 88732

Maat XL - 88733


Maat XXL - 88734

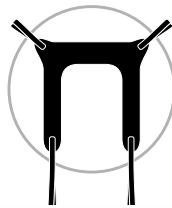

→
Lusvormige
handgreep

aks-toiletgordel met rugversteving

De aks-toiletgordel met rugversteving biedt meer steun en stabiliteit dan de aks-toiletgordel. De hoger uitgesneden en versterkte achterkant van de gordel ondersteunt de rug van de patiënt. De polstering onder de oksels zorgt voor een aangename zithouding in de gordel. Met de viervoudig verstelbare been- en schouderlussen kan de gordel individueel aan de patiënt worden aangepast. Dankzij de speciale vorm van de beensteunen kan de patiënt snel, veilig en gemakkelijk in de gordel worden geïnstalleerd. De patiënt wordt gestabiliseerd en ondersteund, op voorwaarde dat hij over voldoende stabiliteit in de nek- en schouderzone beschikt. Door de grote uitsnijding ter hoogte van het zitvlak blijft de intieme zone vrij, waardoor de patiënt zeer goed op het toilet kan worden gezet. Een lusvormige handgreep aan de achterkant vergemakkelijkt het positioneren van de patiënt.

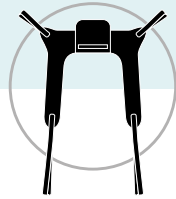

Bestelnummers

Maat S - 88786

Maat M - 88787

Maat L - 88788

Maat XL - 88789


Maat XXL - 88790



→
Lusvormige
handgreep

aks-comfort-toiletgordel

De verbeterde versie van de aks-toiletgordel; een comfortabele gordel voor het toiletbezoek. Deze gordel biedt een groter zitcomfort en nog meer steun in de rug dan de aks-toiletgordel met rugversteving. Hij is voorzien van zeer brede, gepolsterde beensteunen. Indien nodig kan een hoofdsteen worden aangebracht.

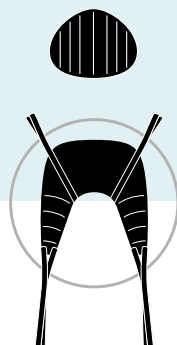

Bestelnummers


Maat S - 88735
Maat M - 88736
Maat L - 88737
Maat XL - 88738
Maat XXL - 88739

Hoofdsteen
(optie) - 88798



aks-comfortgordel met geïntegreerde hoofdsteun

Deze gordel is ontwikkeld voor patiënten met weinig rompstabiliteit en ondersteunt het lichaam op een aangename manier. Het hoge rugstuk met uitneembare versterkingen in aluminium en de geïntegreerde hoofdsteun verhogen de veiligheid en het gebruiksgemak. De ingewerkte polstering van de beensteunen verhoogt het zitcomfort van drukgevoelige patiënten. Dankzij de lussen met verschillende kleurmarkering zijn diverse instellingen van de gordel en bijgevolg een variabele positionering mogelijk. Meerdere lusvormige handgrepen aan de buitenkant helpen de zorgverlener bij het positioneren van de patiënt.

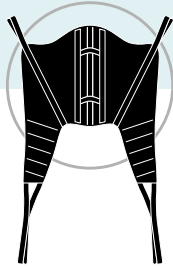

Bestelnummers


Maat S - 88710
Maat M - 88711
Maat L - 88712
Maat XL - 88713
Maat XXL - 88714



→
Lusvormige
handgrepen

aks-comfortbadgordel met geïntegreerde hoofdsteen

De snit van deze gordel is vergelijkbaar met die van de aks-comfortgordel met geïntegreerde hoofdsteen. Omwille van de gebruikte netstof is deze gordel waterdoorlatend, waardoor hij snel droogt. Hij is speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes.

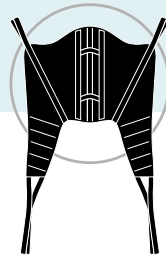

Bestelnummers

Maat S - 88725
Maat M - 88726
Maat L - 88727
Maat XL - 88728
Maat XXL - 88729



→
Lusvormige
handgrepen

aks-universele comfortgordel

De flexibele stoffen van de universele comfortgordel passen zich aan het lichaam van de patiënt aan. Deze gordel is voorzien voor gebruik in droge ruimtes en is geschikt voor patiënten met beenamputaties.

De lusvormige handgreep ter hoogte van de schouders vergemakkelijkt het positioneren van de patiënt.


Bestelnummers


Maat M - 88756

Maat L - 88757

Maat XL - 88758

Maat XXL - 88759

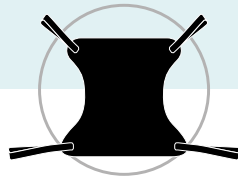

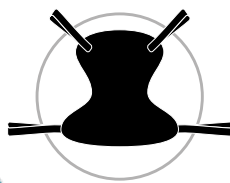

aks-universele netgordel

De universele netgordel is uiterst flexibel: de schouderbanden zijn drievoudig en de beenlussen zelfs viervoudig verstelbaar om de patiënt optimaal te positioneren. Optimaal zitcomfort bij gebruik van de aks-tandembeugel (zie afbeelding). Vier lusvormige handgrepen vergemakkelijken het positioneren van de patiënt tijdens de transfer. Het eenlagige netmateriaal is goed waterdoorlatend en droogt snel - ideaal dus voor gebruik in natte ruimtes (baden). Deze gordel is bovendien geschikt voor patiënten met beenamputaties.

Bestelnummers

Maat S - 88760

Maat M - 88761


Maat L - 88762

Maat XL - 88763

Maat XXL - 88764



Lusvormige
handgrepen

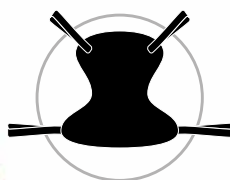

aks-universele gordel Flex

De universele gordel Flex is vergelijkbaar met de universele netgordel. Bij deze gordel werden de lusvormige handgrepen echter bewust weggelaten, zodat de gordel een tijdje onder de patiënt kan blijven (bijvoorbeeld in een rolstoel, zitschelp). Het is dus niet nodig om de gordel onmiddellijk na de transfer te verwijderen.

Bestelnummers

Maat S - 88766

Maat M - 88767

Maat L - 88768

Maat XL - 88769

Maat XXL - 88770



aks-ligtransportgordel

Met deze gordel en de aks-tandemtransportbeugel (zie afbeelding) kunnen ook moeilijke transferproblemen worden opgelost. Zelfs patiënten met heup- of rugproblemen en met geamputeerde ledematen onder het kniegewricht kunnen met deze gordel probleemloos worden getransfereerd. De beensteunen zijn bijkomend gepolsterd met schuimstof. Op die manier worden de bovenbenen veilig en aangenaam ondersteund. De hoofdsteun met klittenbandbevestiging (inbegrepen) biedt extra steun en houvast. De lusvormige handgreep ter hoogte van het hoofd vergemakkelijkt het positioneren van de patiënt.



Bestelnummers

Maat M - 88746

Maat L - 88747


Maat XL - 88748

Maat XXL - 88749



Lusvormige handgreep

aks-ligtransportgordel voor de transportbeugel met 8-puntsophanging/ ~ om te baden

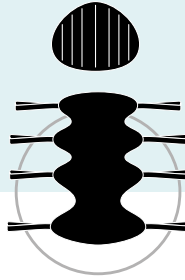

In combinatie met de speciale transportbeugel met 8-puntsophanging voor liggende transfers garandeert deze gordel pijnpatiënten een aangename transfer. Optioneel kan een hoofdsteen met klittenband worden aangebracht om het hoofd en de nek extra te ondersteunen. De aks-ligtransportgordel voor de transportbeugel met 8-puntsophanging om te baden in netmateriaal is waterdoorlatend en droogt snel; hij is dus geschikt voor gebruik in natte ruimtes..

Bestelnummers

Maat M - 88751

Maat L - 88752

Maat XL - 88753

Maat XXL - 88754

~ om te baden

Maat M - 88777

Maat L - 88778

Maat XL - 88779

Maat XXL - 88780

Hoofdsteen (optie) - 88798

aks-gordel voor liggende transfers voor
transportbeugels met 8-puntsophanging




aks-oprichtgordel

De oprichtgordel voor aks-standaardpatiëntenliften bestaat uit twee aparte gordels met drievoudig verstelbare lussen met verschillende kleurmarkeringen. Hij is geschikt voor snelle transfers van patiënten, die over voldoende spierkracht beschikken in de schouders, het bovenlichaam en de bovenbenen. De gordel is snel en gemakkelijk te gebruiken en bevordert bovendien het behoud van de mobiliteit.

Bestelnummer

Maat M - 88765

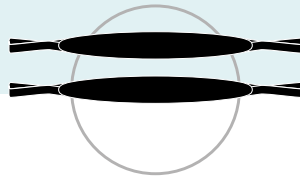



aks-gordel met borstsluiting voor snelle transfers

Deze gordel is bedoeld voor de snelle en moeiteloze transfer van patiënten die zelf over voldoende stabiliteit beschikken. Hij beschikt over een geïntegreerde, gepolsterde rugversteving, polstering ter hoogte van de oksels en een borstsluiting die de patiënt een veilig gevoel geeft. De gordel kan ook als toiletgordel worden gebruikt. De lusvormige handgreep aan de achterkant vergemakkelijkt het positioneren van de patiënt.

Bestelnummers

Maat S - 88740

Maat M - 88741

Maat L - 88742



aks-gordel met borstsluiting voor snelle transfers om te baden

De aks-gordel met borstsluiting voor snelle transfers om te baden heeft dezelfde snel en structuur als de aks-gordel met borstsluiting voor snelle transfers. Deze gordel heeft echter bredere beensteunen voor meer comfort en een betere verdeling van de druk op de bovenbenen. Omwille van de waterdoorlatende en sneldrogende netstof is hij in het bijzonder geschikt voor natte ruimtes. De lusvormige handgreep aan de achterkant van de gordel vergemakkelijkt het positioneren van de patiënt.

Bestelnummers

Maat S - 88771


Maat M - 88772

Maat L - 88773



goliath® gordel

De gordel voor zwaarlijvige personen

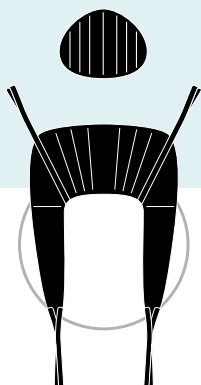

De goliath® gordels behoren tot de flexibele lichaams-ondersteunende systemen, waarvan de stoffen zich optimaal aan het lichaam van de patiënt aanpassen. De uiterst scheurbestendige polyester gordels dienen als versteviging. De schouderlussen zijn vijfvoudig verstelbaar, de beenlussen viervoudig. De rug en de beensteunen zijn gepolsterd met een zogenaamde drukelastische 3D-stof. Twee lagen stof worden door een polsteringslaag op een bepaalde afstand van elkaar gehouden. Op die manier ontstaat een microklimaat dat warmte- en vochtregulerend werkt. In principe wordt deze hoogwaardige gordel in combinatie met de goliath® patiëntenlift gebruikt voor de basisverzorging van obese personen met een lichaamsgewicht van max. 250 kg.

De aks-hoofdsteun kan eventueel worden aangebracht ter ondersteuning van het hoofd en de nek.

Maten: zie pagina 55

Bestelnummers

Maat A - 88807

Maat B - 88808

Maat C - 88809

Hoofdsteun - 88798 (optie)

