


ROHO MOSAIC

We adviseren om het kussen in te stellen op basis van de atmosferische druk. Deze eenvoudige instelling leidt u door de stappen die nodig zijn om deze aanbevolen instelling te realiseren. Het kussen zal nog steeds een goede drukontlasting bieden voor een comfortabele zit.



Open het ventiel.

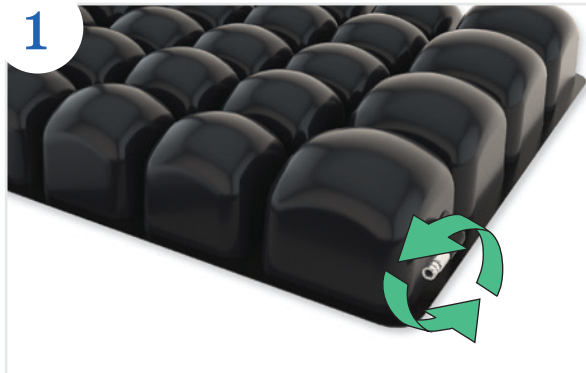

Vul met de handpomp totdat alle luchtcellen stevig aanvoelen.



Laat lucht uit het ventiel ontsnappen.



Luister of voel met uw hand of er geen lucht meer wordt uitgeblazen.



Sluit het ventiel.



Plaats het kussen op het zitoppervlak, met de luchtcellen naar boven gericht. Plaats de hoes rond het kussen en ga op het kussen zitten.