

Betere
zorg,
betere
ergonomie!



Manuele transfer- hulpmiddelen



- + Liggend en zittend positioneren
- + Zittend en liggend transfereren
- + Rechtkomen, verplaatsen
en ondersteunen
- + Evacueren
- + Opleidingen

Ontdek al onze oplossingen op **metra.be**

+ Metra zorgt samen met u voor betere zorg en ergonomie

Werken in de zorgsector is een roeping. Iedereen streeft naar optimale zorg, maximale autonomie en comfort voor de patiënt of bewoner. Maar werken in de zorg is ook fysisch erg belastend en hier zouden zowel werkgevers als de zorgverleners zelf meer aandacht aan moeten schenken.

Door de vergrijzing is er zowel in woonzorgcentra als ziekenhuizen een sterke evolutie naar een groter aandeel bewoners en patiënten met een grotere zorgafhankelijkheid. 'Manutentie', het op de juiste wijze manueel verplaatsen van patiënten, krijgt in die context steeds meer aandacht en terecht. Het combineren van de juiste technieken met de juiste transferhulpmiddelen verhoogt immers aanzienlijk het comfort en de veiligheid van de zorgontvanger en het voorkomt (rug)klachten bij de zorgverleners. Last but not least, door de zorgontvanger op de juiste wijze van houding te laten wisselen, worden doorligwonden voorkomen. Het gebruik van transferhulpmiddelen levert dan ook een belangrijke bijdrage tot elk beleid dat gericht is op decubituspreventie.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden om te komen tot een betere zorg, met minder fysieke inspanningen! Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die hier kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist advies
en heldere
offerte | Correcte
introductie | Doorgedreven
opleiding | Perfekte
dienst-na-
verkoop |

metra.be



© Metra bv – maart 2022

Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoeelfabriek.com

inhoudstafel

Manuele transferhulpmiddelen

+ Liggend positioneren	4	+ Rechtkomen en verplaatsen	21
Glijlaken buisvormig Hyperglide	5	Transferwagen Easy Transfer	21
Glijlaken buisvormig Hyperglide Too	5	Transferwagen Bea deluxe	22
Glijlaken enkelvoudig 4WaySheet	6	Transferwagen Raiser Pro	23
Glijlaken buisvormig disposable Petermann	6		
Glijlaken buisvormig/enkelvoudig	7	+ Ondersteunen	24
MultiGlide Single Patient Use		Transfergordel Universeel	24
Glijlaken 2-delig SatinSheet	8	Oprichthulp Sling	24
Glijlaken 2-delig 4WayGlide	9	Transfergordel MagicBelt	25
Glijkussen buisvormig	9	Beengordel	25
Glijmatras buisvormig	9	Draaischijf Turntable	25
Medisch 3D hoeslaken Skincair®	10	Draaischijf Pediturn	26
RX hulpmiddel X-ray Crawler	10	Oprichthulp BedString	26
		Voetensteun Alpha	26
		Been- & armsteun Nurse Assistant	27
+ Zittend positioneren	11		
Glijkussen AutoGlide	11	+ Evacueren	28
Glijkussen OneWayGlide	12	Evacuatiestoelen EGO/VERSA/ELITE	28
Draaikussen EasyTurn	12	Evacuatiemat	29
Oprichthulp Sling	13	Transfermat Alpha	29
		Draagstoel Alpha	29
+ Liggend transfereren	14		
Transferbord Vision	14	+ Opleidingen	30
Transferbord 2Move	16	Werken met manuele transferhulpmiddelen (3 uur)	
Glijmatras buisvormig		Werken met mechanische transferhulpmiddelen (3 uur)	
Transfermat Alpha	17	Werken met manuele en mechanische transferhulpmiddelen (6 uur)	
+ Zittend transfereren	18		
Transferplank 3B-Board	18		
Transferplank E-Board	19		
Transferplank Butterfly	19		
Glijkussen buisvormig	20		
Draagstoel Alpha	20		

+ Liggend positioneren

Een glijzeil, glijlaken, glijkussen of transferkussen onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen, zijwaarts verplaatsen, draaien naar zithouding of voor algemene positionering.

Een glijzeil of glijlaken is ook een hulpmiddel bij het verplaatsen van een patiënt in of uit het bed, bij het wassen van een bedlegerig patiënt en het vermijden van doorligwonden. Metra heeft een ruim gamma aan glijzeilen, -lakens en -kussens, in verschillende afmetingen, in functie van de specifieke noden qua gebruik en de mogelijkheden van de patiënt. Naast glijzeilen die kunnen gewassen worden op 80°, zijn er ook lakens voor éénmalig of patiëntgebonden gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.

“Een glijlaken onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. Zo kan de patiënt gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene positionering. Transfers op deze manier uitgevoerd verminderen de fysieke belasting voor de hulpverlener en verhogen het comfort voor de patiënt.”



Glijzeil buisvormig Hyperglide

Buisvormig glijzeil, heel fijn maar stevig en comfortabel weefsel met een uitzonderlijke glijdcapaciteit. Verschillende afmetingen voor verschillende toepassingen beschikbaar. Glijdt aan beide kanten, zodat het niet uitmaakt of het laken al dan niet binnenste buiten wordt gebruikt.

- + Uiterst hoog glijdvermogen
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Duurzame polyamide
- + Ultra dun



referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte / breedte / gebruik	
TLEM7070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (70 cm)	70 / 70 / algemeen positioneren	60°
TLEM10070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (100 cm)	100 / 70 / hogerop positioneren	60°
TLEM70100	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (70 cm)	70 / 100 / wisselhouding positioneren	60°
TLEM100100	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (100 cm)	100 / 100 / algemeen positioneren	60°
TLEM13070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (130 cm)	130 / 70 / hogerop positioneren	60°

Glijzeil buisvormig Hyperglide Too

Buisvormig glijzeil, stevig weefsel met een zeer goede glijdcapaciteit door de lage wrijvingsweerstand. Verschillende afmetingen voor verschillende toepassingen beschikbaar. Glijdt aan beide kanten, zodat het niet uitmaakt of het laken al dan niet binnenste buiten wordt gebruikt.

- + Zeer hoog glijdvermogen
- + Combinatie met 'wisseldruk' of 'alternerende' matras
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Duurzame polyamide
- + Uitzonderlijk stevig



referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte / breedte / gebruik	
TLT7070	Glijzeil HyperGlideToo, buisvormig (70 cm)	70 / 70 / algemeen positioneren	80°
TLT10070	Glijzeil HyperGlideToo, buisvormig (100 cm)	100 / 70 / hogerop positioneren	80°
TLT70100	Glijzeil HyperGlideToo, buisvormig (70 cm)	70 / 100 / wisselhouding positioneren	80°
TLT100100	Glijzeil HyperGlideToo, buisvormig (100 cm)	100 / 100 / algemeen positioneren	80°
TLT13090	Glijzeil HyperGlideToo, buisvormig (130 cm)	130 / 90 / hogerop positioneren	80°

Glijlaken enkelvoudig 4WaySheet

Enkelvoudig glijlaken. Te gebruiken in combinatie met een steeklaken. De 4WaySheet blijft in bed liggen met het steeklaken erboven.

- + Zeer goede glijdcapaciteit
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Duurzame polyamide
- + Waterdicht (incontinentie)
- + Antislip onderkant en zijstroken



referentie	omschrijving	lengte / breedte / gebruik
4WS	Glijlaken 4 WaySheet, enkelvoudig	140 / 90 / algemeen positioneren



Glijzeil buisvormig disposable Petermann

Buisvormig glijzeil voor éénmalig gebruik, wat kruiscontaminatie vermijdt. Beschikbaar op een rol, waardoor steeds de gewenste lengte kan afgesneden worden.

- + Zeer goede glijdcapaciteit
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Waterdicht
- + Vervaardigd uit LDPE, latexvrij
- + Single Patient Use (SPU): kan bij dezelfde patiënt meerdere malen hergebruikt worden



referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte / breedte / gebruik
TLPMR60	Glijzeil disposable, rol (60 cm)	100 m/60 cm / algemeen positioneren
TLPMR70	Glijzeil disposable, rol (70 cm)	100 m/70 cm / algemeen positioneren

TLPMRD60	Glijzeil disposable, rol in dispenserdoos + mes (60 cm)	100 m/60 cm / algemeen positioneren
TLPMRD70	Glijzeil disposable, rol in dispenserdoos + mes (70 cm)	100 m/70 cm / algemeen positioneren

referentie	omschrijving
TLPMRH60	Afroller tafelmodel voor TLPMR60
TLPMRH70	Afroller tafelmodel voor TLPMR70



*“Verglijden en niet tillen,
geen krachten verspillen!”*

Glijlaken buisvormig/enkelvoudig MultiGlide Single Patient Use

Glijlaken voor herhaald gebruik bij één patiënt, wat kruiscontaminatie vermijdt. MultiGlide SPU is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, buisvormig of als enkelvoudig laken. Elk laken is individueel verpakt en zit per 10 of 20 stuks in een compacte doos.

Handig om op elke dienst op een centrale plaats te zetten.

De verpakking is een hersluitbaar zakje waarop de naam van de patiënt kan genoteerd worden.

Het glijlaken kan na het ontslag van de patiënt meegegeven worden naar huis.

Daarnaast bestaat er ook een handige verdeler die aan de muur kan bevestigd worden en waarin de doos naadloos past.

- + Hygiënisch, geen kruisbesmetting meer
- + Sterk glijdvermogen
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Single Patient Use: kan bij dezelfde patiënt meerdere malen herbruikt worden
- + Met handig zakje om bij het bed van de patiënt te laten
- + Kan bij ontslag worden meegegeven met de patiënt
- + Gereduceerde waskosten
- + 100% polyamide
- + Max 300 kg



**Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)**

referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte / breedte / gebruik
TLSPU73190	Glijzeil MultiGlide SPU, buisvormig (73 cm), 10 st/doos	190 / 73 / wisselhouding positioneren
TLSPU73145	Glijzeil MultiGlide SPU, buisvormig (73 cm), 10 st/doos	145 / 73 / wisselhouding positioneren
TLSPU12073	Glijzeil MultiGlide SPU, buisvormig (120 cm), 10 st/doos	130 / 90 / hogerop positioneren
TLSPU13090	Glijzeil MultiGlide SPU, buisvormig (130 cm), 10 st/doos	120 / 73 / hogerop positioneren
TLSPU145100	Glijzeil MultiGlide SPU, enkelvoudig, 20 st/doos	145 / 100 / algemeen positioneren
TLSPU20085	Glijzeil MultiGlide SPU, enkelvoudig, 20 st/doos	200 / 85 / algemeen positioneren
TLSPUD	MultiGlide SPU, dispenser box	31 / 40

Glijlaken 2-delig SatinSheet

De SatinSheet is een 2-delig 'in bed systeem' voor het draaien en positioneren van patiënten in bed. De SatinSheet blijft in bed onder de patiënt. Het steeds plaatsen, wegnemen en herplaatsen is dus niet nodig. De SatinSheet combineert 2 delen: het onderste deel komt op de matras (basislaken) en is voorzien van een gladde strook in satijn, het bovenste laken (steeklaken) is ook aan de onderzijde in satijn en bestaat aan de bovenkant uit 60% katoen en 40% polyester. Het steeklaken is beschikbaar in een versie voor enkel het draaien van de patiënt (2D) of voor het positioneren in 4 richtingen in bed (4D). Van het basislaken bestaan er verschillende formaten. De SatinSheet wordt steeds aangeboden in verschillende combinaties (zie referenties).

- + Hogerop brengen, wisselhouding of transfer in en uit het bed
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder zorgverlener)
- + Uniek materiaal, lage wrijving bij laterale beweging maar hoge wrijving om onderuitzakken in bed tegen te gaan
- + De strepen op het steeklaken duiden de transferrichtingen aan
- + Max 200 kg



**Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)**




referentie	omschrijving (glijrichting en opties)	lengte / breedte	
SSIM4118S	SatinSheet Treklaken 2Direction - midi	140 / 240	
SSIM4115S	SatinSheet Treklaken 4Direction - midi	100 / 200 (satijn 140x147 cm)	
SSIM4121S	SatinSheet Treklaken 4Direction - max	200 / 200 (satijn 200x147 cm)	
SSIM4140S	SatinSheet Treklaken 4Direction incontinentie-midi	140 / 120 satijn/micro met vleugels 50 cm	
SSIM4119S	SatinSheet 2Direction Basislaken midi - small	140 / 200 (satijn 140x60 cm)	
SSIM4181S	SatinSheet 2Direction Basislaken maxi - small	200 / 200 (satijn 200x65 cm)	
SSIM4107S	SatinSheet 2Direction Basislaken 4 hoekelastieken	200 / 85 (satijn 200x65 cm)	
referentie	omschrijving SET	samenstelling	
SSIM4207S	SatinSheet Set Basislaken + Treklaken 4Direction	Incl. SSIM4119S + SSIM4115S	
SSIM4208S	SatinSheet Set Basislaken 4 elast. + Treklaken 2D	Incl. SSIM4107S + SSIM4118S	
SSIM4211S	SatinSheet Set Basislaken 4 elast. + Treklaken 4D Midi	Incl. SSIM4107S + SSIM4115S	
SSIM4212S	SatinSheet Set Basislaken 4 elast. + Treklaken 4D Maxi	Incl. SSIM4107S + SSIM4121S	
referentie	omschrijving	lengte / breedte	
SSIM4117S	SatinSheet Kussensloop	60 / 70 (satijn 60x70 cm)	

Glijlaken 2-delig 4WayGlide

Dit glijlaken bestaat uit 2 delen: het bovenste deel is gemoltoneerd (met voering), het onderste deel is glijdend en wordt vastgemaakt aan de matras. De 4WayGlide blijft in bed onder de patiënt, het steeds plaatsen, wegnemen en herplaatsen is dus niet nodig.

- + Combinatie van zachtheid en uitstekend glijdvermogen
- + Geschikt voor zwaarlijvige patiënten
- + Geschikt voor patiënten met drukplekken
- + Hogerop brengen, wisselhouding of een transfer in en uit het bed
- + Bruikbaar op een decubitusmatras
- + Max 200 kg

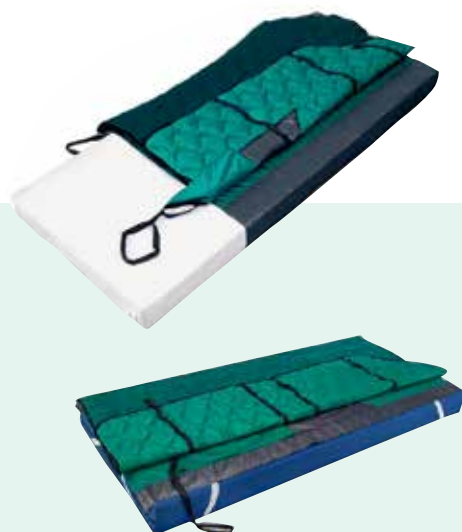


referentie	omschrijving	bovenlaken - onderlaken lengte / breedte	
4WG	Glijlaken 4WayGlide standard set	200 / 140 - 200 / 85	80°
4WGM	Glijlaken 4WayGlide midi set	150 / 140 - 150 / 140	80°
4WGBL	Glijlaken 4WayGlide bovenlaken	200 / 140	80°
4WGO	Glijlaken 4WayGlide onderlaken	200 / 85	80°

Glijkussen buisvormig

Buisvormig, gemoltoneerd glijkussen (vulling met polyestervezels). Combinatie van zachtheid met uitstekend glijdvermogen, geschikt voor een transfer in bed, tussen bedden en van het bed naar (rol)stoel. Dit kussen zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een zittende transfer over kleine oneffenheden.

- + Combinatie van zachtheid en uitstekend glijdvermogen
- + Hogerop brengen, wisselhouding
- + Zittende en liggende transfer
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Binnenzijde in polyamide
- + Max 200 kg

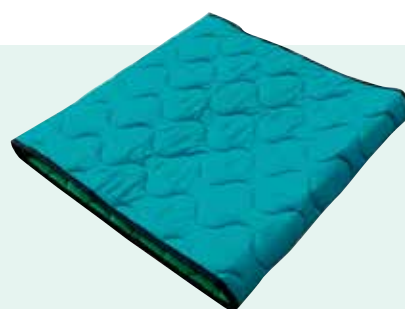

referentie	omschrijving (open zijde)	lengte / breedte	
TK6050	Transferkussen, buisvormig (50 cm)	60 / 50	80°
referentie	omschrijving		
TK6050NH	Nylonhoes Transferkussen, buisvormig		80°

Medisch 3D hoeslaken Skincair®

Het gepatenteerd hoeslaken van Skincair® is heel eenvoudig in gebruik, met opmerkelijke resultaten op vlak van voorkomen en genezen van decubitus*. Skincair® zorgt bovendien ook voor meer zelfredzaamheid en verhoogt het comfort van bewoner of patiënt*. Tegelijkertijd is het gebruik van Skincair® werk- en kostenbesparend.

(*) Wounds International, March 2022, Vol 13, Issue 1

- + Minder decubitus, meer zelfredzaamheid
- + Constante ventilatie, snelle afvoer van transpiratievocht
- + Sterke verbetering huidconditie
- + Veel ligcomfort, aangenaam zacht voor de huid
- + Innovatief en gepatenteerd
- + Blijft effectief, garantie tot 120 wasbeurten
- + Polyester



Ontdek de
brochure
hier.
Of klik [hier!](#)



referentie	omschrijving	matras
SKIN1000P2-90	Skincair®, medisch 3D hoeslaken	200 x 90 cm



RX hulpmiddel X-Ray Crawler

Dit hulpmiddel werd speciaal ontworpen voor bedlegerige patiënten die een radiologisch onderzoek moeten ondergaan. Het voorkomt dat een patiënt moet opgetild worden zodat deze handeling veel aangenamer is voor de patiënt en de zorgverlener minder fysiek belast wordt.

Het innovatieve concept van de roterende X-Ray Crawler vergemakkelijkt en versnelt het inschuiven van de röntgencassette onder de patiënt.

Om aan de hoogste hygiënische eisen te voldoen, kan de X-Ray Crawler eenvoudig worden gedesinfecteerd.

De X-Ray Crawler SET biedt ook een wegwerpbeschermingsfolie voor de röntgencassette.



- | | |
|--|--|
| + Vermindert de inspanning bij de patiënt en de hulpverlener | + Reinigen met een vochtige doek |
| + Max 200 kg | + Ontsmetten met desinfectie of ontsmettende doekjes |
| + Radiotransparant | + Polyamide, latex vrij |
| | + Wegwerpbeschermingsfolie |

referentie	omschrijving	lengte / breedte
PMF8260	X-Ray Crawler	41 / 53,5
PMF8265	X-Ray Crawler SET, 2 x PMF8260 + PMF8261	41 / 53,5



+ Zittend positioneren

Ook bij het bewegen van sta- naar zitpositie, in/uit een zetel, in/uit de auto ... zorgen transferhulpmiddelen, door het sterk reduceren van de wrijvingsweerstand, voor meer comfort, autonomie en veiligheid bij de gebruiker en voor minder belasting bij de zorgverlener. Metra biedt verscheidene oplossingen aan, in functie van de noden en de specifieke mogelijkheden van de persoon in kwestie.



Glijkussen AutoGlide

Een glijkussen dat het in- en uitstappen in de wagen vergemakkelijkt. Als er niet op eigen kracht in het midden van de autozetel kan plaats genomen worden, is de AutoGlide de ideale hulp om in de juiste positie te verglijden. De AutoGlide bestaat uit 2 delen die zeer makkelijk t.o.v. elkaar glijden. De handvatten kunnen gebruikt worden om te helpen bij de transfer.

- + Ideaal hulpmiddel om in en uit de wagen te stappen
- + Met afstandswaarsel voor extra zitcomfort
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)



referentie	omschrijving	lengte / breedte
AG	Glijkussen AutoGlide	46 / 44



Glijkussen OneWayGlide

Een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in de ene richting en blokkeert in de andere. Om makkelijker rechtop te zitten. Zorgt voor een betere positie op de stoel / zetel en verhindert onderuitglijden.

- + Om iemand rechtop te zetten of te herpositioneren in een stoel/zetel of bed
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte
OWGS	Glijkussen OneWayGlide buisvormig stoel	43 / 37
OWGZ	OneWayGlide buisvormig zetel	45 / 45
OWGB	OneWayGlide buisvormig bed	80 / 60

80°

80°

80°



Draaikussen EasyTurn

Een soepel draaikussen dat het in- en uitstappen in de wagen vergemakkelijkt. Deze draaischijf is ook een handig hulpmiddel in al die situaties waar draaibewegingen uitgevoerd worden bijv. op een stoel om de benen makkelijker onder tafel te plaatsen of om in/uit bed te geraken, ...

De EasyTurn bestaat uit 2 kussens die t.o.v. elkaar zeer makkelijk draaien in beide richtingen.

- + Ideaal hulpmiddel om zittend te draaien
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	diameter
ETFGRS	Draaikussen EasyTurn, fluweel	45

60°

Oprichthulp Sling

De Sling met lussen fungeert als verlengstuk van de armen van de zorgverlener. Deze kan ondersteuning en hulp bieden met behoud van een goede ergonomische positie en controle én met respect voor de comfortzone van de zorgontvanger. De Sling biedt extra hulp bij uiteenlopende transfers zoals verplaatsen in bed, transfer tussen zittende posities, enz. De binnenzijde is uitgevoerd in antislip zodat ongewenst glijden van de Sling tijdens de transfer wordt voorkomen. De buitenzijde is uitgevoerd in glad materiaal zodat de Sling eenvoudig is aan te brengen en te verwijderen.

- + 4 lussen aan elke zijde
- + Binnenzijde uitgevoerd in antislip
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte
SL	Sling met 8 grijplussen	(160 / 19)



“Metra accademy organiseert workshops die er toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie. Zie p. 30”

+

Liggend transfereren

Een transferbord is, door zijn groot glijdvermogen en beperkt gewicht, een ideaal hulpmiddel voor het uitvoeren van een liggende transfer, waarbij een klein hoogteverschil of een beperkte open ruimte moet overbrugd worden, bijv. van bed naar operatietafel. De transfer gebeurt op een veilige, comfortabele en ergonomische manier, zowel voor zorgverlener als patiënt. De transferborden zijn radiotransparant en beschikbaar in verschillende afmetingen, met/zonder waterdichte hoes of hoes voor éénmalig gebruik. Een transfermatras zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een liggende transfer over kleine oneffenheden.

Transferbord Vision

Een superlicht, radiotransparant en vouwbaar transferbord met hoes. Ontworpen voor een optimaal glijdvermogen en patiëntencomfort van top kwaliteit, vorm en functie. De Vision is bij uitstek geschikt voor atraumatische en pijnloze laterale transfers met verminderde wrijving van zittende of liggende patiënten.

- + Heel licht, snel inzetbaar
- + Flexibel over de gehele lengte
- + Beschikbaar in meerdere afmetingen
- + Grotere modellen zijn vouwbaar, dus compact om te dragen en op te bergen
- + Extra hoes (PEM, disposable, SPU) verkrijgbaar ter voorkoming van kruisbesmetting
- + Radiotransparant
- + Max 200 kg (bij een opening tussen 2 bedden van max. 15 cm)

+
**COMING
SOON**
+

Een nieuwe NEXTGen hoes voor Transferbord Vision. Deze biedt extreem goede glij-eigenschappen, kan makkelijk afgeveegd en gedesinfecteerd worden én is daarom extreem duurzaam in gebruik.



referentie	omschrijving	lengte / breedte	hoes
TBVNG8545	Transferbord Vision NEO Genius ambulance met rode hoes vouwbaar in 3	85 / 45	
TBV9550	Transferbord Vision met rode hoes	95 / 50	
TBV9550P	Transferbord Vision met PEM disposable hoes	95 / 50	
TBV9550V	Transferbord Vision met rode hoes vouwbaar	95 / 50	
TBV18050R	Transferbord Vision met rode hoes vouwbaar	180 / 50	
TBV18050P	Transferbord Vision met PEM disposable hoes vouwbaar	180 / 50	
TBV18050ZH	Transferbord Vision zonder hoes vouwbaar	180 / 50	
TBVD18065	Transferbord Vision met rode hoes verlengd/ handvatten vouwbaar	180 / 65	
TBV8545H	Reserve hoes rood voor TBV8545	85 / 45	
TBV9550H	Reserve hoes rood voor TBV9550(V)	95 / 50	
TBV18050HR	Reserve hoes rood voor TBV18050R	180 / 50	
TBVD18065H	Reserve hoes rood voor TBVD18065	180 / 65	
TBV9055PH	PEM dispobale hoes op rol 100 m voor TBV9550V en TBV9550	100 m / 50	
TBV18050PH	PEM disposable hoes op rol 100 m voor TBV18050R	100 m / 60	
TBV9055DH	Beschermfolie op rol 110 stuks voor TBV9550V en TBV9550 met dispenser box + mes	180 / 54,5	
TBV18055DH	Beschermfolie op rol 55 stuks voor TBV18050R met dispenserbox	180 / 54,5	
referentie	omschrijving	lengte / breedte / diepte	
TBVDHWR	Wandrek voor Vision PEM of beschermfolie rol	46 / 70 / 18	
TBVWR	Wandrek voor transferbord Vision	75 / 45 / 9	



**Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)**



“65% van de orthopedische en 58% van de IZ-verpleegkundigen krijgen door hun job last van rugpijn, hun loopbaan kan hierbij in gedrang komen.”

Transferbord 2Move

Een superlicht, radiotransparant en vouwbaar transferbord met waterdichte hoes. Ontworpen voor een optimaal glijdvermogen en patiëntcomfort.

- + Heel licht, snel inzetbaar
- + Beschikbaar in meerdere afmetingen
- + Grotere modellen zijn vouwbaar, dus compact om te dragen en op te bergen
- + Extra hoes (disposable) verkrijgbaar ter voorkoming van kruisbesmetting
- + Radiotransparant
- + Max 200 kg (bij een opening tussen 2 bedden van max. 15 cm)



**Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)**



referentie	omschrijving	lengte / breedte	hoes
TB2M9550	Transferbord 2Move met groene waterdichte hoes	95 / 50	
TB2M19050V	Transferbord 2Move met groene waterdichte hoes vouwbaar	190 / 50	
TB2M19050	Transferbord 2Move met groene waterdichte hoes	190 / 50	
TB2M19070	Transferbord 2Move met groene waterdichte hoes	190 / 70	
TB2M9550H	Reserve groene waterdichte hoes voor TB2M9550	95 / 50	
TB2M19050H	Reserve groene waterdichte hoes voor TB2M19050(V)	190 / 50	
TB2M9550DH	Wegwerphoes op rol 150 stuks voor TB2M9550	100 / 60	
TB2M19050DH	Wegwerphoes op rol 75 stuks voor TB2M19050(V)	210 / 60	

Glijmatras buisvormig

Buisvormig, gemoltoneerd glijmatras (vulling met polyestervezels). Combinatie van zachtheid met uitstekend glijdvermogen, geschikt voor een transfer in bed, tussen bedden en van het bed naar (rol)stoel. Deze glijmatras zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een liggende transfer over kleine oneffenheden.

- + Combinatie van zachtheid en uitstekend glijdvermogen
- + Wisselhouding of een transfer in/uit bed
- + Binnenzijde in polyamide
- + Max 200 kg



referentie	omschrijving (open zijde)	lengte / breedte
TK70195	Glijmatras buisvormig (70 cm)	195 / 70
referentie	omschrijving	
TK70180NH	Nylonhoes glijmatras buisvormig	



Transfermatras Alpha

Met de transfermatras Alpha kan een patiënt gemakkelijk hogerop gebracht worden in bed of in wisselhouding. Ook kan een patiënt van het bed naar een douchebrancard getransfereerd worden of een gevallen patiënt opgetild worden. Het optillen kan door verschillende personen samen gebeuren waardoor de rug veel minder belast wordt.



**Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)**



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting
PMAST11	Transfermatras Alpha 4 handgrepen 110 x 53cm	200kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie, radiotransparant
PMAST15	Transfermatras Alpha 6 handgrepen 150 x 53cm	200kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie, radiotransparant



+ Zittend transfereren

Een transferplank is een ideaal hulpmiddel voor een zittende transfer waarbij een klein hoogteverschil of een open ruimte moet overbrugd worden, bijv. tussen bed, rolstoel, stoel, toilet, enz. Het gladde bovenvlak maakt de transfer makkelijker.

De onderzijde voorzien is van een antisliplaag voor een grotere veiligheid. Beschikbaar in verschillende afmetingen. Wordt vaak gebruikt in combinatie met een draaischijf voor staand draaien en een transfergordel (zie verder). Een transferkussen zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een zittende transfer over kleine oneffenheden.



“Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bewegingsvrijheid voor mensen met speciale behoeften”

Transferplank 3B-Board

Een stijve, stabiele transferplank met traditionele gekromde vorm. De plank kan zowel gebruikt worden met de kromming vooraan als achteraan, in functie van geplande verplaatsing en eventuele obstakels (bijv. een wiel van de rolstoel). Het heeft een uiterst vlak en glad bovenvlak en antislipstroken onderaan.

- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Eenvoudig te reinigen met zeepsop of ontsmettingsalcohol
- + Polypropyleen
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte
TP3B	Transferplank 3B, banaanvormig, wit	77 / 23



Transferplank E-Board

Een dunne transferplank, veelzijdig in gebruik. Sommige versies zijn aan de rand van de plank voorzien van een 'vleugel', een vlak dat op en neer kan plooiën. Dit zorgt voor meer stijfheid en stabiliteit. De vleugel wordt gebruikt als bescherming tegen het wiel van een rolstoel.

- + Verschillende afmetingen beschikbaar
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Eenvoudig te reinigen met zeepsop of ontsmettingsalcohol
- + Polypropyleen
- + Max 135 of 150 kg, i.f.v. model



referentie	omschrijving	lengte / breedte	
TPE4520	Transferplank E-board, zwart	45 / 20	
TPE6025	Transferplank E-board, zwart	60 / 25	
TPE6033	Transferplank E-board, zwart met vleugel	33 / 60	
TPE7533	Transferplank E-board, zwart met vleugel	75 / 33	



Zorg bij een transfer met een transferplank dat het oppervlak waar er naar toe gegleden wordt iets lager ligt en gebruik de zwaartekracht als extra hulpmiddel

Transferplank Butterfly

Deze transferplank is voorzien van een uitsparing voor het rolstoelwiel voor een betere positionering en stabiliteit. De Butterfly kan ook gebruikt worden in combinatie met een specifieke glijmat. Dit zorgt voor nog minder wrijving tussen persoon en transferplank bijvoorbeeld bij gebruik met de blote huid.

- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Eenvoudig te reinigen met zeepsop of ontsmettingsalcohol
- + Bord in glasvezel, glijmat polyamide/polyester
- + Max 250 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte	
TPB	Transferplank Butterfly	66 / 32	
TPBV	Glijmat voor transferplank Butterfly	47,5 / 25	

Glijkussen buisvormig

Buisvormig, gemoltoneerd glijkussen (vulling met polyestervezels). Combinatie van zachtheid met uitstekend glijdvermogen, geschikt voor een transfer in bed, tussen bedden en van het bed naar (rol)stoel. Dit kussen zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een zittende transfer over kleine oneffenheden.



- + Combinatie van zachtheid en uitstekend glijdvermogen
- + Hogerop brengen, wisselhouding
- + Zittende en liggende transfer
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Binnenzijde in polyamide
- + Max 200 kg

referentie	omschrijving (open zijde)	lengte / breedte	
TK6050	Transferkussen, buisvormig (50 cm)	60 / 50	
referentie	omschrijving		
TK6050NH	Nylonhoes Transferkussen, buisvormig		

Draagstoel Alpha

De draagstoel Alpha is een ideaal hulpmiddel voor een gecontroleerde transfer van personen op trappen en andere situaties waar geen ruimte is voor mechanische hulpmiddelen. Het gewicht van de patiënt kan verdeeld worden over 5 zorgverleners, zelfs van verschillende lengtes.



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting	
PMADS	Draagstoel Alpha 5 handgrepen met zitgordel	180kg / polyamide / handgrepen met speciale greephouders voor stevige grip	

+

Rechtkomen en verplaatsen

Opstahulpmiddelen helpen om op te staan en weer te gaan zitten wanneer dat voor de persoon steeds moeilijker wordt. Bijvoorbeeld bij transfers van/ naar het toilet, de (rol)stoel en zetel. De hulpmiddelen zijn zodanig ontworpen dat de patiënt of bewoner gestimuleerd wordt om de eigen kracht maximaal te benutten. Ze ondersteunen immers het natuurlijke bewegingspatroon bij het rechtkomen en terug gaan zitten. Ze kunnen ook worden gebruikt voor (kleine) verplaatsingen. Ook hier kan de zorgverlener de juiste ondersteuning bieden zonder fysiek belast te worden en met maximaal comfort voor de zorgontvanger.



Transferwagen Easy Transfer

Opstahulpmiddel Easy Transfer helpt mensen bij het opstaan op eigen kracht. De gebruiker blijft diverse spiergroepen gebruiken, wat instandhouding van kracht en evenwicht stimuleert.

De Easy Transfer is uitgerust met een stabiel, wendbaar en mechanisch onderstel dat kan gespreid worden. Zo is elke stoel, rolstoel, toiletstoel en bed goed te benaderen.

Op de horizontale voetenplank kan de gebruiker op een natuurlijke manier de voeten positioneren.

De Easy Transfer beschikt over twee horizontale zitschelpen die tijdens de transfer gedraaid worden.

- + Uitgerust met optrekstang
- + Geen batterij en motoren, dus geen exploitatiekosten
- + Compact
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte / draagvermogen
TWETPS	Easy Transfer met potenspreider	108,2 / 61 / 150 kg



*“geen elektronica
dus lage exploitatiekosten”*

Transferwagen Bea deluxe

De Bea deluxe is een overal inzetbaar opsta- en transferhulpmiddel voor personen die nog kunnen rechtstaan, maar moeite hebben met het stappen. Tijdens het vervoer bestaat ook de mogelijkheid om te gaan zitten. De Bea deluxe is voorzien van weg-draaibare zitvlakken en een flexibel opgehangen kniesteun. Het onderstel kan gespreid worden zodat zowel toilet als brede rolstoel gemakkelijk kunnen benaderd worden.

- + Voor staande en zittende transfers
- + Wegdraaibare zitschalen
- + Geremde achterwielen
- + Afneembare flexibele kniesteun
- + Gebruiksvriendelijk zonder elektronica



- + Antislip voetenplank
- + Bruikbaar in natte ruimtes
- + Onderstel kan gespreid worden

referentie	omschrijving	lengte / breedte / hoogte
EMBDL	Opsta- en transferhulpmiddel Bea deluxe	108 / 69,5 / 113



+
**IN DE
KIJKER!**
+

Opstahulpmiddelen of transferwagens helpen mensen bij opstaan op eigen kracht. De gebruiker blijft diverse spiergroepen gebruiken, wat instandhouding van kracht en evenwicht stimuleert. Transferwagens zijn geschikt voor mensen in de actieve mobiliteitsklasse. Om een transferwagen te kunnen gebruiken, moeten de sta-functie en rompbalans van de zorgvrager voldoende zijn.

“De Raiser Pro helpt bij het revalideren van patiënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De patiënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.”

Transferwagen Raiser Pro

De Raiser Pro is een verrijdbaar opsta- en transferhulpmiddel geschikt voor staande transfers. De lage voetenplank kan eenvoudig onder de voeten van de gebruiker gereden worden. Een parkeerrem garandeert een stabiele transfer. De gebruiker kan een willekeurige positie voor de handen kiezen.

Een minder actieve gebruiker kan langs achter worden ondersteund met een gordel en zo worden geholpen bij het opstaan. Een gordel met glijdstuk voorkomt opstropen van de kleding. De gebruiker wordt maximaal gestimuleerd om op eigen kracht op te staan.

De handgriep-lussen, dienen als verlenging van de handgreep en kunnen gebruikt worden wanneer de gebruiker de handgreep niet kan bereiken.



Ontdek hier hoe het werkt.
Of klik [hier](#)!



- + Staande transfer
- + Verschillende gordels beschikbaar i.f.v. de mogelijkheden van de gebruiker
- + Gepolsterde kniesteun met één hand op de juiste hoogte in te stellen
- + Met parkeerrem
- + Stabiel
- + Kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is. Ideaal in kleine ruimtes
- + Lage basisplaat (3,5 cm)
- + Veelzijdige handgreep
- + Max 170 kg

referentie	omschrijving	lengte / breedte
TWRAISPRO	Opsta- en transferhulpmiddel Raiser	63 / 54 / 120
TWRL	Handgreep-lussen Raiser	
TWRS/M	Sling voor Raiser maat S/M	
TWRS/XL	Sling voor Raiser maat L/XL	
TWRSG/M	Sling met glijdstuk voor Raiser maat S/M	
TWRSG/XL	Sling met glijdstuk voor Raiser maat L/XL	
TWRSGB/M	Sling/gordel met glijdstuk voor Raiser maat S/M	
TWRSGB/XL	Sling/gordel met glijdstuk voor Raiser maat L/XL	





Ondersteunen

Dit omvat de transferhulpmiddelen die de gebruiker ondersteunen bij het rechtekomen, draaien en staan. Een transfergordel en -sling zorgen ervoor dat zorgverlener en -ontvanger bij elkaar ideale grip vinden zonder aan kleren of ledematen te moeten trekken. De kracht wordt overgezet op plaatsen die meer verantwoord zijn m.b.t. ergonomie en comfort (bijv. kort bij het bekken i.p.v. onder de oksels). De zorgverlener kan een ergonomische houding behouden bij het ondersteunen van de zorgontvanger. Een draaischijf is een ideaal hulpmiddel voor personen die nog kunnen staan maar moeilijk te been zijn. Door het gebruik ervan worden knie-, enkel- en heupgewrichten veel minder belast. De voeten van de zorgontvanger worden op de draaischijf geplaatst en nadat hij is rechtgekomen (al dan niet met ondersteuning) kan hij gedraaid worden zonder zijn voeten te verplaatsen. Opricht hulpen helpen om van lig- naar zithouding te gaan in bed, of om recht te komen vanop de grond.

Transfergordel Universeel

De gordel is voorzien van verschillende ergonomisch aangebrachte handvatten waardoor steeds een veilige en comfortabele grip mogelijk is.



- + Buitenkant vervaardigd uit 100% polyamide met PU-coating
- + Binnenkant uit antislipmateriaal

referentie	omschrijving	omtrek / breedte	
TGIMXXS	Universele transfergordel XXS	45 - 90 / 9	
TGIMXS	Universele transfergordel XS	65 - 105 / 9	
TGIMS	Universele transfergordel S	65 - 105 / 13	
TGIMM	Universele transfergordel M	90 - 130 / 13	
TGIML	Universele transfergordel L	125 - 150 / 13	

Transfergordel OneManSling

OneManSling maakt het mogelijk om met één persoon een patiënt hoger in bed te krijgen. Bevestig de OneManSling aan de bovenzijde van het bed door middel van de lus en positioneer met minimale inspanning de patiënt hoger in het bed. Om wrijving te beperken, gebruikt men de OneManSling best in combinatie met een glijdlaken.



- + Hulp bij het hoger plaatsen in bed
- + Hulp bij het in- en uitdraaien van de benen uit bed
- + Max 150 kg

referentie	omschrijving	omtrek / breedte	
OMS	Transfergordel OneManSling	300 / 7,5 (lengte / breedte)	

Transfergordel MagicBelt

De MagicBelt is uitgerust met een flexibele veiligheidsgordel die extra ondersteuning biedt aan de patiënt. De stevige handvatten zijn voorzien van speciale greephouders waardoor een comfortabelere en stevigere grip mogelijk is. De gordel heeft zowel korte als langere handgrepen. Dit garandeert voor elke situatie de meest ergonomische en veilige greep.

- + Binnenkant voorzien van antislip
- + Buitengedeelte vervaardigd uit vuilafstotend nylon
- + Binnenste gedeelte kan verwijderd worden.
- + Max 200 kg



referentie	omschrijving	lengte / breedte
PMAFM	Transfergordel MagicBelt	65 / 25



Beengordel

De beengordel wordt rond de benen en onder de knieën aangebracht door middel van een velcrosluiting. Dit geeft meer sterkte en steun bij het staan en rechtekomen. De sluiting is optimaal aanpasbaar dankzij de extra brede sluiting.

- + Extra steun bij staan en rechtekomen



referentie	omschrijving	lengte / breedte
PMABG	Beengordel	100 / 22



Draaischijf Turntable

De Turntable is een voetdraaischijf vervaardigd uit hard materiaal en is langs beide kanten uitgerust met antislipmateriaal.

- + ABS gecoate plastic
- + Diameter: 40 cm
- + Reinigen met een vochtige doek
- + Max 200 kg



referentie	omschrijving	diameter
DSPMTT	Voetdraaischijf TurnTable	40



Draaischijf Pediturn

De Pediturn is een voetdraaischijf uit soepel materiaal waardoor hij zacht en comfortabel is in gebruik.

- + Diameter: 40 cm
- + Reinigen met een vochtige doek
- + Max 150 kg



referentie	omschrijving	diameter
DSPED	Voetdraaischijf PediTurn	40



Oprichthulp BedString

De BedString is een touwladdertje dat kan gebruikt worden door personen die nog over voldoende kracht in arm en hand beschikken. Zo kan de persoon zichzelf rechtekken, draaien in bed of zich behelpen bij een transfer van de rolstoel naar het bed.

De BedString is uitgevoerd in zacht materiaal en kan gemakkelijk in bed blijven liggen zonder te hinderen. De zachte en stevige handgrepen zorgen voor een veilige grip. Het hulpmiddel is aan het bed bevestigd met een lus.



- + Rechtekken, draaien in bed of voor transfer van rolstoel naar bed
- + Ook autonoom te gebruiken (zonder externe hulp)

referentie	omschrijving	lengte / breedte
TWLBS	Oprichthulp touwladder BedString	170 / 8,5



Voetensteun Alpha

De voetensteun Alpha helpt om hoogteverschillen te overbruggen bijv. tussen het bed en de rolstoel of toilet.

- + Vervaardigd uit polyethyleen
- + Max 200 kg
- + Wasbaar in lauw water



referentie	omschrijving	lengte / breedte / hoogte
PMAVS	Voetensteun Alpha	38 / 32 / 8,5



+
TIP!
+

Zorg voor duidelijk commando's
als "trekken" of "duwen" als
2 zorggevers samenwerken

Been- & armsteun Nurse Assistant

De Nurse Assistant ondersteunt een been of arm van een patiënt tijdens de verzorging. Zo ligt het te verzorgen onderdeel van betreffende lidmaat volledig vrij voor optimale bereikbaarheid tijdens de verzorging.

- + Vermindert de inspanningen bij de patiënt én de hulpverlener
- + Maakt het overbodig dat een extra hulpverlener het been vasthoudt terwijl de andere de verzorging uitvoert
- + Grote stabiliteit
- + De cover waar het been op rust is gemakkelijk verwisselbaar



referentie	omschrijving	lengte / breedte
NA30	Nurse Assistant been-/armsteun	39 / 39 / 30
NAC	Hoes voor Nurse Assistant	
NACD	Wegwerp hoes voor Nurse Assistant	



+
**IN DE
KIJKER!**
+



Handig hulpmiddel bij het verzorgen van een arm of been en bij het aantrekken van steunkousen in bed. De Nurse Assistant is ontwikkeld om de fysieke belasting van zorgverleners bij het verzorgen en verplegen van wonden, het zwachtelen van armen en ledematen en het aantrekken van steunkousen in bed te beperken. Met deze steun kunnen zorgverleners vanuit een betere positie werken. Het frame van de beensteun/armsteun is licht en bestaat uit inox. Hij wordt geleverd met 1 wasbare en 1 disposable hoes. De wasbare hoezen kunnen bijgekocht worden per 10 stuks en de wegwerphoezen per 100 stuks.

+ Evacueren

Deze hulpmiddelen worden ingezet voor een snelle en veilige evacuatie van minder mobiele mensen (over meerdere verdiepingen) bijv. bij panne van liften of bij noodsituaties.

Uit brandweerstatistieken blijkt dat 59% van de branden in woonzorgcentra ontstaan op de bewonerskamers. De wetgeving schrijft voor dat u een veilig evacuatiemiddel moet bieden aan personen die mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig de noodroutes te gebruiken in geval van brand of een andere noodsituatie.



Evacuatiestoel

Alle 3 de modellen volgens het 'SOLOGo' principe, **Single Operator LOad & Go Technology**, 50% minder operatoren nodig om de patiënt op de Exitmaster te krijgen, een levensreddend voordeel bij evacuatie. Snel en eenvoudig te gebruiken, reeds bewezen producten voor elk evacuatie-scenario, allemaal vervaardigd en getest volgens de hoogste normen en CE-compatibel.

- + Eenvoudig te bedienen door 1 persoon, een korte opleiding volstaat.
- + Uniek zelfremmend systeem voor goede grip en controle
- + Onmiddellijk inzetbaar
- + Wendbaar en stabiel
- + Uitstekende grip
- + Hellingsgraad tussen 28 - 42 °



Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)



referentie	omschrijving	eigen gewicht/ draagvermogen	
ESEGO	Evacuatiestoel EGO zittend dalen, 2 wielen	13,5 kg / 180 kg	
ESVERSA	Evacuatiestoel VERSA zittend dalen, 4 wielen	14,7 kg / 180 kg	
ESELITE	Evacuatiestoel ELITE zittend dalen/stijgen, 4 wielen	17,3 kg / 180 kg	
ESSC	Evacuatiestoel opbergkast		

Evacuatiemat

De evacuatiemat laat een snelle en veilige evacuatie toe van bedlegerige personen. De evacuatiemat wordt onder de matras gelegd en blijft daar permanent liggen. Bij een evacuatie wordt de bedlegerige persoon m.b.v. 2 gordels op de matras vastgegespt zodanig dat de matras een beschermende cocon rond de patiënt vormt. De hulpverleners gebruiken de evacuatiegordels aan het voet- en het hoofdeinde van de evacuatiemat om de matras samen met de persoon te verplaatsen van het bed over de grond en de trappen tot hij/zij in veiligheid gebracht is



Ontdek
hier hoe
het werkt.
Of klik [hier!](#)



referentie	omschrijving	materiaal
EVACM	Evacuatiemat 100 x 205 cm	PVC coated polyester



Transfermatras Alpha

Met de transfermatras Alpha kan een patiënt gemakkelijk hogerop gebracht worden in bed of in wisselhouding. Ook kan een patiënt hiermee van het bed naar een douchebrancard getransfereerd worden of kan een gevallen patiënt opgetild worden. Het optillen kan door verschillende personen samen gebeuren waardoor de rug veel minder belast wordt.



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting
PMAST11	Transfermatras Alpha 4 handgrepen 110 x 53cm	200kg / nylon / transferhulpmidde en evacuatie, radiotransparant
PMAST15	Transfermatras Alpha 6 handgrepen 150 x 53cm	200kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie, radiotransparant



Draagstoel Alpha

De draagstoel Alpha is een ideaal hulpmiddel voor een gecontroleerde transfer van personen op trappen en andere situaties waar geen ruimte is voor mechanische hulpmiddelen. Het gewicht van de patiënt kan verdeeld worden over 5 zorgverleners, zelfs van verschillende lengtes.



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting
PMADS	Draagstoel Alpha 5 handgrepen met zitgordel	180kg / polyamide / handgrepen met spe- ciale greephouders voor stevige grip





Opleidingen

Metra organiseert in samenwerking met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers op regelmatige tijdstippen opleidingen die er moeten toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie.



De grote uitdaging zal er immers ook de komende jaren vooral uit bestaan om voldoende mensen te blijven vinden die het engagement om te werken in de zorgsector willen opnemen, ondanks stijgende werkdruk en de grote zorgnood bij patiënten en bewoners. Doordat de instroom de stijgende nood aan arbeidskrachten niet zal kunnen volgen, zullen zorgverleners overtuigd moeten worden om langer aan de slag te blijven. En dan zijn er ook nog de pensioenmaatregelen van de overheid, die ook beogen om mensen langer te laten werken. Het gebruik van transferhulpmiddelen, gecombineerd met de juiste opleidingen, kan hierbij een grote bijdrage leveren:

- + **Meer voldoening:** het zorgen volgens de juiste methode en met correcte hulpmiddelen resulteert in meer comfort en veiligheid voor de patiënt of bewoner. De waardering bij deze mensen zal stijgen, dus ook de voldoening bij de zorgverlener.
- + **Meer motivatie:** werknemers die in optimale omstandigheden hun job kunnen uitoefenen zijn meer gemotiveerd, zullen minder snel van sector of werkgever veranderen en ook als ze wat ouder zijn nog volop kunnen meedraaien.
- + **Minder ziekteverzuim:** ergonomisch werken zorgt voor minder fysieke belasting bij de zorgverlener, de kans om door letsels een tijd buiten strijd te zijn wordt veel kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen.
- + **Efficiëntere zorg:** door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen heel wat zorgtaken door 1 persoon worden uitgevoerd, waar men nu vaak 2 mensen moet inzetten voor in se eenvoudige handelingen.

Workshops ergonomisch werken in de zorg

Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Doelgroep

- + Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, ...) die hun kennis willen verruimen rond "correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg".

Doelstellingen

- + Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
- + Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
- + Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
- + Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
- + Comfort bieden aan de patiënt

Werkwijze

- + Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
- + Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
- + Evaluatie en groepsgesprek
- + Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een optimale kennisoverdracht en participatie

“Werkdruk in de zorg wint het té vaak van de juiste werkhouding. De juiste tiltechnieken en hulpmiddelen worden daar jammer genoeg niet steeds toegepast. Er wordt té dikwijls op de fysieke kracht (belastbaarheid) van de zorgverlener teruggevallen. Zo worden er telkens grenzen overschreden, wat nefast is voor het gestel, de vitaliteit en mettertijd ook de mentale gezondheid van de zorgverlener”

WORKSHOP: WERKEN MET MANUELE TRANSFERHULPMIDDELEN (3 UUR)

Inoefenen van verplaatsingen met behulp van transferhulpmiddelen

- + Patiënt hogerop brengen in bed
- + Patiënt draaien in bed
- + Horizontale translaties in bed
- + Comfortabel positioneren in bed

WORKSHOP: WERKEN MET MECHANISCHE TRANSFERHULPMIDDELEN (3 UUR)

Gebruik van de actieve tillift

- + Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen gebruiken
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de actieve tillift

Gebruik van de passieve tillift

- + Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
- + Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 zorgverleners
- + Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband in lig en in zit
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de passieve tillift

WORKSHOP: WERKEN MET MANUELE EN MECHANISCHE TRANSFERHULPMIDDELEN (6 UUR)

Inoefenen van verplaatsingen met behulp van transferhulpmiddelen

- + Patiënt hogerop brengen in bed
- + Patiënt draaien in bed
- + Horizontale translaties in bed
- + Comfortabel positioneren in bed

Gebruik van de actieve tillift

- + Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen gebruiken
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de actieve tillift


Gebruik van de passieve tillift

- + Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
- + Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 zorgverleners
- + Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband in lig en in zit
- + Correct positioneren in lig en in zit
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de passieve tillift



Een speciaal hiertoe opgeleide persoon kan collega's wijzen op ergonomische toepassingen in de zorg en zo de organisatie gezonder laten functioneren zodat klachten verminderen en zelfs voorkomen worden.

Manuele transfer- hulpmiddelen

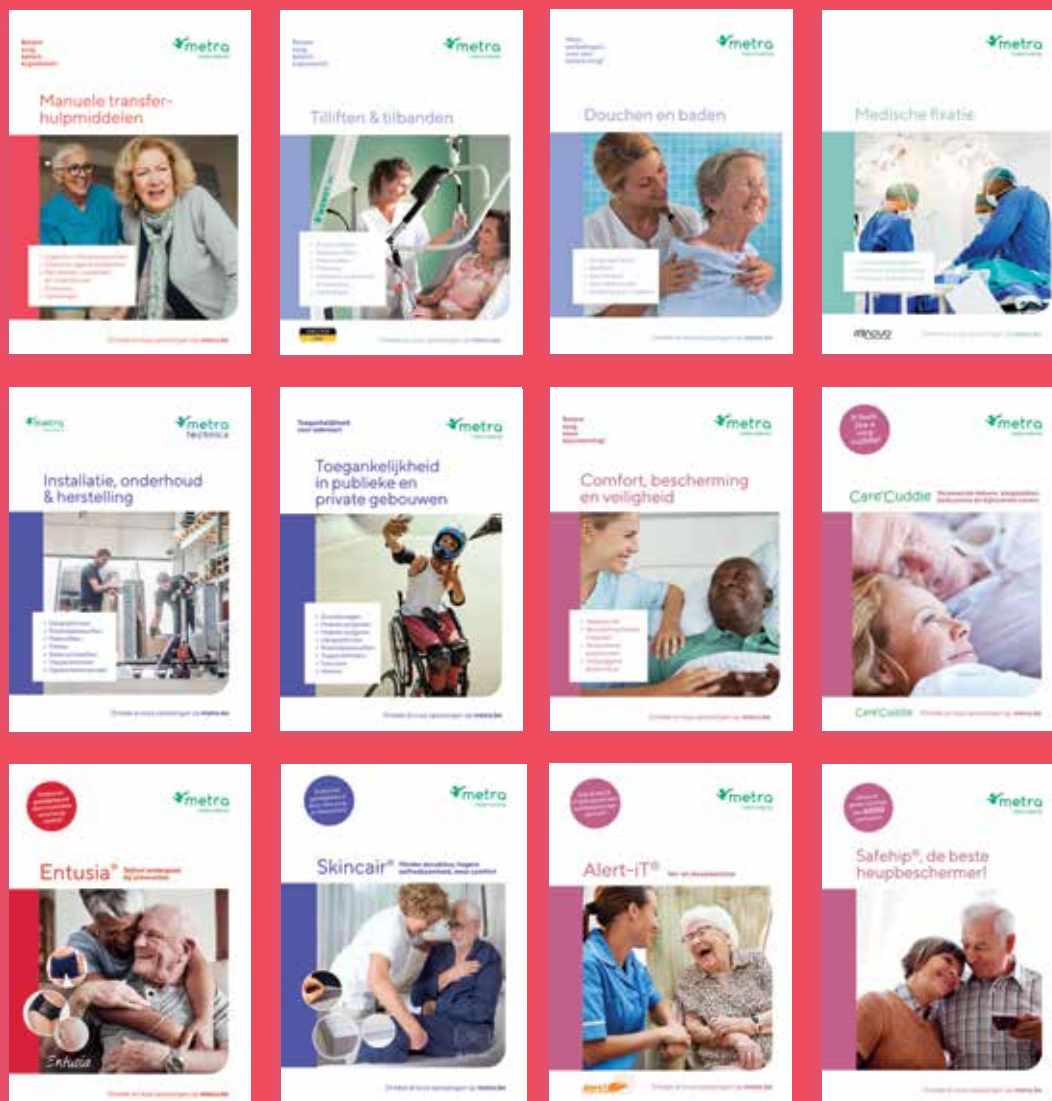

Ontdek al onze oplossingen op metra.be



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid |
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent

