



HEALTH &
NURSING CARE



WE MAKE
HIGH QUALITY
FURNITURE
THAT CARES
FOR YOU

JECH[®]
The safe way to comfort



Kies voor JECH

JECH CZ is een fabrikant van hoogwaardige stoelen voor de gezondheidszorg, verpleegkundige zorg en institutionele zorg.

De producten voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit van de gebruikte materialen en het productieproces. Ook voldoen ze aan de strengste eisen op het gebied van comfort voor zowel gebruikers, mantelzorgers als zorgprofessionals.

De producten stimuleren de gebruikers om actief en alert te zijn.

Inhoud

GAVOTA

Volledig in hoogte verstelbare stoel, specifiek ontwikkeld voor faciliteiten die te maken hebben met gezondheids- en sociale zorgdiensten.

Pagina 6 - 15

SALZA

Een prachtige praktische fauteuil in combinatie met een comfortabel bed.

Pagina 16 - 19

ALTA

Een stoel uit de ALTA collectie past bij elk pand en voldoet aan de strengste eisen voor het comfort van oudere mensen en minder mobiele mensen.

Pagina 20 - 26

STOELEN

Onze stoelen voor verpleegkundige zorg zijn ergonomisch en worden gekenmerkt door hoogwaardige afwerking die veerkracht bij intensief gebruik garandeert.

Pagina 27 - 29

Kenmerken



Eettafel



Handreep op rugleuning



Afneembare stoffering



Wielen



Hoofdsteun



Voetsteun



Waterdicht



Anti-decubitus



Antibacterieel



Niet brandbaar



Dooft vanzelf

KWALITEIT STAAT CENTRAAL BIJ ALLES WAT JECH DOET.

Wij ontwikkelen onze producten in nauwe samenwerking met gezondheidszorg-deskundigen en met eindgebruikers om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan alle eisen. Ook werken wij samen met interieur-ontwerpers zodat onze producten passen bij het interieur waar ze worden gebruikt.


Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop bij al onze activiteiten. We streven ernaar om de kwaliteit van onze producten en diensten op het best haalbare niveau te houden gedurende het hele productieproces van elk meubelstuk. Alles in overeenstemming met **ISO 9001:2008**.

Het resultaat is producten die comfortabele, veilig en gemakkelijk te bedienen zijn. Er is een ruime keuze aan accessoires inclusief elementen die de perceptie van de klant stimuleren

Technologie bij het gebruik van kunstleder

De naden van kunstleder laten we op elkaar aansluiten door middel van hoogfrequent lassen. Dit voorkomt dat het materiaal wordt verstoord door naaldmarkeringen en door water, reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen die in de bekleding doordringen. Dit houdt de bekleding hygiënischer en bacterievrij.

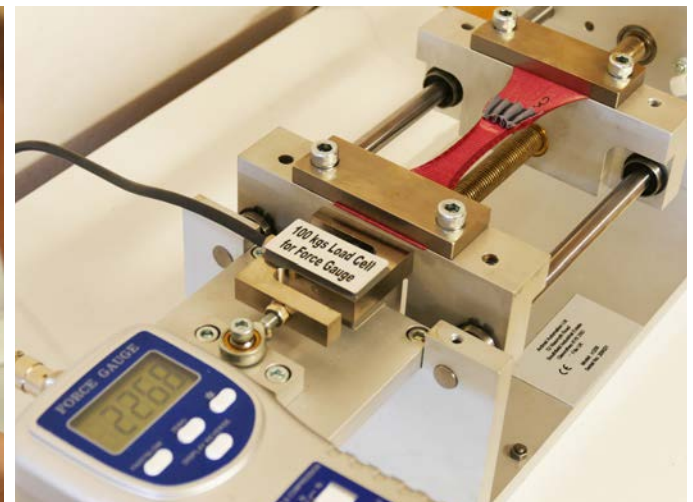



STOFFERING & AFWERKING

FUNCTIONALITEIT,
COMFORT, VEILIGHEID

Stoffering van de hoogste kwaliteit.

We gebruiken stoffen van toonaangevende internationale fabrikanten die voldoen aan alle belangrijke brandveiligheidsnormen, antibacterieel zijn en er tegelijkertijd aantrekkelijk uitzien en gemakkelijk zijn wat onderhoud en hygiëne betreft.

De stoffen verliezen hun eigenschappen niet door wassen, frequent gebruik of veroudering van het materiaal.

Ze voldoen aan de belangrijke internationale normen voor brandbeveiliging DIN 4102, BS 5852 crib 5 en overige.

Antibacteriële en anti-schimmel afwerking

De oppervlakteafwerking van onze producten voldoet aan de strengste Europese normen (brandwerend, veiligheid, antibacteriële werking tegen bacteriën en schimmels).

De stoffen worden gekenmerkt door kleurhelderheid en lichtvastheid. Ze zijn ook uitzonderlijk veerkrachtig tegen slijtage en behouden hun prachtige kleur wanneer ze intensief worden gebruikt.

Verder bewijs van de geschiktheid voor ziekenhuis- en verpleeghuisomgevingen is hun weerstand tegen standaard desinfectiemethoden.



GAVOTA

GAVOTA fauteuils zijn uitstekende meubelstukken die het leven voor mensen met beperkte bewegingsvrijheid makkelijker maken. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in bejaardentehuizen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven en zijn uitstekend geschikt voor gebruik bij langdurige zorg.

Bovendien passen ze perfect in het interieur dankzij de hoogwaardige productie en het gebruik van hoogwaardige materialen.

GAVOTA fauteuils werken op basis van een modulair systeem, wat betekent dat de fauteuil kan worden geconfigureerd om precies aan uw behoeften te voldoen. Het brede scala aan beschikbare accessoires maakt de GAVOTA ook een geweldige stoel die rust en ontspanning combineert met uitstekende functionaliteit.

De gebruikte PUR-schuimmaterialen zijn niet-brandbaar en voldoen aan de Britse BS 5852 (Crib 5) -standaard.



Verrassend meer dan alleen een aantrekkelijke stoel

Gepatenteerd



De COMFORT rugleuning biedt ontspanning en heeft een stimulerende werking.

Verstelbare armleuningen Deze kunnen op vijf verschillende hoogtes worden ingesteld.

Ergonomisch verstelbare beensteun, ondersteuning voor het onderste deel van de benen, verstelbaar en gestoffeerd (kan onafhankelijk van de positie worden aangepast).

De opvouwbare voetsteun met antislip oppervlak om de voeten van de persoon die wordt verplaatst te ondersteunen. Maakt het gemakkelijker om in en uit de stoel te stappen en heeft een stop tegen onbedoelde beweging van de fauteuil.



Het beschermende wiel voorkomt dat overig interieur wordt beschadigd bij verplaatsen van de stoel.

De duwstang op de rugleuning van de stoel stelt iemand anders in staat om de stoel te bedienen en de positie van de rugleuning te verstellen.

Ruime opbergzak voor het opbergen van eigendommen.

Massief houten frame met een breed scala aan tinten/kleuren voor houtbeits.

Positie kan worden geregeld door de persoon in de stoel. Rugsteun en voetsteun kunnen aan beide zijden worden bediend.

Door de wielen kan de stoel makkelijk verplaatst worden. De wielen draaien en zijn voorzien van een rem.

TENTE

De beschermende rand boven het wiel voorkomt beschadiging aan het overige interieur bij verplaatsing van de stoel.

Het vijfde 1-richtingswiel maakt het gemakkelijker om rechtdoor te gaan wanneer er iemand in de stoel zit.

GAVOTA A

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- De bekleding van de rugleuning en de zitting is afneembaar.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

18 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Individuele configuratie



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun






Vaste
armleuningen



In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

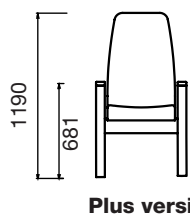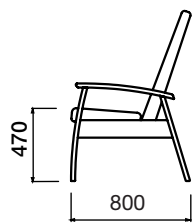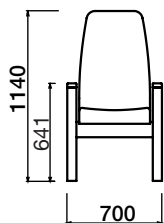

Plus versie
(Zithoogte
+40 mm)

Parameters en opties



type: **A2-0-V**



type: **A1-0-P**



type: **A1-0-V**



type: **A2-0-P**

GAVOTA B



type: **B2-1-V**



type: **B1-1-P**



type: **B1-1-V**



type: **B2-1-P**

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- Verstelbare rugleuning die kan worden bediend door de persoon die in de stoel zit.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame

wordt gebruikt
Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

19 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Individuele configuratie



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun




Vaste
armleuningen





In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

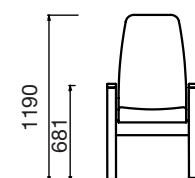

Plus versie
(Zithoogte
+40 mm)

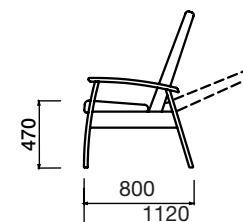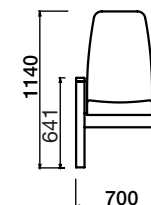

Parameters en opties



GAVOTA C

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- Uitgevoerd met verstelbare rugleuning en beensteun.
- De positie kan worden aangepast door de

persoon in de stoel of achter de stoel.

- Hendel voor makkelijke bediening.
- Voorzien van gasveer

Technische parameters

Materiaal dat in het frame

wordt gebruikt

Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

19 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Individuele configuratie



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun






Vaste
armleuningen



In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

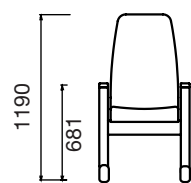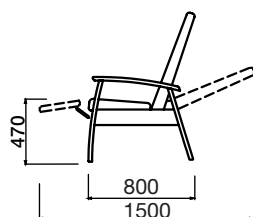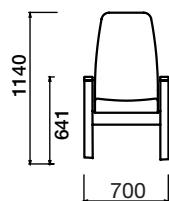

Plus versie
(Zithoogte
+40 mm)

Parameters en opties



type: C2-2(1)-V



type: C1-2(1)-P



type: C1-2(1)-V



type: C2-2(1)-P

GAVOTA D



type: D2-2(1)-V



type: D1-2(1)-P



type: D1-2(1)-V



type: D2-2(1)-P

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

22 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Diameter wielen (mm)

4 x 75,1 x 100

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- Uitgevoerd met verstelbare rugleuning en beensteun.
- De positie kan worden aangepast door de persoon in de stoel of achter de stoel.
- 1-richtingswiel op een veer zodat de stoel rechtdoor gaat als deze verplaatst wordt met de persoon in de stoel.
- Voorzien van 4 zwenkwielen met rem.
- Opvouwbare voetsteun met anti-slip oppervlak.

Individuele configuratie



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun




Vaste
armleuningen





In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

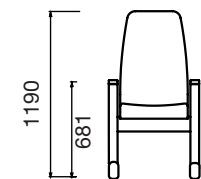

Plus versie
(Zithoogte
+40 mm)

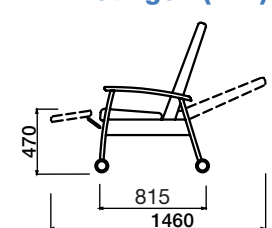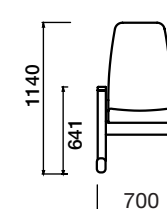

Parameters en opties



GAVOTA F

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- Uitgevoerd met verstelbare rugleuning en beensteun.
- De positie kan worden aangepast door de per-

soon in de stoel of achter de stoel.

- De stoel heeft 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen voorzien van rem.
- Opvouwbare voetsteun met antislip oppervlak.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame

wordt gebruikt

Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

29 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Diameter wielen (mm)

2 x 300, 2 x 125

Individual configuration



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun




Vaste
armleuningen



In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

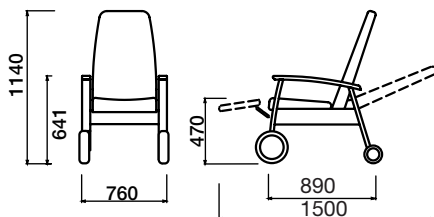

Parameters en opties



type: F2-2(1)-V



type: F1-2(1)-P



type: F1-2(1)-V



type: F2-2(1)-P

GAVOTA G



type: **G2-2(1)-V**



type: **G1-2(1)-P**



type: **G1-2(1)-V**



type: **G2-2(1)-P**

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Massief beukenhout, metaal

Gewicht van de stoel

29 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Diameter wielen (mm)

4 x 125, 1 x 100

Belangrijkste functies

- Het materiaal onder de bekleding is lek-proof.
- Er is een hygiënische opening tussen de stoel en de rugleuning.
- Uitgevoerd met verstelbare rugleuning en beensteun.
- De positie kan worden aangepast door de persoon in de stoel of achter de stoel.
- 1-richtingswiel op een veer zodat de stoel rechtdoor gaat als deze verplaatst wordt met de persoon in de stoel.
- Voorzien van 4 zwenkwielen met een diameter van 125 mm en rem.
- Opvouwbare voetsteun met antislip oppervlak.

Individuele configuratie



Classic
Rugsteun



Comfort
Rugsteun




Vaste
armleuningen





In hoogte
verstelbare
armleuningen

Afmetingen (mm)

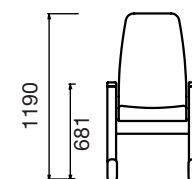

Plus versie
(hogere zitting
+40 mm)

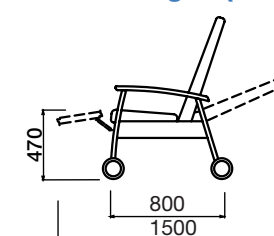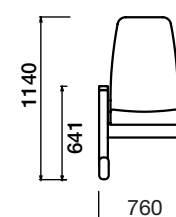

Parameters en opties



GAVOTA accessoires & details



Gestoffeerde armleuningen
afneembaar, meer comfort.



Hoofdsteen voor Classic uitvoering




Hoofdsteen voor Comfort uitvoering.



Roterend blad zowel links als rechts te gebruiken met opstaande rand.



Dienblad
afneembaar met opstaande rand

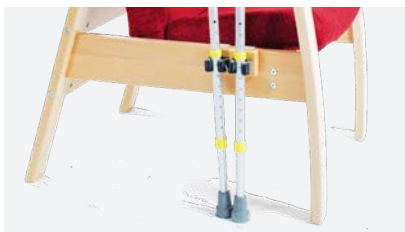

Stokhouder
voor stoelen zonder wielen



Stokhouder
voor stoelen met wielen



Bolvormig handvat
voor gemakkelijk opstaan, afneembaar



Greep op de rugleuning waarmee de verzorger de rugleuning kan aanpassen. Standaard gemonteerd op types C-2, D, F, G.



Verplaatsbare voetsteun
met opbergvak



Veiligheidsriem
Alleen voor types C1-2, C2-2, D, F, G.



Urinehouder



Wegzwenkbare armsteun bij gebruik van infuus



Abductieklos d.m.v. beensteun




Zijpelotten
Alleen voor types C2,D, F, G.



Wasbare, afneembare stoffering
Alleen bij Karagen stoffering



Abductieklos

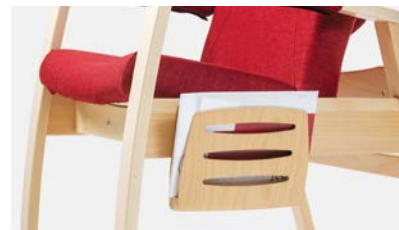

Krant en magazine houder alleen voor stoelen met vaste armleuningen (TYPE P).



Infuushouder compleet



Onafhankelijk verstelbare voetsteun



Heup-veiligheidsgordel



Gestoffeerde zijpanelen met opbergzak aan binnenzijde

Alleen voor stoelen met vast armleuningen A, B, C, D, G (kan niet naderhand worden besteld)

Onderstellen

D



Wielen:

Ø75 mm

Gebruik: binnen

Ondergrond: recht en glad

G



Wielen:

Ø125 mm

Gebruik: binnen en buiten

Ondergrond: recht en glad, bestrating en asfalt

F



Wielen:

2x Ø300 mm, 2x Ø125 mm

Gebruik: binnen en buiten

Ondergrond: recht en glad, bestrating en asfalt

01



02



03



04



GAVOTA - Elektrische uitvoering

- Één en twee motorige versies zorgen voor een onafhankelijke positionering van de voetsteun en de rugleuning.
- Mogelijk op alle stoelen van types B, C, D, G, F
- Accu met 200 cycli



Anti-decubitus versie

Schuim met memory-effect wordt gebruikt in het GAVOTA anti-doorlig systeem. Het minimaliseren van de drukpunten op bepaalde plekken wordt verbeterd door speciale profilering. Geprofileerd schuim past zich volledig naar de vorm van het lichaam en verspreidt de druk gelijkmatig. Zie pagina 35 voor meer informatie.



Stoel aanduidingen

	Uitvoering	Type rugsteun		Verstelling van de rugsteun		Type armleuning
GAVOTA	D	1	-	2	-	P
	A,B,C,D,F,G	1 = Classic 2 = Comfort		0 = geen verstelling 1 = door zittend persoon 2 = door zittend persoon en aan achterzijde		P = vaste armleuningen V = in hoogte verstelbare armleuningen

extra bed

SALZA

De Salza fauteuil is een schitterend meubel dat de eigenschappen van een comfortabele stoel en een comfortabel bed combineert, terwijl het tegelijkertijd veelzijdigheid en gemak biedt.

Bovendien bespaart het ruimte en kan het eenvoudig worden aangepast aan de huidige situatie.

De opvouwbare Salza-stoel is ideaal voor ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, hospices of klinieken, waardoor mensen hun geliefden kunnen begeleiden en zelfs de hele nacht bij het bed van de ouderen of de zieken kunnen zijn.

U kunt de Salza-fauteuil ook zien als een extra bed in een hotel of pension, en het is ook erg handig in slaapkamers en kinderkamers.



Stoel als een extra bed
laat iemand de nacht doorbrengen met de patiënt naast zijn/haar bed.

Verrassend meer dan alleen 2 in 1

Gepatendeerd



De fauteuil kan worden geleverd met een bekleding van speciaal, **gemakkelijk te reinigen** kunstleer. Een breed scala aan moderne stoffeermaterialen is ook beschikbaar.

Het uiterlijk van de fauteuil wordt gekenmerkt door de **massief houten** armleuningen en aan de voorkant van het schuifmechanisme.



Met de wielen kan de geassembleerde fauteuil worden verplaatst. De voorwielen draaien en zijn voorzien van een rem, de achterwielen zijn gefixeerd.

Het **stabiele frame** van de stoel is volledig te reinigen.

Het **vouwmechanisme** is ontworpen om het slaoppervlak met variabele lengtes mogelijk te maken.



SALZA

Belangrijkste functies

- De stoel biedt drie ontspannende posities. Zittende positie, een liggende positie met uitgestrekte voetsteun en een slaappositie.
- De hoofdsteun kan worden aangepast aan de lengte/slaap behoeften van de gebruiker.
- Klapt uit door aan een lus te trekken en is dus niet afhankelijk van de kracht van de zittende persoon.
- Vlamvertragend polyurethaanschuim, dat voldoet aan de standaard NSW 302, wordt gebruikt voor comfortabele ontspanning.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Beukenhoutcomponenten worden gebruikt bij de constructie van de zichtbare, dragende delen van de stoel.

Gewicht van de stoel

75 kg



Maximum gebruikersgewicht

150 kg

Diameter wielen (mm)

2 x 75, 2 x 40

Afmetingen (mm)

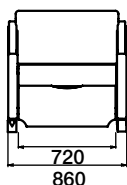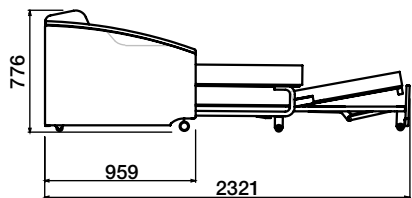


Parameters en opties





TECHNOLOGIE VAN HET OP ELKAAR AAN LATEN SLUITEN VAN KUNSTLEER

We sluiten het kunstleer op elkaar aan door middel van hoogfrequent lassen. Dit voorkomt dat het materiaal wordt verstoord door naaldmarkeringen en/of door water, reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen die in de bekleding kunnen doordringen. Dit houdt de bekleding hygiënischer en bacterievrij.

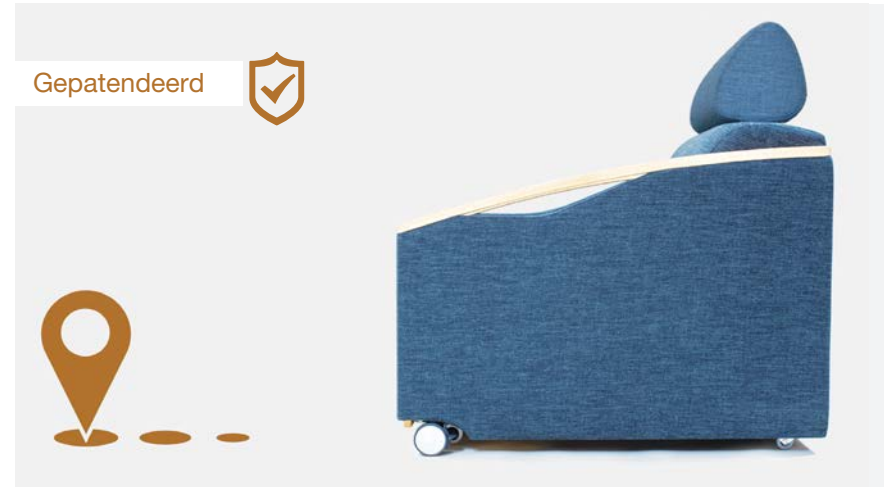

GEMAKKELIJK SCHUIFSYSTEEM VAN DE STOEL

De fauteuil heeft een gepatenteerd mechanisme dat ervoor zorgt dat de stoelconstructie bij het uitschuiven de grond niet raakt. Hierdoor kan deze gemakkelijk in en uit elkaar schuiven op de twee voorste draaiende wielen en twee kleinere achterwielen.



SALZA PRACTIC



VAN FAUTEUIL NAAR SLAAPBED

Het sterke, robuuste en zeer stabiele vouwmechanisme zorgt voor een comfortabele en veilige slaaphouding. Het bestaat uit gegalvaniseerd metaal dat wordt beschermd door een hoogwaardige poedercoating. De stoel kan worden uitgeklappt door eenvoudigweg aan de lus te trekken. Dit is dus niet afhankelijk van de kracht van de zittende persoon. De stoel biedt drie ontspannende posities - een zittende positie, een ontspannen liggende positie met uitgestrekte voetsteun en een slaaphouding.

ALTA

Collectie

Stoelen uit de ALTA-collectie passen in elk pand en voldoen aan de veel-eisende behoeften van oudere en minder mobiele personen. De stijlvolle constructie van massief eiken, gecombineerd met moderne en toch praktische stoffering, zal niet alleen klanten van verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook hun personeel en gasten tevreden stellen.

De stoelen zijn gemakkelijk op te bergen en kunnen moeiteloos worden verplaatst. Alle delen van de bekleding zijn gemakkelijk afneembaar en wasbaar. U kunt kiezen uit drie varianten - een enkele stoel, een 2-zits bank en een 3-zits bank. Alle varianten zijn verkrijgbaar in twee typen: met een hoge of lage rugleuning.

Om het zitten nog comfortabeler te maken, is er een breed scala aan accessoires zoals tafelblad, stokhouder, hoofdsteun en diverse hoezen verkrijgbaar.



ALTA
TAFEL-
BLAD



ALTA

Belangrijkste functies

- Robuuste constructie van massief beukenhout
- Afneembare bekleding, zitting en rugleuning
- De hoes onder de bekleding van de zitting is waterdicht.

- Modern en licht ontwerp
- Door het lage gewicht en het eenvoudige opbergmak van de stoel is deze gemakkelijk te verplaatsen.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Massief beukenhout

Gewicht van de stoel


A - 15 kg, B - 14 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg



Afmetingen (mm)

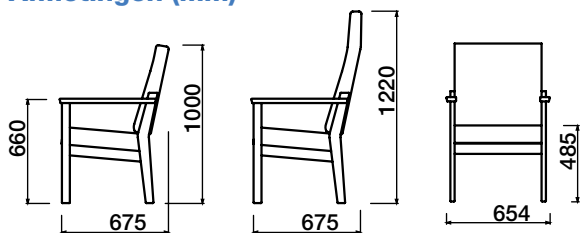

Parameters en opties





Gepatenteerd



Praktrisch
stokhouder
links of rechts
bevestigen



GOED DOORGEDACHTE ERGONOMIE

Een deel van de goed doordachte ergonomie is bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare hoofdsteun. De stoel is ook ideaal voor lange uren zitten in de gangen van ziekenhuizen of kinderdagverblijven.



ALTA LAGE EN HOGE RUGLEUNING

De stoel heeft een eenvoudig systeem voor het bevestigen en verwijderen van de rugleuning. Hierdoor kan er gemakkelijk gewisseld worden tussen een lage of hoge rugleuning. Een hoge rugleuning biedt stabiele ondersteuning van de hele rug. Een lage rugleuning is beter geschikt voor openbare gebouwen.



Patent-protected



ALTA TAFELBLAD

Een uniek systeem dat een dienblad combineert met een tafelblad aan de zijkant van de stoel. De bovenkant van het blad wordt in de rails van de armsteunen gestoken waardoor het fungeert als dienblad. Een siliconen afdichting zorgt ervoor dat het dienblad niet per ongeluk loskomt, en zorgt ervoor dat deze stevig vastzit. Het blad kan ook aan de zijkant van de stoel worden geplaatst waardoor deze dient als tafelblad.



AFNEEMBARE BEKLEDING, VERVANGBARE ZITTING EN RUGLEUNING, ZEER MAKKELIJK OP TE SLAAN

De stoel kan gemakkelijk worden gedemonteerd in individuele componenten om ruimte te besparen, bijvoorbeeld wanneer deze getransporteerd of opgeslagen moet worden. Alle bekleding is afneembaar. Na langdurig gebruik kunnen de zitting en de rugleuning worden vervangen door nieuwe onderdelen, waardoor de stoel wordt hersteld naar zijn oorspronkelijke schoonheid.

ALTA 2-zits bank

Belangrijkste functie

- Robuuste constructie van massief beukenhout, verhoogt de veerkracht.
- Afneembare bekleding, zitting en rugleuning
- De hoes onder de bekleding van de zitting is waterdicht.

- Modern en licht ontwerp
- Door het lage gewicht en het eenvoudige opberggemak van de stoel is deze gemakkelijk te verplaatsen.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame

wordt gebruikt

Massief beukenhout

Gewicht van de stoel

A - 33 kg, B - 31 kg

Maximaal gebruikersgewicht

220 kg (110 kg per zitting)




B



A

Afmetingen (mm)

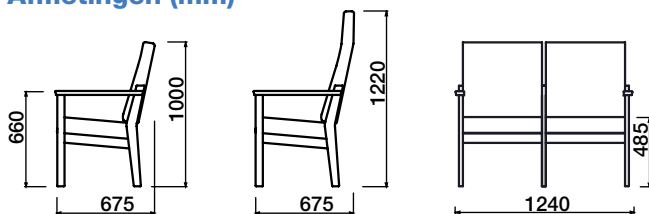

Parameters en opties



ALTA 3-zits bank



A



B

Key features

- Robuuste constructie van massief beukenhout, verhoogt de veerkracht.
- Afneembare bekleding van zitting en rugleuning
- De hoes onder de bekleding van de zitting is waterdicht.
- Modern en licht ontwerp
- Door het lage gewicht en

het eenvoudige opberg-gemak van de stoel is deze gemakkelijk te verplaatsen.

Technische parameters

Materiaal dat in het frame wordt gebruikt

Massief beukenhout

Gewicht van de stoel


A - 48 kg, B - 45 kg

Maximaal gebruikersgewicht
300 kg (100 kg per zitting)

Parameters en opties



Afmetingen (mm)

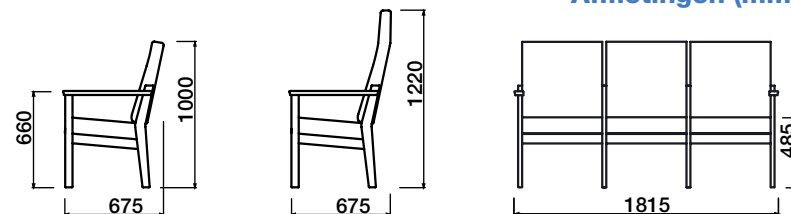

STOELEN

Zorg en comfort.

Profiteer van de veelzijdigheid van deze stoelen. Perfecte ergonomie en een brede selectie van stoffering betekenen dat stoelen van JECH garant staan voor een lange levensduur, comfort en uitstraling.

De stoelen van JECH worden gewaardeerd om hun design en juiste prijs / kwaliteit verhouding.

De JECH stoelen zijn zeer gemakkelijk te

stapelen en kunnen indien gewenst aan elkaar worden gekoppeld. Verkrijgbaar in verschillende stoffen en houtkleuren.

Als traditionele meubelmaker heeft JECH ervoor gezorgd dat zitten in deze stoelen ergonomisch verantwoord is en dat ze bovendien zeer comfortabel zitten.

De stoelen van JECH zijn verkrijgbaar in 4 verschillende varianten met elk een ander design en functionaliteit.





KOPPELEN
optioneel verkrijgbaar



OPBERGRUIMTE
ONDER DE STOEL
standaard eigenschap



STAPELEN



BOEKHOUDER
optioneel verkrijgbaar




KOPPELEN
optioneel verkrijgbaar



NARVI

Afmetingen (mm)

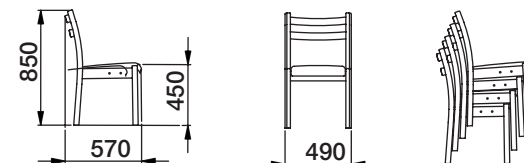


A



B


TWIST

Afmetingen (mm)

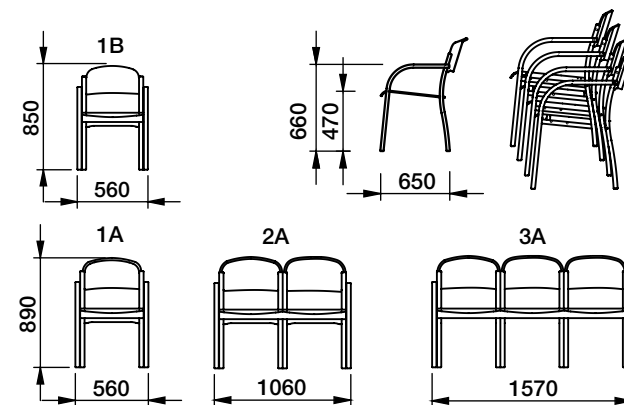

IMPULS

Afmetingen (mm)

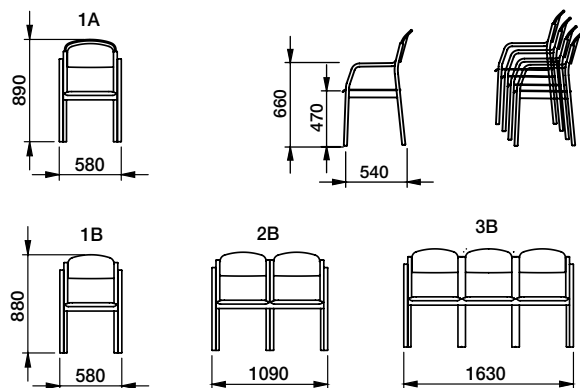

A



B




MEER VARIANTEN
de stoel is verkrijgbaar in
een enkele stoel, een 2-zits
en een 3-zits bank.



STAPELEN

STEP

Afmetingen (mm)

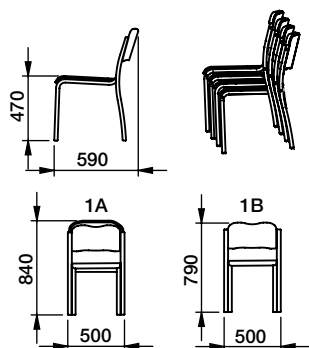

A



B

SCHUIM EN STOFFERING


- De gebruikte materialen zijn zorgvuldig gekozen m.b.t. het type gebruik/belasting. Alle materialen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
- PUR-schuim van hoge kwaliteit wordt gebruikt als vulmateriaal vanwege zijn permeabiliteit, puntelasticiteit, lange levensduur/stevigheid.
- SANAPUR kunstleer wordt gebruikt op fauteuils en beensteunen. Het is een speciaal, afwasbaar materiaal met uitstekende kwaliteiten en een hydrofoob, schimmelwerend, antibacterieel en dampvrijmakend effect. Het is wasbaar bij temperaturen tot 95°C,
- is niet-ontvlambaar en kan worden gedesinfecteerd. Sanapur heeft natuurlijke schimmelwerende weerstand aan de achterkant.
- Doorlaatbaar isolatiemateriaal wordt op de rugleuning gebruikt, bekleding kan makkelijk worden verwijderd.
- Bekleding die kan gekozen worden: afneembaar kunstleer of wasbare stof. Teflon-afwerking is ook mogelijk.
- De nadruk ligt op uithoudingsvermogen, weerstand en gemakkelijk onderhoud voor wat betreft stofferingsmaterialen. Stoffen hoezen zijn afneembaar.

- Speciaal Vinytol 612 N HYG-kunstleer wordt gebruikt welke voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd door het ministerie van Volksgezondheid nr. 84/2001 Sb. Dit kunstleer is bestand tegen de effecten van speeksel en zweet, bevat geen ftalaten, kan worden gereinigd met 60% alcohol of producten zonder oplosmiddelen. Het is niet-ontvlambaar, antibacterieel, schimmelwerend en bovendien geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Een anti-doorlig systeem kan worden gekozen voor patiënten met een hoog risico op doorligwonden.

vuurbestendig / niet-ontvlambaar

- De materialen die worden gebruikt, voldoen aan de hoge niet-ontvlambaarheidsnormen die zijn vastgelegd in BS 5852 CRIB 5. Dit is de strengste, algemeen erkende Britse norm voor het evalueren

van de brandwerendheid van gestoffeerde meubels. Producten die bedoeld zijn voor gebruik in openbare ruimtes, plaatsen met een hogere concentratie van mensen, in ziekenhuizen, enz., Moeten aan deze norm voldoen.

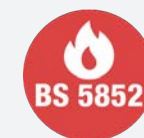

anti-doorlig systeem

- Doorliggen is een term die wordt gebruikt om verschillende soorten, slecht genezende open wonden te beschrijven die kunnen voorkomen bij mensen die niet in staat zijn om zichzelf te bewegen. Lange periodes van druk leiden tot compressie van de bloedvaten en beschadiging van een bepaald gebied van de huid. De huid en dieper weefsel beginnen dan langzaam af te sterven.
- Preventie is het belangrijkste bij doorliggen. Dit bestaat uit het uitsluiten van de oorzaken van doorligwonden. Dit betekent dat de patiënt regelmatig wordt gedraaid, gezonde voeding krijgt, de hygiëne goed is en speciale anti-doorlig-hulpmiddelen worden gebruikt.
- Speciaal schuim met een memory effect wordt gebruikt in het anti-doorligsysteem van de stoelen. Het schuim dat wordt gebruikt, is uitgevonden door



NASA. Producten die ermee zijn gemaakt zijn bijzonder geschikt voor mensen die lijden aan spinale aandoeningen. Het minimaliseren van de drukpunten op bepaalde plaatsen wordt verder verbeterd door speciale profilering. Geprofileerd schuim past zich volledig aan naar de vorm van het lichaam en verspreidt de druk gelijkmatig.

Het anti-doorlig systeem is verkrijgbaar tegen een meerprijs.





**JECH MAAKT HOGE
KWALITEIT MEUBILAIR
MET ZORG**

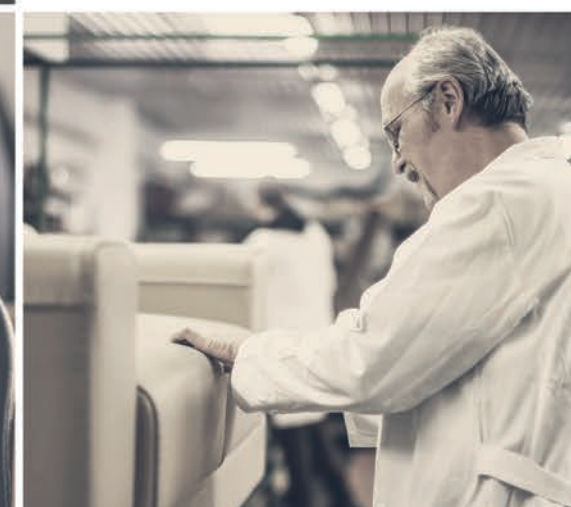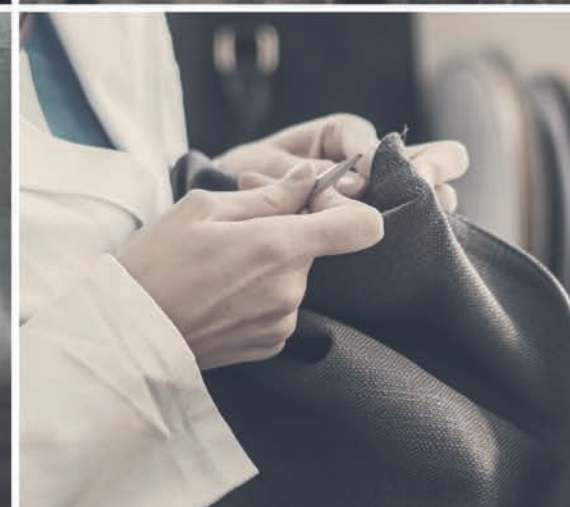

Preston Ability

Jachtwagen 29 | 3897 AM | Zeewolde
Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0)36 53 53 580

E-mail: info@prestonability.com

WWW.PRESTONABILITY.COM

JECH[®]

JECH CZ s.r.o. Nádražní 481, 518 01 Dobruška,
Czech Republic

Tel.: +420 777 279 202, E-mail: info@jech.eu

www.jech.eu