

Expend the
Selfsustainability



DERON MEDICAL BEDS

Dit buitengewoon luxe zorgbed heeft door zijn typerende kenmerken een breed draagvlak.

Presstige® 2000

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® 2000 lift met een oersterke Y-schaarconstructie van 25 cm tot 80 cm hoog. Zelfs in deze hoogste stand blijft de enorme stabiliteit gewaarborgd. Met een eenvoudige bediening middels een handschakelaar zijn alle uitgebreide verstellingen mogelijk, waaronder een luxe comfortstand. De Presstige® 2000 is uiterst fraai vormgegeven en door de luxe afwerking met wielkappen brengt dit tijdloze bed nog meer sfeer.



DERON MEDICAL BEDS

Bij de Prestige® 2000 is alles zo goed op elkaar afgestemd dat de cliënt meer comfort, efficiëntie en veiligheid ervaart.

De Prestige® 2000 Onbeperkt comfort

VOOR U, DE CLIËNT

De verstelling van de Prestige® 2000 geschiedt door middel van een zeer sterke Y-schaarconstructie. Door een ingenieus systeem kan het zorgbed in een luxe fauteuil veranderen. Door deze comfortstand kunt u bijvoorbeeld rechtop ontbijten of tv-kijken. Daarnaast biedt het zorgbed u een lage instap van slechts 25 cm hoog en brengt de luxe afwerking met wielkappen nog meer sfeer.

VOOR U, DE VERZORGER

Bij de Prestige® 2000 is in het bijzonder gelet op de cliëntveiligheid. Zo kan er bij dit zorgbed gekozen worden voor een 10-knops handschakelaar waarmee de anti-Trendelenburg en ook, middels een sleutel, de Trendelenburg ingeschakeld kan worden. Vanzelfsprekend zijn er op dit bed alle opties mogelijk.

De Prestige® 2000 is ook twee-om-twee geremd. Mede door het gebruikerscomfort en de vele functie-mogelijkheden, verlengt het bed uw zorg.

VOOR U, DE ZORGMANAGER

De Prestige® 2000 kent een nog specifiekere afwerking tov de 1000. De hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur. Door een rijk pakket aan opties, de lage instap en de extra verstellingen kan een grotere groep cliënten worden bediend.


De Prestige® 2000 kan ook gecombineerd worden met ons Bossy® Smartmatras, zodat de zorgverleners de grenzen van fysieke belasting niet hoeven te overschrijden. Met de uitgebreide keuze in de buitenzijde brengt de Prestige® 2000, bovenop de veiligheid en stabiliteit, een warm thuisgevoel.



Essentiële Beschermers

DEELBARE ONRUSTHEKKEN

De Prestige® 1000 en 2000 kunnen worden aangepast naar de zorgvraag van het moment. Als de zorgvraag geen onrusthekken vereist, behoeft het zorgbed geen aanpassingen. Indien de zorgvraag zich wijzigt, kunnen eenvoudig onrusthekken geplaatst worden. Deze essentiële beschermers zijn ook verkrijgbaar in de een-deelbare uitvoering. Deze deelbare variant van de onrusthekken heeft, naast de hoge stand, ook een tussenstand en kan daarmee gebruikt worden als sta-op-hulp of als oriëntatiepunt voor de cliënt. De deelbare onrusthekken zijn in drie maatvoeringen verkrijgbaar: 1/2, 1/3 of 2/3. Bij de Prestige® 1000 en 2000 zijn ze standaard leverbaar in bovenstaande drie kleuren. Op aanvraag zijn andere kleuren mogelijk.

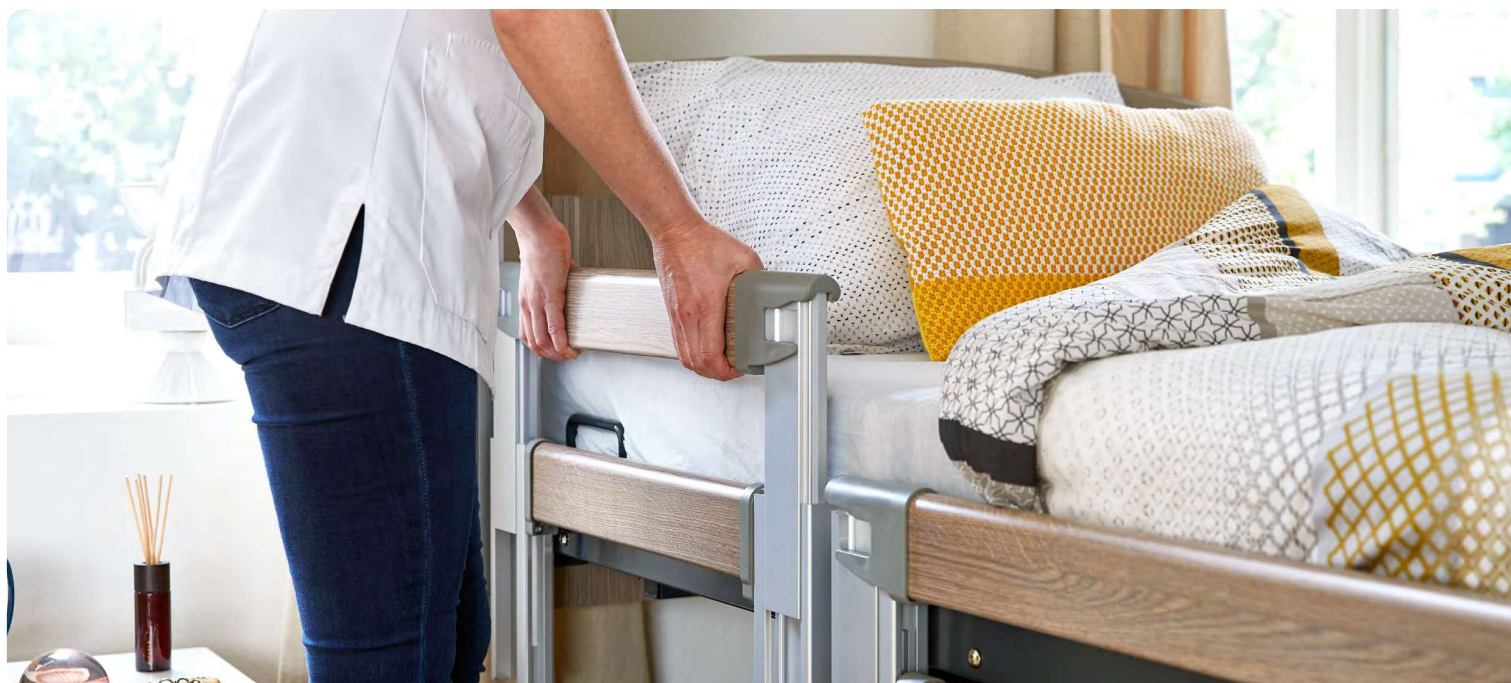



Look at
These specs

Presstige® 2000

Eigenschappen 90 x 200		Presstige® 2000	
Afmeting buitenmaten onderstel	90 x 200 cm	Max. belasting	225 kg
Afmeting buitenmaten	103 x 207 cm	Max. patiëntgewicht	175 kg
Afmeting ligvlak	90 x 200 cm	Nettogewicht van het bed	125 kg
Ligvlakverlenging	10 cm aan hoofdeind	Mogelijkheid doorlopende onrusthekken	ja
Optionele ligvlakverlenging	10 cm aan voeteneind	Mogelijkheid deetbare onrusthekken	ja
Hoogteverstelling	25 - 80 cm	Tilliftoegankelijk	ja
Tussenstop	Optioneel	Mogelijkheid wielkappen	ja
Verstelling ruggedeelte	70°	Mogelijkheid monteren opties	ja
Verstelling bovenbeengedeelte	30°	Elektrische aansluiting	220-230 V
Verstelling onderbeengedeelte	22°	Smartproof	ja
Trendelenburg	14° vergrendeld	Houd rekening met de hoogte van het matras volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen	
Anti-Trendelenburg	14°		
Wielen	100 mm, 75 mm wielkappen		
Beremming	twee-om-twee geremd		
Ligvlak	4-delig metalen ligvlak		



Look at
These specs

Presstige® 2000 in de 110 breedte

Eigenschappen 110 x 200		Presstige® 2000	
Afmeting buitenmaten onderstel	110 x 200 cm	Max. belasting	300 kg
Afmeting buitenmaten	123 x 207 cm	Max. patiëntgewicht	250 kg
Afmeting ligvlak	110 x 200 cm	Nettogewicht van het bed	138 kg
Ligvlakverlenging	10 cm aan hoofteind	Mogelijkheid doorlopende onrusthekken	ja
Optionele ligvlakverlenging	10 cm aan voeteneind	Mogelijkheid deelbare onrusthekken	ja
Hoogteverstelling	25 - 80 cm	Tiliffoegankelijk	ja
Tussenstop	Optioneel	Mogelijkheid wielkappen	ja
Verstelling ruggedeelte	70°	Mogelijkheid monteren opties	ja
Verstelling bovenbeengedeelte	30°	Elektrische aansluiting	220-230 V
Verstelling onderbeengedeelte	22°	Smartproof	ja
Trendelenburg	14° vergrendeld	Houd rekening met de hoogte van het matras volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen	
Anti-Trendelenburg	14°		
Wielen	75 mm, 100 mm wielkappen		
Beremming	twee-om-twee geremd		
Ligvlak	4-delig metalen ligvlak		

Configureer Het bed



1. Kies de Afmeting

BUITENMAAT BED

De Prestige® 2000 is verkrijgbaar in 90/100 x 200/210 en 220.

En ook in de maat: 110 x 200/210 en 220.



2. Kies de Kleur

HOUTKLEUREN

De Prestige® 2000 is standaard leverbaar in onderstaande drie houtkleuren. Op aanvraag zijn meerdere kleuren mogelijk.



Warm beuken



Noten bruin




Vergrijsd eiken

3. Kies het Hoofd- en voetbord



Boog variant

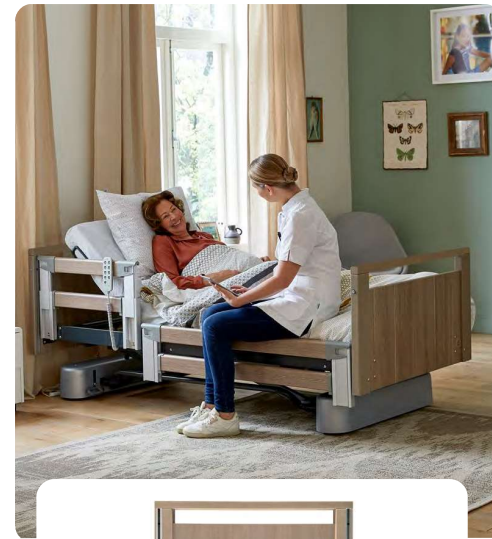

Rechte variant

Voor de maten 100 en 110 is alleen deze variant mogelijk.

4. Kies de Wielen

De Prestige® 2000 is verkrijgbaar met twee verschillende wielen die het zorgbed met twee-om-twee beremen. Het is de hoogte van de wielen die het verschil maakt. Beide wielen, afkomstig van de fabrikant Tente, zijn extreem goed gelagerd en vervaardigd met duurzame materialen.

100 mm wielen

Deze 100 mm wielen zijn standaard twee-om-twee geremd. Optioneel zijn ze ook in centrale beremming mogelijk.



75 mm wielen

Door het gebruikersgewicht te garanderen en doordat deze 75 mm wielen kleiner zijn, draaien de wielen met twee tegelijk. Ook worden deze wielen standaard twee-om-twee geremd gemonteerd.



Centrale beremming

Als optie kan er worden gekozen voor een centrale beremming. Bij het indrukken van het voetpedaal worden direct alle vier de wielen geblokkeerd.



75 mm wielen met wielkappen

Deze wielkappen verbergen de 75 mm hoge wielen. Een luxe afwerking met een fraaie uitstraling.



5. Kies de Handschakelaar

9 knops

- Hoofd- en rugverstelling
- Hooglaag-functie
- Anti-Trendelenburg stand



10 knops

- Hoofd- en rugverstelling
- Hooglaag-functie
- Anti-Trendelenburg stand
- Trendelenburg stand



6. Kies het Onrusthek

Onrusthekken doorlopend

De Prestige® 2000 is ook verkrijgbaar met doorlopende onrusthekken. Met de knoppen in het hoofdbord kan het onrusthek ontgrendeld worden.

Onrusthekken 1/2 - 1/2

De Prestige® 2000 is ook verkrijgbaar met gedeelde onrusthekken in de volgende verdeling: 1/2 - 1/2. Deze combinatie kent een tussenstop op 22 cm.

Onrusthekken 1/3 - 2/3

De Prestige® 2000 is ook verkrijgbaar met gedeelde onrusthekken in de volgende verdeling: 1/3 - 2/3. Deze combinatie kent een tussenstop op 22 cm.

7. Kies een bijpassend Nacht- en kledingkast



Kledingkast

- + Afmeting: 100 x 200 x 60 (b x h x d)
- + Locker voor waardevolle spullen
- + Afsluitbaar



Nachtkast 2

- + Afmeting: 48 x 48 x 75 (b x h x d)
- + 4 wieltjes, 2 diagonaal geremd

Nachtkast 3

- + Afmeting: 45 x 53 x 87 (b x h x d)
- + Hydraulisch kantelbaar plateau
- + Aan twee zijdes te gebruiken



8. Kies de Accessoire

Voor iedere zorgwens kent de Prestige® 2000 een rijk pakket aan accessoires. Kijk op de pagina van de Accessoires voor het totale overzicht.

