


Technische informatie Illico

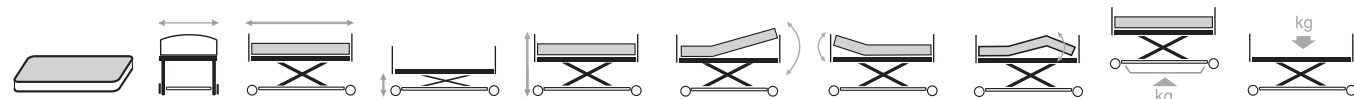

900x2000x120 max. 20 kg 1024 2080 298-828 783-1313 36,8° 70° -17,2° 83,5* 170

* gewicht excl. onrusthekken en zelfoprichter. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Verschillende bedpanelen, verschillende onrusthekken



Voor een perfecte integratie bij uw bestaand interieur kan het **Illico** bed uitgerust worden met oxide of beech panelen.



De metalen onrusthekken, 1 per kant, zijn gemakkelijk te bevestigen en heel eenvoudig van positie te veranderen. De houten onrusthekken, 2 per zijde, zijn compleet met plastic covers aan de uiteinden.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



De matrasbodem is tevens beschikbaar in **ABS** materiaal voor een gemakkelijke reiniging.




N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



Informatie voor visueel gehandicapten is beschikbaar op aanvraag. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 09/2018

Illico

Elektrisch verstelbaar verzorgingsbed



Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit

Voorbehouden technische wijzigingen



Grensverleggend in mobiliteit


Illico

Comfortabel en praktisch

- Hoogte aanpassing lattenbodemp, 298 mm tot 828 mm
- Volledig elektrisch verstelbaar met de geleverde besturing
- Elektrische verstelling van het hoofdgedeelte
- Elektrische knieknik, het voetengedeelte kan manueel worden aangepast
- Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
- Handbediening met vergrendeling functie
- Maximum laadvermogen 170 kg (patiënt en matras)
- Twee paar onrusthekken
- Zelfoprichter kan links of rechts worden gemonteerd
- Vier zwenkwielen met aparte remmen
- Verschillende voor- en achterpanelen in hout
- Eenvoudige montage en demontage
- Transportset beschikbaar



Gebruiksvriendelijke handset met vergrendelfuncties

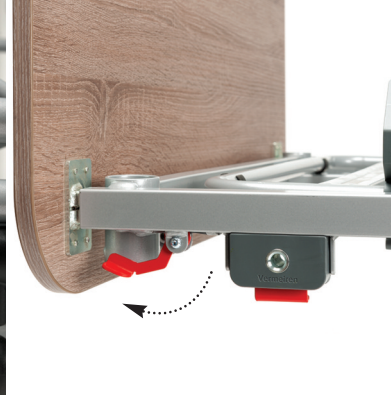

Snelle demontage van de panelen en onrusthekken



Sturdy designed wheels with locks




Grote, stervormige, schroeven voor snelle (de)montage van het bedkader



Transportkit op wielen voor een vlotte stockage



Demontage van het bedkader zonder extra gereedschappen

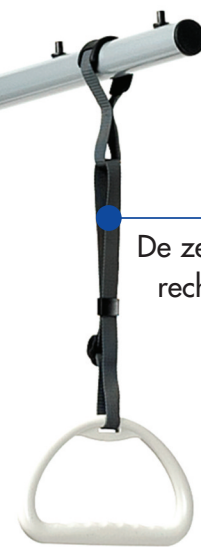

De zelfoprichter kan zowel links als rechts van het bedkader geplaatst worden. Het optreksysteem is tevens regelbaar in lengte.



4 matras houders (2 aan het hoofdgedeelte en 2 aan het voetengedeelte) houden de matras perfect op z'n plaats.

Eén enkele druk op de knop om de onrusthekken te verlagen

Het voetengedeelte kan manueel verstelt worden in verschillende hoogtes.

De bediening is voorzien van een lang verlengsnoer zodat deze overal in de buurt van het bed kan worden gebruikt.

GEMAKKELIJKE montage zonder extra gereedschappen

Gedaan met zoeken naar de juiste schroevendraaiers of passende inbussleutels bij het **Illico** bed. Eén persoon en enkele minuten tijd zijn voldoende om het **Illico** bed te monteren of te demonteren. Neem de onrusthekken weg, verwijder de houten panelen, demonteer het bedkader en klaar.

